



Bausch

WE MAKE OCCLUSION VISIBLE

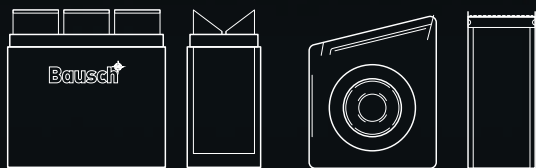

MOYENS DE CONTRÔLE DE L'ARTICULATION ET DE L'OCCLUSION

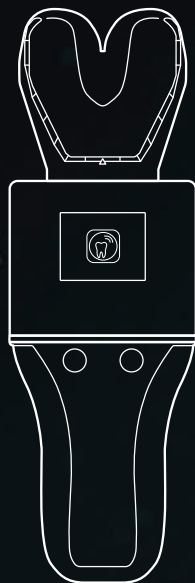





Nous rendons l'occlusion visible.

Les fondateurs de l'entreprise, le Dr Jean Bausch et le Dr Hans Bausch, tous deux dentistes, ont décelé très tôt la nécessité de développer un papier d'articulation sensible à la pression, destiné à visualiser les occlusions le plus précisément possible.

Depuis 1953, l'entreprise Dr. Jean Bausch GmbH & Co. KG fabrique des papiers d'articulation avec coloration progressive. Le produit BK 01, qui a fait ses preuves, a été le premier papier d'articulation à présenter les différentes forces masticatoires en nuances colorées.



Aujourd'hui encore, ce principe de coloration progressive reste un outil précieux pour rendre visibles les contacts prématurés.

La coloration précise des surfaces à contrôler, comme les céramiques, les matières synthétiques ou les métaux, est pour nous une priorité absolue.

Cela a abouti à une gamme complète de moyens de contrôle de l'articulation et de l'occlusion dans différentes forces, formes et couleurs, ce qui fait de nous l'un des principaux fabricants mondiaux.

En tant qu'entreprise familiale gérée par la deuxième génération, nous misons aussi désormais sur l'innovation et le développement constant des produits. Nous avons ainsi présenté le nouveau moyen de contrôle d'occlusion numérique OccluSense® à l'IDS 2019 de Cologne.



Madame Evelyn Bausch, épouse du Dr Hans Bausch, intègre l'entreprise en 1961.

André et Peter Bausch (les fils du Dr Hans Bausch et d'Evelyn Bausch) dirigent l'entreprise Dr. Jean Bausch GmbH & Co. KG depuis 1998.

Tous les produits sont fabriqués selon les exigences de la directive européenne relative aux dispositifs médicaux et sont soumis au contrôle systématique de notre système d'assurance qualité certifié ISO 13485.

Cette brochure, qui s'adresse en priorité aux utilisateurs professionnels, se veut utile pour choisir le moyen de contrôle approprié en fonction de l'utilisation prévue.




- 1953 - Création de l'entreprise à Cologne avec le premier papier d'articulation à coloration progressive
- 1962 - Première participation à l'IDS de Cologne
- 1972 - Lancement du papier d'occlusion ultrafin de 40 µm
- 1974 - Transfert de la production en Rhénanie-Palatinat
- Début des papiers en forme de fer à cheval
- 1979 - IDS de Düsseldorf : Mise sur le marché d'Arti-Fol®
- Création de Bausch Dental Co. of America sous forme de bureau de représentation
- 1983 - IDS de Munich : Arti-Fol® 8 µm en 4 couleurs
- 1986 - IDS de Cologne : Indicateur Arti-Spot® Highspot
- 1994 - Création de Bausch Articulating Papers, Inc. à Nashua, NH, États-Unis
- 1999 - IDS de Cologne : Arti-Fol® metallic 12 µm
- 2003 - Création de Bausch Articulating Papers (Australasia) Pty. Ltd à Sydney, Australie
- 2007 - Création de Bausch Articulating Papers Japan K.K. à Osaka, Japon
- Création de Bausch Importação de Materiais Odontológicos Ltda. à São Paulo, Brésil
- 2009 - Extension de la surface de production en Rhénanie-Palatinat, Allemagne
- 2017 - IDS de Cologne : Présentation du système OccluSense® équipé d'un capteur de pression à revêtement coloré
- 2019 - IDS de Cologne : Début de la commercialisation d'OccluSense®
- 2020 - Extension du bâtiment de production et des salles de formation à Cologne
- 2021 - Création de Bausch Articulating Papers Co. Ltd. à Séoul, Corée

Table des matières

Occlusion - Influences - Conséquences	
Déceler les contacts prématurés de manière fiable	6
Moyens de contrôle de l'articulation et de l'occlusion Bausch	
Vue d'ensemble des épaisseurs	8
OccluSense® - Contrôle de l'occlusion numérique	12
Le principe de la coloration progressive	16
Le contrôle de l'occlusion avec la méthode en 2 phases	18
Papiers d'articulation et d'occlusion/soies d'articulation	20
Papiers d'articulation avec coloration progressive 200 µm	22
Papiers d'articulation PROGRESS 100 - 100 µm	24
Arti-Ceram	26
Soie d'articulation avec coloration progressive 80 µm	28
Papiers d'occlusion Arti-Check® ultrafin 40 µm Bausch	30
Feuilles de contrôle de l'occlusion Bausch	32
Feuille Bausch Arti-Fol® metallic Shimstock 12 µm noir/rouge	
Feuille Bausch Arti-Fol® metallic Complete 12 µm noir/rouge	34
Feuille Bausch Arti-Fol® metallic Shimstock 12 µm	36
Feuille d'articulation Arti-Fol® 8 µm	38
Liquides et sprays	40
Indicateur Bausch Arti-Spot® High-Spot	42
Spray d'occlusion Bausch Arti-Spray®	44
Marqueur de zones de pression Bausch Bio-Ink®-Flow Bausch	46
Vernis de contrôle de l'occlusion Bausch Arti-Brux®	48
Arti-Pink Bite Wax	50
Jauges Bausch Fleximeter®-Strips	54
Instruments et accessoires Bausch	58
Papier et pinces Bausch Arti-Fol®	60
Fourchettes d'occlusion Bausch Accessoires	62

Occlusion – Influences – Conséquences

Dysfonctionnements cranio-mandibulaires

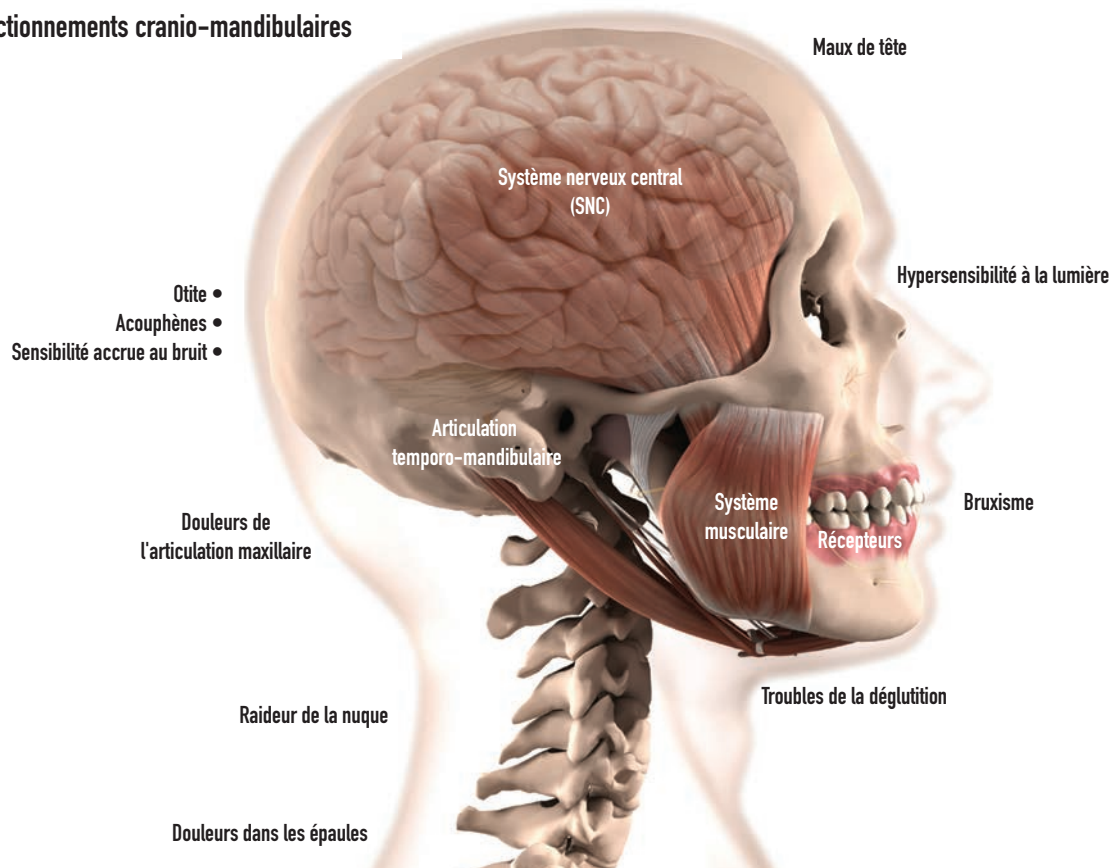

Déceler les contacts prématurés de manière fiable.

L'occlusion correspond à chaque contact entre les dents du maxillaire supérieur et du maxillaire inférieur.

Elle fait partie du système stomatognathique, qui est l'ensemble anatomique constitué de l'articulation temporo-mandibulaire, de l'appareil manducateur, des nerfs sensoriels, des récepteurs de pression et du système nerveux central.

Chaque restauration, extraction ou traitement prothétique ainsi que chaque traitement orthodontique modifie l'occlusion dans ses aspects statiques et dynamiques, ce qui influe sur l'ensemble anatomique.

Dans ce contexte, l'entreprise Bausch s'est donnée pour mission de développer des moyens de contrôle de l'occlusion pour les utilisateurs professionnels, afin qu'ils puissent reproduire l'occlusion physiologique individuelle de chaque patient.

En l'occurrence, il convient non seulement de veiller à contrôler l'occlusion statique et le contact dentaire sans mouvement du maxillaire inférieur en intercuspidie maximale, mais aussi les mouvements dynamiques.

Les mouvements dynamiques, c'est-à-dire les contacts dentaires créés par un mouvement du maxillaire inférieur sont différents au niveau des guidages antérieurs, canins et groupés.

Des feuilles de 8 µm et 12 µm de différentes couleurs ont été conçues pour contrôler les différents modèles de mouvement sur toute l'arcade dentaire.

Il est ainsi possible d'utiliser :

Le noir	en mode statique
Le rouge	en latérotrusion
Le vert	en médiotrusion
Le bleu	en protrusion

Une modification de l'occlusion habituelle, c'est-à-dire l'occlusion statique acquise par habitude, peut modifier le tonus neuromusculaire et donc, déclencher une position de soulagement adaptée qui peut se manifester par une maladie de type CMD (dysfonctionnements cranio-mandibulaires).

L'interaction des éléments ci-dessus est représentée clairement sur le schéma.

La science a défini plusieurs concepts d'occlusion pouvant servir de modèles pour la reconstitution de l'occlusion. Ceux-ci doivent toutefois être considérés comme des modèles uniquement, car il n'existe pas « d'occlusion universelle ».

L'occlusion individuelle devrait au contraire être placée au premier plan, en tenant compte des aspects biomécaniques, pendant le traitement de chaque patient.

L'utilisation réfléchie et judicieuse des différents papiers et feuilles de différentes épaisseurs permet de s'assurer

que les contacts perturbateurs importants omis visuellement sont détectés.

Les papiers d'articulation 100 µm et 200 µm Bausch avec coloration progressive servent à localiser globalement les points de contact statiques, car ils colorent tous les matériaux et absorbent la salive. Ils peuvent être utilisés au cabinet dentaire et en laboratoire dentaire.

Les papiers d'occlusion Arti-Check® ayant une épaisseur de 40 µm font également partie de la gamme des papiers d'occlusion. Ces papiers fins sont enduits de colorant liquide des deux côtés et marquent précisément grâce à la faible résistance du matériau, ce qui réduit les marques de bavure.

Le dispositif de contrôle numérique OccluSense®, qui peut démontrer la répartition de la force masticatoire de toute l'arcade dentaire dans le temps, a été mis au point afin d'intégrer le niveau musculaire, qui a un effet majeur sur l'occlusion.

Il est important de réaliser un contrôle final de l'occlusion à l'aide de moyens de contrôle adéquats pour éviter les contacts perturbateurs et ainsi exclure tout trouble éventuel de l'articulation temporo-mandibulaire associé.

	200 µm	bleu	imprégné	double face	papier 200 µm
	200 µm	rouge	imprégné	double face	papier 200 µm
	100 µm	bleu	imprégné	double face	papier 100 µm
	100 µm	rouge	imprégné	double face	papier 100 µm
	200 µm	vert	imprégné	double face	papier 200 µm
	100 µm	vert	imprégné	double face	papier 100 µm
	80 µm	bleu	imprégné	double face	soie 80 µm
	80 µm	rouge	imprégné	double face	soie 80 µm
	80 µm	vert	imprégné	double face	soie 80 µm
	40 µm	bleu/bleu	enduit	double face	papier 20 µm + 10 µm + 10 µm enduit
	40 µm	rouge/rouge	enduit	double face	papier 20 µm + 10 µm + 10 µm enduit
	40 µm	bleu/rouge	enduit	double face	papier 20 µm + 10 µm + 10 µm enduit
	12 µm	noir/rouge	enduit	double face	feuille 12 µm + 6 µm + 6 µm enduit
	12 µm	noir	enduit	simple face	feuille 12 µm + 6 µm enduit
	12 µm	rouge	enduit	simple face	feuille 12 µm + 6 µm enduit
	12 µm	vert	enduit	simple face	feuille 12 µm + 6 µm enduit
	12 µm	bleu	enduit	simple face	feuille 12 µm + 6 µm enduit
	12 µm	non enduit	non enduit	-	feuille 12 µm sans enduit
	8 µm	noir	enduit	simple face	feuille 8 µm + 6 µm enduit
	8 µm	rouge	enduit	simple face	feuille 8 µm + 6 µm enduit
	8 µm	vert	enduit	simple face	feuille 8 µm + 6 µm enduit
	8 µm	bleu	enduit	simple face	feuille 8 µm + 6 µm enduit
	8 µm	noir	enduit	double face	feuille 8 µm + 6 µm + 6 µm enduit
	8 µm	rouge	enduit	double face	feuille 8 µm + 6 µm + 6 µm enduit
	8 µm	vert	enduit	double face	feuille 8 µm + 6 µm + 6 µm enduit
	8 µm	bleu	enduit	double face	feuille 8 µm + 6 µm + 6 µm enduit

Moyens de contrôle de l'articulation et de l'occlusion Bausch.

Depuis 1953, nous sommes spécialisés dans les moyens de contrôle de l'occlusion et représentons donc un élément central de la médecine dentaire.

Au fil du temps, nous avons adapté notre gamme de produits aux besoins des utilisateurs professionnels, mais aussi aux méthodes de traitement et matériaux dentaires.

Au début des années 1970, nous proposons non seulement les papiers d'articulation et soies d'articulation éprouvés, mais aussi des papiers fins affichant une épaisseur de 40 µm seulement.

Cette même décennie, nous avons créé le concept dentaire de gnathologie, qui correspond aujourd'hui au domaine du diagnostic fonctionnel. Pour appliquer ce concept, des moyens de contrôle plus fins étaient nécessaires. Depuis, nous proposons des feuilles indéchirables, fines et à coloration précise de différentes teintes et épaisseurs.

Des couleurs liquides pour contact, des sprays pour occlusion et d'autres indicateurs colorés sont également disponibles.

Nous avons présenté le système OccluSense®, qui complète le contrôle d'occlusion classique avec une version numérique, au Salon dentaire international IDS 2019.



Papiers d'articulation 200 µm



- coloration progressive
- bonne coloration sur les surfaces occlusales humides
- coloration bien visible sur la céramique
- coloration en fonction de la pression
- pour le contrôle de l'occlusion statique
- marquage bien visible sur une surface étendue
- non tissé blanc – bien adapté à la surface occlusale
- pour le premier contrôle des contacts précoces
- adaptés à tous les matériaux



Papiers d'articulation 100 µm



- coloration progressive
- bonne coloration sur les surfaces occlusales humides
- coloration bien visible sur la céramique
- coloration en fonction de la pression
- pour le contrôle des occlusions statique et dynamique
- marquage extrêmement précis et bien visible
- non tissé très doux et indéchirable
- bien adaptés à la surface occlusale
- pour le premier contrôle des contacts précoces
- adaptés à tous les matériaux



Arti-Ceram 200 µm | 100 µm



- coloration progressive
- colore bien les surfaces occlusales humides
- coloration bien visible sur la céramique CAD/CAM
- coloration sur pression
- contrôle de l'occlusion statique (200 µm)
- contrôle de l'occlusion statique et dynamique (200 µm)
- marquage précis et visible
- matériau non tissé souple - s'adapte bien à la surface occlusale (200 µm)
- matériau non tissé très doux et résistant à la déchirure (100 µm)
- s'adapte bien à la surface occlusale
- pour un premier contrôle des contacts prématurés
- convient à tous les matériaux



Soies d'articulation 80 µm



- coloration progressive
- bonne coloration sur les surfaces occlusales humides
- coloration bien visible sur la céramique
- coloration en fonction de la pression
- pour le contrôle des occlusions statique et dynamique
- marquage extrêmement précis et bien visible
- tissu en soie très doux et indéchirable - bien adapté à la surface occlusale
- pour le premier contrôle des contacts précoces
- adaptées à tous les matériaux
- recommandées avec la méthode Gerber



Papiers d'articulation 40 µm



- bonne coloration sur les surfaces occlusales humides
- coloration bien visible sur la céramique
- coloration en fonction de la pression et de l'impact
- pour le contrôle des occlusions statique et dynamique
- marquage extrêmement précis et bien visible
- papier très fin
- adaptés à tous les matériaux
- marquage précis des points de contact occlusaux



Arti-Fol® metallic 12 µm



- feuille métallisée très fine
- coloration très précise de tous les contacts
- absence de marques de bavure
- coloration en fonction de l'impact
- antistatique
- contacts extrêmement précis
- bien adaptée à la surface occlusale
- adaptée à tous les matériaux
- absence de déchirure lors du contrôle et du retrait
- bonne coloration sur les matériaux en céramique secs
- également disponible en version non enduite (feuille Shimstock)
- également disponible en larges rouleaux de 75 mm



Arti-Fol® 8 µm




- feuille très fine
- coloration très précise de tous les points de contact
- absence de marques de bavure
- coloration en fonction de l'impact
- contacts extrêmement précis
- bien adaptée à la surface occlusale
- adaptée à tous les matériaux
- absence de déchirure lors du contrôle et du retrait
- également disponible en larges rouleaux de 75 mm
- avec revêtement simple face ou double face



OccluSense® 60 µm

- représentation des forces masticatoires visible sur les dents et numériquement sous forme de diagramme à barres
- les relations cuspidales/fosses abruptes ou plates marquées sont visualisées grâce aux différentes couleurs des barres
- évaluation occlusal étendu pour l'occlusion statique et dynamique
- visualisation des forces axiales sur les restaurations supportées par des implants et les restaurations prothétiques
- détection des contacts prématurés
- amélioration de la communication avec les patients et de l'information
- capteur de pression électronique : 60 µm, fin, souple et avec revêtement coloré
- documentation facile sur l'application pour iPad OccluSense®
- représentation en pourcentage de la répartition des forces masticatoires

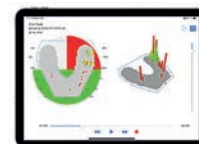



CELLERANT
BEST OF CLASS
TECHNOLOGY AWARD
2019



Bausch OccluSense® – Contrôle d'occlusion numérique.

S'efforcer de visualiser les contacts occlusaux avec précision faisait partie des principales exigences que nous nous sommes imposées lorsque nous avons mis au point OccluSense®. Tout comme les papiers et feuilles à articuler éprouvés, le capteur enduit de couleur d'OccluSense® a précisément la propriété de marquer clairement et ponctuellement.


OccluSense® permet non seulement de faire apparaître le contact occlusal final en modes statique et dynamique, mais aussi d'enregistrer l'évolution au fil du temps jusqu'à l'achèvement du mouvement d'occlusion.

L'interprétation de la pression occlusale enregistrée par OccluSense® se distingue des matériaux de contrôle d'occlusion classiques, car elle fournit beaucoup plus d'informations et ce, rapidement. Ces informations incluent l'enregistrement des contacts d'occlusion pendant le mouvement du maxillaire inférieur, du contact initial jusqu'à la position intercuspidale maximale. OccluSense® de Bausch permet à chaque dentiste d'enregistrer ces types d'occlusion et de les évaluer progressivement.

En 2019, notre système OccluSense® a reçu le prix Cellerant Best of Class Technology Award à l'occasion du congrès ADA/FDI de San Francisco, CA, U.S.A.

Dans le cadre de l'OE-A Competition 2021, organisée par l'Organic and Printed Electronics Association (OE-A), notre système OccluSense® a remporté le premier prix dans la catégorie « New Products ».

Pour de plus amples informations sur le système OccluSense®, rendez-vous sur le site : www.occlusense.com

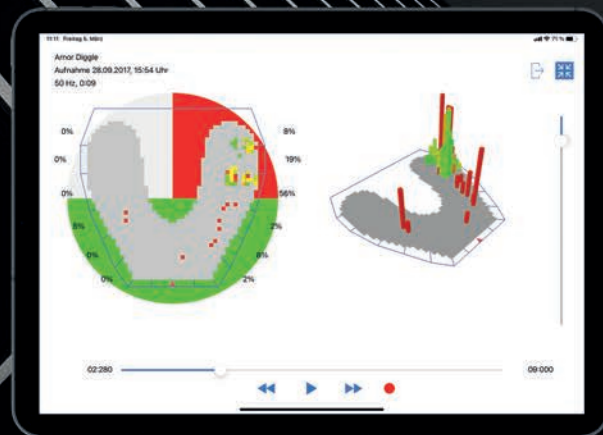



Contrôle d'occlusion numérique dans le cadre de l'approche thérapeutique globale

Le nouveau produit convivial primé « Occlu-Sense® » de Bausch allie enregistrement traditionnel et numérique de la répartition de la force masticatoire sur les surfaces occlusales.

L'appareil OccluSense® équipé de son capteur de pression à usage unique de 60 µm seulement avec revêtement de couleur rouge est utilisé comme une feuille de contrôle d'occlusion classique et offre les fonctionnalités suivantes:

- Contrôle de toute l'arcade dentaire
- Visualisation de la répartition de la force occlusale au fil du temps
- Visualisation de la répartition de la force occlusale en pourcentage

- Visualisation des mouvements en latérotusion et des interférences possibles en médiotusion
- Représentation analogique et numérique des rapports occlusaux
- Documentation illustrée des étapes de traitement grâce à une comparaison avant/après
- Utilisable dans le cadre d'un traitement par gouttière, de restaurations par implants prothétiques, de restaurations d'ampleur dans les domaines de l'ostéopathie et de la physiothérapie, par exemple.

Le système OccluSense® : Appareil portable OccluSense®

Appareil portable fonctionnant sur batterie pour l'application des capteurs

Chargeur OccluSense®

Chargeur par induction pour une recharge sans fil

Capteur OccluSense® - capteur de pression électronique


- 60 µm d'épaisseur seulement
- souple
- revêtement de couleur rouge
- permet d'enregistrer les conditions de pression occlusale en 256 niveaux de pression
- pour le contrôle de l'occlusion statique, mais aussi dynamique

OccluSense® CenterFix Dispositif de centrage BK 5040

Pour de plus amples informations sur le système OccluSense®, rendez-vous sur le site www.occlusense.com

				REF
		Set		BK 5000
	L	25 x		BK 5025
	XL	25 x		BK 5035
		10 x		BK 5040


Le principe de la coloration progressive.

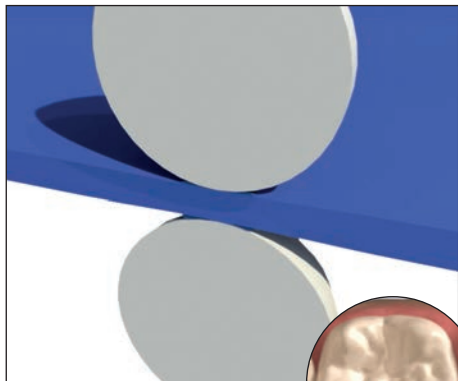

Pression légère


Un contact dentaire physiologique est reconnaissable grâce au principe de la nuance progressive de couleur.

Ces types de marquages ne représentent pas les contacts défectueux.

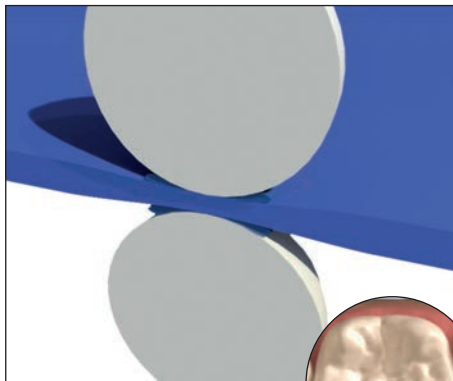

Pression intense

En cas de pression occlusale plus intense, une quantité plus importante de couleur se dégage du matériau et une coloration plus sombre met en évidence les points de contact se rapprochant. Il apparaît alors un marquage typique de nos moyens de contrôle progressif, la couleur extraite formant un cercle autour du point de contact.

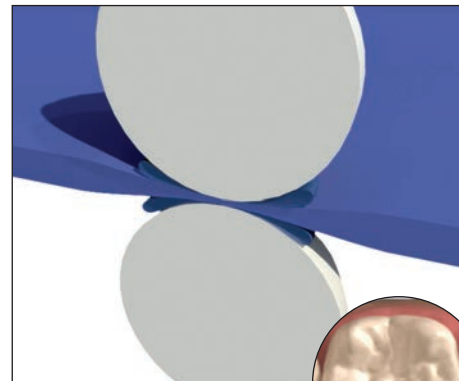

Pression maximale

En intercuspidation maximale ou en cas de contact erroné, cet effet est encore plus visible, car le point de contact à proprement parler ne présente quasiment pas de couleur au centre du marquage, mais il est entouré d'un cercle de couleur sombre.

Le principe de la coloration progressive.



Les papiers à articuler 200 µm, « PROGRESS 100 » 100 µm, Arti-Ceram 200 µm et 100 µm ainsi que les soies à articuler 80 µm ont la propriété de transférer progressivement les couleurs.



Les papiers d'articulation et soies d'articulation Bausch avec coloration progressive permettent de visualiser l'occlusion statique.

La structure spongieuse du non tissé doux ou de la soie accumule la couleur extraite sous la pression. L'utilisation de ces produits permet de marquer chaque contact dentaire.

Dans ce cadre, la nuance progressive de couleur implique que l'exercice d'une force masticatoire croissante permet d'exprimer davantage de couleur du matériau et de la transférer sur les surfaces occlusales.


L'agent adhésif intégré dans le mélange coloré Transculase® permet à la couleur de mieux adhérer sur les différents matériaux et les dents naturelles. Le papier d'articulation sensible à la pression permet d'obtenir un relief précis de la répartition de la pression masticatoire.

Nos moyens de contrôle progressifs conviennent donc parfaitement aux surfaces occlusales humectées de salive.

Pour obtenir une représentation précise des contacts occlusaux, nous vous recommandons d'associer plusieurs moyens de contrôle.



Le contrôle de l'occlusion avec la méthode en 2 phases

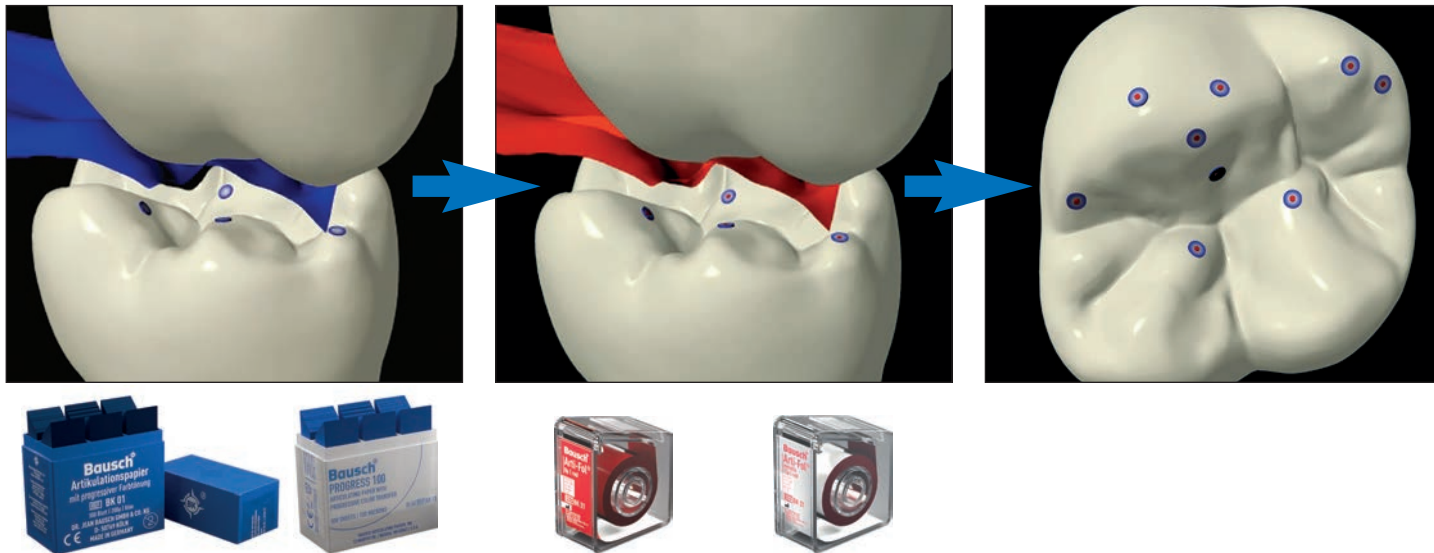

Pour que les points de contact soient également plus visibles sur les surfaces occlusales humectées de salive, nous recommandons d'utiliser le moyen de contrôle progressif en association avec des feuilles plus fines.

La première étape consiste à contrôler l'occlusion avec le papier d'articulation 200 µm ou « PROGRESS 100 » 100 µm. Ces papiers absorbent la salive et forment ainsi une

base parfaite pour la deuxième étape, à savoir marquer précisément les points de contact ponctuellement à l'aide des feuilles Arti-Fol® metallic 12 µm ou Arti-Fol® 8 µm.

Avantages de cette méthode en 2 phases :

- Représentation différenciée des points et surfaces d'occlusion

- Représentation contrastée grâce aux différentes couleurs
- Meilleur report des couleurs des feuilles d'articulation sur les surfaces humectées de salive grâce au transfert préalable de l'agent adhésif Transculase®



Papiers d'articulation et d'occlusion Bausch

Soies d'articulation Bausch

En 1953, notre papier d'articulation avec coloration progressive formait la pierre angulaire de la création de notre entreprise.

Peu après sont apparues les soies d'articulation ayant une épaisseur de 80 µm qui sont toujours utilisées, en particulier pour le contrôle de l'occlusion en laboratoire dentaire.

En 1972, les papiers d'occlusion ultrafins 40 µm Bausch sont intégrés à la gamme.

En 2000, nous lançons le produit PROGRESS 100, un papier d'articulation avec coloration progressive 100 µm.

Papiers d'articulation Bausch avec coloration progressive 200 µm



				REF
	52 mm x 18 mm	300 x		BK 01
	52 mm x 18 mm	300 x		BK 1001 
	52 mm x 18 mm	300 x		BK 02
	52 mm x 18 mm	300 x		BK 1002 
		50 x		BK 03
		50 x		BK 04
	52 mm x 18 mm	300 x		BK 05

 = recharge écologique

 = recommandé pour l'utilisation en cabinet

 = recommandé pour l'utilisation en laboratoire

Papiers d'articulation Bausch avec coloration progressive 200 µm



Papiers d'articulation Bausch avec coloration progressive 200 µm

Le papier d'articulation Bausch avec coloration progressive 200 µm présente les différentes forces occlusales dans des couleurs qui dépendent de la pression occlusale:

- PRESSION LÉGÈRE** – marquage clair
- PRESSION INTENSE** – marquage sombre
- PRESSION MAXIMALE** – anneau de couleur sombre autour du contact occlusal

Le dentiste obtient une vue précise de la répartition de la pression masticatoire. Les contacts prématurés sont visibles.

Bandes |  | 

par ex. pour obturations, couronnes et bridges (odontologie restauratrice et fonctionnelle)

Forme de fer à cheval |  | 

par ex. pour gouttières d'occlusion, prothèse totale, contrôle de toute l'arcade dentaire dans l'articulateur et sur le patient

Papiers d'articulation Bausch PROGRESS 100 – 100 µm



				REF	
	52 mm x 18 mm	300 x		BK	51
	52 mm x 18 mm	300 x		BK	52
		50 x		BK	53
		50 x		BK	54
	52 mm x 20 mm	50 x		BK	57
	52 mm x 20 mm	50 x		BK	58



= recommandé pour l'utilisation en cabinet



= recommandé pour l'utilisation en laboratoire

Papiers d'articulation Bausch PROGRESS 100 – 100 µm



Papiers d'articulation Bausch PROGRESS 100 avec coloration progressive 100 µm

Ce papier doux, renforcé par des fibres, ayant un volume élevé de stockage de couleur, s'adapte parfaitement aux surfaces occlusales. Grâce à sa nuance progressive de couleur, il marque précisément les points de contact occlusaux.

Grâce à l'association unique de l'agent adhésif Transculase® et d'un papier fin, les contacts et surfaces d'occlusion apparaissent précisément sur les surfaces ayant un poli miroir, comme la substance dentaire

naturelle, les alliages métalliques et les matériaux céramiques, par exemple.

Forme de fer à cheval |  |  |

par ex. pour gouttières d'occlusion, prothèse totale, contrôle de toute l'arcade dentaire dans l'articulateur et sur le patient

Bandes |  |  |

par ex. pour obturations, couronnes et bridges (odontologie restauratrice et fonctionnelle)

Bausch Arti-Ceram Papier à articuler 200 µm et 100 µm



					
Arti-Ceram 200µm					
	52 mm x 20 mm	50 x		BK	92
		50 x		BK	93
Arti-Ceram 100µm					
	52 mm x 20 mm	50 x		BK	97
		50 x		BK	98

 = recommandé pour l'utilisation en cabinet
 = recommandé pour l'utilisation en laboratoire

Bausch Arti-Ceram Papier à articuler 200 µm et 100 µm



Bausch Arti-Ceram Papier à articuler vert 200µm et 100 µm

Pour obtenir une teinte qui s'harmonise parfaitement avec la substance dentaire naturelle, il existe différents types de céramique, dont la vitrocéramique, la céramique à base d'oxyde de zirconium et la céramique de feldspath. Ces matériaux sont utilisés pour des prothèses, provisoires, inlays et onlays et peuvent être polis pour une esthétique exceptionnelle. Cependant, l'adaptation de l'occlusion sur ces matériaux brillants, souvent fabriqués à l'aide des technologies CAD/CAM, pose des défis aux dentistes, car les moyens de contrôle traditionnels pour vérifier l'occlusion ne sont souvent pas suffisants.

Pour pouvoir identifier efficacement les contacts prématurés, nous nous sommes penchés de manière intensive sur cette problématique et avons opté pour la couleur VERTE, qui a fait ses preuves et est établie depuis des décennies dans la technique dentaire. Cette coloration présente l'avantage décisif d'être clairement visible et contrastée sur les surfaces esthétiques brillantes des céramiques grâce à des pigments de couleur spéciaux. Notre produit Arti-Ceram est disponible en deux épaisseurs, 200µm et 100µm, en bandes et en feuille fer à cheval, et permet une adaptation précise de l'occlusion afin de garantir la meilleure fonction et la meilleure esthétique possibles.

Bandes |  | 
par ex. pour obturations, couronnes et bridges
(odontologie restauratrice et fonctionnelle)

Forme de fer à cheval |  | 
par ex. pour gouttières d'occlusion, prothèse totale,
contrôle de toute l'arcade dentaire dans l'articulateur et
sur le patient

Soie d'articulation Bausch avec coloration progressive 80 µm



			REF
	80 mm x 3 m		BK 06
	80 mm x 3 m		BK 876
	80 mm x 3 m		BK 877
	16 mm x 10 m		BK 07
	16 mm x 10 m		BK 08



= recommandé pour l'utilisation en cabinet



= recommandé pour l'utilisation en laboratoire

Soie d'articulation Bausch avec coloration progressive 80 µm



Soie d'articulation avec coloration progressive 80 µm

La soie d'articulation Bausch est un produit textile haut de gamme, dont les propriétés sont comparables à celles du papier d'articulation avec coloration progressive 200 µm. Indéchirable, le tissu s'adapte de manière optimale aux cuspides et aux fosses en raison de sa faible épaisseur et de sa souplesse.

Le marquage de la soie d'articulation est extrêmement précis et sa couleur est intense.

La soie d'articulation est un moyen de contrôle de l'occlusion qui fait ses preuves depuis des décennies en technique et médecine dentaires pour le contrôle des surfaces masticatoires.

Rouleaux |  | 

par ex. pour gouttières d'occlusion, prothèse totale, contrôle de toute l'arcade dentaire dans l'articulateur.

Papiers d'occlusion Bausch Arti-Check® ultramines 40 µm



				REF	
	103 mm x 20 mm	200 x		BK 09	
	103 mm x 20 mm	200 x		BK 10	
	100 mm x 70 mm	100 x		BK 11	
	100 mm x 70 mm	100 x		BK 12	
	16 mm x 15 m			BK 13	BK 1013
	16 mm x 15 m			BK 14	BK 1014
	22 mm x 10 m			BK 15	BK 1015
	22 mm x 10 m			BK 16	BK 1016
		150 x		BK 17	
		150 x		BK 18	
	52 mm x 20 mm	200 x		BK 61	
	52 mm x 20 mm	200 x		BK 62	
	52 mm x 20 mm	200 x		BK 63	
	103 mm x 20 mm	200 x		BK 80	
		150 x		BK 81	

 = recharge écologique

 = recommandé pour l'utilisation en cabinet

 = recommandé pour l'utilisation en laboratoire

Papiers d'occlusion Bausch Arti-Check® ultramines 40 µm



Papiers d'occlusion Bausch Arti-Check® ultramines 40 µm

Les papiers d'occlusion 40 µm Bausch sont des papiers très fins enduits de couleurs liquides sur les deux faces. Compte tenu de la faible épaisseur du matériau, ces papiers ont un comportement de marquage extrêmement précis. Cela réduit considérablement les contacts erronés ou les marques de bavure.

L'enduit spécial réalisé avec des couleurs liquides permet un marquage net de l'ensemble des contacts occlusaux ou interférences, y compris sur les matériaux difficiles à

contrôler, comme les céramiques, les alliages de métal, les matières synthétiques et les surfaces occlusales humectées de salive.

L'enduit coloré spécial avec des couleurs liquides se compose de nombreuses petites microcapsules remplies de couleur. Dès la moindre pression masticatoire légère, ces capsules éclatent et délivrent leur couleur de façon très manifeste. Il est également possible de réaliser des marquages multiples, car l'enduit coloré présente un volume de stockage de couleur élevé.

Les feuilles Arti-Check® ultramines, BK 63, BK 80 et BK 81 bicolores Bausch conviennent très bien pour la visualisation des occlusions statique et dynamique.

Arcs | 

par ex. pour gouttières d'occlusion, prothèse totale, contrôle de toute l'arcade dentaire dans l'articulateur

Forme de fer à cheval |  | 

par ex. pour gouttières d'occlusion, prothèse totale, contrôle de toute l'arcade dentaire dans l'articulateur et sur le patient

Bandes |  | 

par ex. pour obturations, couronnes et bridges

Rouleaux |  | 

retrait propre et économique de distributeurs de rouleaux, par ex. pour obturations, couronnes et bridges (odontologie restauratrice et fonctionnelle)



Feuilles de contrôle d'occlusion Bausch

Dans les années 1970, la gnathologie est devenue un élément central de la médecine dentaire. Pour répondre aux besoins des spécialistes dans le domaine du diagnostic fonctionnel, nous avons élargi notre gamme aux feuilles d'articulation minces en 1979.

En 1983, nous présentons Arti-Fol® 8 µm en quatre couleurs distinctes. Ces feuilles sont disponibles avec un enduit coloré simple face ou double face.

En 1999, notre gamme de feuilles est complétée par Arti-Fol® metallic 12 µm.

En 2020, le produit Arti-Fol® metallic Complete BK 328 est intégré à la gamme de produits.

Arti-Fol® metallic 12 µm noir/rouge



				REF
		22 mm x 20 m		BK 28
		22 mm x 20 m		BK 1028 
		20 x		BK 328

 = recharge écologique

 = recommandé pour l'utilisation en cabinet

 = recommandé pour l'utilisation en laboratoire

Arti-Fol® metallic 12 µm noir/rouge



Arti-Fol® metallic 12 µm noir/rouge

Arti-Fol® metallic noir/rouge est une feuille d'articulation composée d'une feuille en polyester métallisée (feuille Shimstock) ayant une épaisseur de 12 µm et d'un enduit coloré double face.

Cette feuille se distingue par sa souplesse, sa résistance à la déchirure et sa faible charge statique. La faible épaisseur du matériau permet un rapprochement élevé des antagonistes.

Rouleaux

retrait propre et économique de distributeurs de rouleaux, par ex. pour obturations, couronnes et bridges (odontologie restauratrice et fonctionnelle)

Arti-Fol® metallic Complete 12 µm

Arti-Fol® metallic Complete BK 328 associe la feuille Arti-Fol® Metallic noir / rouge éprouvée à un nouveau support hygiénique en carton.

Grâce à sa forme spéciale, Arti-Fol® metallic Complete peut être utilisée individuellement sur le côté gauche ou droit ou ensemble pour la totalité de l'arcade dentaire.

Bandes avec support carton laminé

Utilisation hygiénique sans instrument de support, par ex. pour obturations, couronnes et bridges (odontologie restauratrice et fonctionnelle)

Feuille Bausch Arti-Fol® metallic Shimstock 12 µm



				REF	
		22 mm x 20 m		BK 30	
		22 mm x 20 m		BK 31	
		22 mm x 20 m		BK 32	
		22 mm x 20 m		BK 33	
		8 mm x 50 mm 100 x		BK 35	
		8 mm x 50 mm 100 x		BK 38	
		16 mm x 20 m		BK 39	
		75 mm x 20 m		BK 730	
		75 mm x 20 m		BK 731	



= recommandé pour l'utilisation en cabinet



= recommandé pour l'utilisation en laboratoire

Feuille Bausch Arti-Fol® metallic Shimstock 12 µm



Feuille Bausch Arti-Fol® metallic Shimstock 12 µm

Arti-Fol® metallic est une feuille de contrôle de l'occlusion composée d'une feuille en polyester métallisée (feuille Shimstock) ayant une épaisseur de 12 µm et d'un enduit coloré simple face ou double face.

Cette feuille se distingue par sa souplesse, sa résistance à la déchirure et sa faible charge statique. La faible épaisseur du matériau permet un rapprochement élevé des antagonistes.

La feuille fait apparaître les contacts occlusaux précisément sur tous les matériaux. Cela réduit considérablement les marques de bavure et les contacts erronés.

Le verso métallisé de la feuille permet aussi d'éviter de confondre le côté sans enduit et celui, coloré, enduit. En outre, la métallisation confère à la feuille des propriétés antistatiques.

Les bandes prédécoupées de 8 mm de largeur de la version Arti-Fol® metallic BK 35 du produit peuvent être utilisées conjointement à la pince Arti-Fol® BK 145, notamment pour le contrôle des contacts proximaux lors de la mise en place de bridges ou de couronnes.

En complément de l'Arti-Fol® metallic, nous proposons la feuille Shimstock classique, y compris sans enduit coloré, en 8 mm et 16 mm de largeur. Vous pouvez télécharger un protocole Shimstock prédéfini sur notre site Internet www.bauschdental.com/downloads.

Rouleaux 22 mm de largeur |  | 

Retrait propre et économique de distributeurs de rouleaux, par ex. pour obturations, couronnes et bridges (odontologie restauratrice et fonctionnelle)

Rouleaux 75 mm de largeur | 

par ex. pour gouttières d'occlusion, prothèse totale, contrôle de toute l'arcade dentaire dans l'articulateur

Feuille d'articulation Arti-Fol® 8 µm



				REF	
 	22 mm x 20 m			BK 20	BK 1020
	22 mm x 20 m			BK 21	BK 1021
	22 mm x 20 m			BK 22	BK 1022
	22 mm x 20 m			BK 23	BK 1023
	22 mm x 20 m			BK 24	BK 1024
	22 mm x 20 m			BK 25	BK 1025
	22 mm x 20 m			BK 26	BK 1026
	22 mm x 20 m			BK 27	BK 1027
	75 mm x 20 m			BK 70	
	75 mm x 20 m			BK 71	
	75 mm x 20 m			BK 72	
	75 mm x 20 m			BK 73	
	75 mm x 15 m			BK 74	
	75 mm x 15 m			BK 75	
	75 mm x 15 m			BK 76	
	75 mm x 15 m			BK 77	
	75 mm	1 x		BK 137	
	22 mm	1 x		BK 139	

 = recharge écologique

 = recommandé pour l'utilisation en cabinet

 = recommandé pour l'utilisation en laboratoire

Feuille d'articulation Arti-Fol® 8 µm



Feuille d'articulation Arti-Fol® 8 µm

Arti-Fol® 8 µm est une feuille d'articulation très mince composée d'une feuille de polyester ayant une épaisseur de 8 µm et d'un enduit coloré simple face ou double face.

L'enduit coloré mince est constitué de cire et de pigments, enrichis de composants hydrophiles, pour améliorer le report de couleur sur différents matériaux.

Cette feuille se caractérise par la faible épaisseur de son matériau et permet de visualiser les contacts occlusaux de manière exacte, avec des contours précis.

Les feuilles d'articulation Arti-Fol® Bausch conviennent particulièrement bien à la visualisation des occlusions statique et dynamique en plusieurs couleurs. Pour cela, quatre couleurs distinctes permettent de visualiser les occlusions statiques et les différents mouvements fonctionnels (protrusion, latérottrusion, médiottrusion).

Les différentes couleurs peuvent également être utilisées pour les procédés de cirage diagnostique en laboratoire.

Rouleaux 22 mm de largeur

Retrait propre et économique de distributeurs de rouleaux, par ex. pour gouttières, couronnes et bridges (odontologie restauratrice et fonctionnelle)

Feuille d'articulation Arti-Fol® 8 µm en 75 mm de largeur

Les feuilles de contrôle d'occlusion sont disponibles en quatre couleurs et en 75 mm de largeur. Les feuilles larges sont principalement utilisées en laboratoire.

Pour faciliter la manipulation dans l'articulateur, nous proposons notre dévidoir Y BK 140 Bausch spécial (page 59).

Rouleau de 75 mm de largeur

par ex. pour gouttières d'occlusion, prothèse totale, contrôle de toute l'arcade dentaire dans l'articulateur



Liquides et sprays


Depuis les années 1980, nous proposons des outils pour ajuster les restaurations prothétiques :

- Arti-Spot® comme colorant de contact, d'application facile
- Arti-Spray® pour les domaines d'application identiques en vaporisateur

En 2016, Bio-Ink-Flow est intégré pour marquer les points de pression.

Le vernis de contrôle Arti-Brux®, conçu pour des examens plus longs, est ajouté à la même période.

Indicateur Bausch Arti-Spot® High-Spot

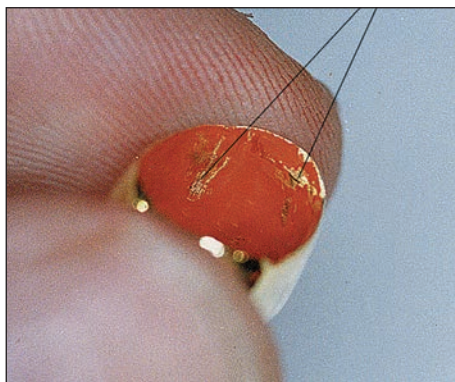

				REF	
	Arti-Spot® 1	15 ml		BK	85
	Arti-Spot® 2	15 ml		BK	86
	Arti-Spot® 3	15 ml		BK	87



= recommandé pour l'utilisation en cabinet



= recommandé pour l'utilisation en laboratoire

Indicateur Bausch Arti-Spot® High-Spot



Indicateur Bausch Arti-Spot® High-Spot

Arti-Spot® est une couleur pour contact liquide, destinée au contrôle de l'adéquation parfaite de couronnes, inlays, onlays, couronnes télescopiques, crochets et surfaces de friction d'attachements.

Arti-Spot® s'applique au pinceau sur la surface à contrôler et laisse un film d'environ 3µ au bout de quelques secondes d'évaporation du solvant. Chaque contact détruit la pellicule de couleur exactement à l'endroit du contact. La surface de contact est ensuite clairement visible sur ce site.


Pour une représentation contrastée sur différents matériaux, nous proposons trois couleurs distinctes.

Après emploi, Arti-Spot® s'élimine facilement : l'eau chaude, avec abrasion mécanique (brosse à dents ou brosse interdentaire). L'alcool, l'alcool isopropylique ou un jet de vapeur détachent même les derniers résidus de couleur. Une fine brosse permet aussi d'éliminer Arti-Spot® des modèles en plâtre isolés.

Flacon avec pinceau |  | 

Application précise sur la surface à contrôler (pas d'application intraorale directe) par ex. pour couronnes, inlays, onlays, couronnes télescopiques, crochets et surfaces de friction.

Spray pour occlusion – Bausch Arti-Spray®

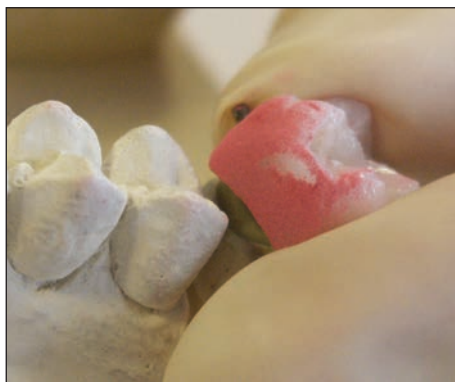

				REF
	Arti-Spray®	75 ml		BK 285
	Arti-Spray®	75 ml		BK 286
	Arti-Spray®	75 ml		BK 287
	Arti-Spray®	75 ml		BK 288



= recommandé pour l'utilisation en cabinet



= recommandé pour l'utilisation en laboratoire

Spray pour occlusion – Bausch Arti-Spray®



Spray pour occlusion – Bausch Arti-Spray®

Arti-Spray® est un spray de marquage homogène en quatre couleurs différentes, qui permet de contrôler les contacts d'occlusion et l'adéquation des couronnes, bridges, prothèses et prothèses partielles.

Arti-Spray® se dose précisément et forme une fine couche de couleur poudrée qui peut être retirée facilement à l'eau ou à l'aide d'un jet de vapeur, sans laisser de résidus. Arti-Spray® est vaporisé facilement à 3-5 cm de la surface occlusale ou de la face interne de la couronne ou du bridge.

Tous les points de contact sont facilement identifiables comme des points défectueux sur le film coloré. Il est éventuellement possible de marquer les points de contact à l'aide d'un crayon de couleur ou d'une feuille de contrôle Bausch Arti-Fol® pour un contrôle ultérieur.

Arti-Spray® peut également être utilisé pour les contacts proximaux lors de l'ajustement de couronnes ou de bridges.


Aérosol

BK 285 | 

BK 286 | BK 287 | BK 288 |  |  | MD

Application rapide sur la surface à contrôler (pas d'application intraorale directe)
par ex. pour couronnes, inlays, onlays, couronnes télescopiques, crochets et surfaces de friction.

Marqueur de zones de pression – Bausch Bio-Ink®-Flow

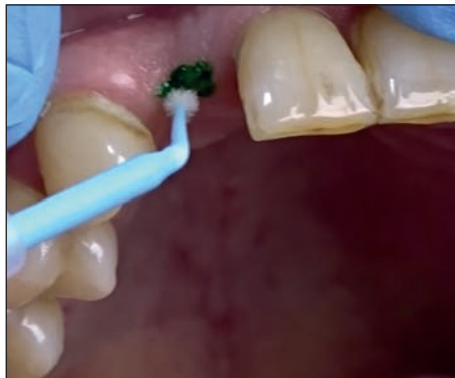

				REF
	Set	1 ml	●	BK 205
		1 ml	●	BK 206



= recommandé pour l'utilisation en cabinet

Marqueur de zones de pression – Bausch Bio-Ink®-Flow



Marqueur de zones de pression Bausch Bio-Ink®-Flow

Bio-Ink®-Flow est une pâte verte qui s'applique facilement, ayant une viscosité élevée pour visualiser les zones de pression sur la muqueuse et marquer la prothèse.

Bio-Ink®-Flow peut également servir à marquer la ligne AH, les bords des prothèses et les replis.

Bio-Ink®-Flow colore les points concernés sur la muqueuse préalablement séchée. Lors de la pose de la pro-

thèse séchée, le colorant appliqué sur le point de pression est transféré sur la partie inférieure de la prothèse, qui peut ensuite être meulée.

Seringue d'application avec canule |  |

Set BK 205 : comprend des applicateurs à usage unique, des porte-applicateurs Application précise sur la muqueuse

Seringue d'application avec canule |  |

BK 206 : Application précise sur la muqueuse

Vernis de contrôle de l'occlusion – Bausch Arti-Brux®



				REF	
	Applicator	0,15 ml		BK 88	
	Set	15 ml		BK 89	



= recommandé pour l'utilisation en cabinet

Vernis de contrôle de l'occlusion – Bausch Arti-BruX®



Vernis de contrôle de l'occlusion Bausch Arti-BruX®

Arti-BruX® est un vernis de contrôle de l'occlusion rouge qui permet de visualiser les modèles de mouvement sur les soins de restauration et les restaurations prothétiques au poli miroir, ainsi que sur les gouttières occlusales.

Le revêtement coloré fin et régulier, qui résiste à la salive, permet de visualiser l'occlusion dynamique du patient sur une plus longue durée (max. 24 heures).

Les habitudes parafunctionnelles (bruxisme) peuvent donc être visualisées sur les gouttières d'occlusion rigides ou les restaurations prothétiques. Les techniques d'occlusion, comme le guidage antérieur-canin sur gouttières, peut ainsi être contrôlé de manière ciblée.

Flacons avec pinceaux à usage unique BK 89 |  | Application précise sur les soins de restauration et les restaurations prothétiques, ainsi que sur les gouttières d'occlusion

Applicateur à usage unique BK 88 |  | Application précise sur les soins de restauration et les restaurations prothétiques, ainsi que sur les gouttières d'occlusion



Arti-Pink cire d'occlusion

En 2024, nous avons ajouté Arti-Pink Bite Wax dans notre gamme de produits.

Les cires pour l'enregistrement d'occlusion peuvent être retracées jusqu'au 19^e siècle, lorsque la médecine dentaire est devenue plus systématique et scientifique. Ces cires ont été conçues pour déterminer la position exacte des dents et l'occlusion du patient pour les travaux prothétiques tels que les couronnes, les bridges ou les prothèses.

Malgré les nouveaux matériaux et les développements techniques tels que les silicones, les autres matériaux d'empreinte et la numérisation, la cire pour l'enregistrement d'occlusion reste un matériau important et largement utilisé en dentisterie.

Les propriétés spécifiques de la cire peuvent être utilisées favorablement dans le cadre des traitements thérapeutique particulières.

Bausch Arti-Pink Bite Wax



				REF
	150 x 80 x 3 mm	12 x		BK 6003
	„L“ 79 x 68 x 3 mm	24 x		BK 6016
	„M“ 68 x 60 x 3 mm	24 x		BK 6017
	„S“ 64 x 56 x 3 mm	24 x		BK 6018

 = recommandé pour l'utilisation en cabinet
 = recommandé pour l'utilisation en laboratoire

Bausch Arti-Pink Bite Wax



Bausch Arti-Pink Bite Wax

Arti-Pink Bite Wax de Bausch sert à l'enregistrement précis de l'occlusion et permet la reproduction exacte des contours de l'OIM. Il se distingue par ses excellentes propriétés de modélisation.

D'une épaisseur de 3 mm, cette cire extra dure est disponible non seulement sous forme de plaque au format 150 mm x 80 mm, mais aussi préformée sous forme d'arcade dentaire en trois tailles S, M et L.

Pour utiliser Arti-Pink Bite Wax, réchauffez la cire extra dure dans de l'eau chaude jusqu'à ce qu'elle atteigne une température de fusion d'environ 55° C. Cela la rend malléable et prête à être utilisée pour un enregistrement précis de l'occlusion.

Plaques

Une cire d'enregistrement d'occlusion éprouvée, adaptée aux restaurations prothétiques, par ex. prothèses complètes, et en général à la détermination de la relation entre les mâchoires.

Forme d'arcade

Une cire d'enregistrement d'occlusion éprouvée dans des formes d'arcade préfabriquées. Convient pour les restaurations prothétiques, par ex. les prothèses complètes et, en général, pour la détermination de la relation entre les mâchoires.



Bausch
Fleximeter®-Strips
REF BK 252
15 Fleximeter®-Strips
2.0 mm - 50 mm

Dr. Jost Bausch GmbH & Co. KG
Industriestraße 10 • D-75071 Kitzingen
Bausch Articulating Papers Pty Ltd
Maribyrnong, VIC 3047 Australia
Bausch Articulating Papers (Australia) Pty Ltd
10/100, Ross St • Sydney NSW 2057 • Australia
Bausch Articulating Papers Japan K. K.
and others, 1-4-2, Jomai, Bunkyo-ku, Tokyo Japan 112-8505
Made in Germany
Medical Product - For professional use only | Readings in mm - Not for Exclusion

Bausch
Fleximeter®-Strips
REF BK 252
15 Fleximeter®-Strips
2.0 mm - 50 mm

Dr. Jost Bausch GmbH & Co. KG
Industriestraße 10 • D-75071 Kitzingen
Bausch Articulating Papers Pty Ltd
Maribyrnong, VIC 3047 Australia
Bausch Articulating Papers (Australia) Pty Ltd
10/100, Ross St • Sydney NSW 2057 • Australia
Bausch Articulating Papers Japan K. K.
and others, 1-4-2, Jomai, Bunkyo-ku, Tokyo Japan 112-8505
Made in Germany
Medical Product - For professional use only | Readings in mm - Not for Exclusion

Jauges d'épaisseur souples

Bausch Fleximeter® -Strips

Fleximeter® a été intégré dans notre gamme dès 1980 comme instrument en silicone unique. Le perfectionnement jusqu'au produit actuel, les Fleximeter®-Strips, s'est opérée en 2002.

Jauges d'épaisseur souples – Bausch Fleximeter®-Strips



				REF
	1,0 mm	15 x		BK 250
	1,5 mm	15 x		BK 251
	2,0 mm	15 x		BK 252
1,0 mm 1,5 mm 2,0 mm	3 x 5 = 15	  	BK	253
1,0 mm 1,5 mm 2,0 mm	3 x 1 = 3	  	BK	254



= recommandé pour l'utilisation en cabinet



= recommandé pour l'utilisation en laboratoire

Jauges d'épaisseur souples – Bausch Fleximeter®-Strips



Bausch Fleximeter®-Strips

Les Fleximeter®-Strips sont des jauges d'épaisseur souples en silicone stérilisable, disponibles en trois épaisseurs, servant à mesurer les hauteurs de préparation lors du meulage des dents pour les restaurations.

Les jauges d'épaisseur souples Fleximeter®-Strips ayant des épaisseurs de 1,0 mm, 1,5 mm et 2,0 mm peuvent être utilisées pour créer un enregistrement des occlusions dans le cadre de l'élévation contrôlée de l'occlusion, par ex. pour une dentition soumise à abrasion ou des gouttières d'occlusion.

Pour contrôler les hauteurs de préparation, le colorant Arti-Spot® ou Arti-Spray® peut être appliqué sur les Fleximeter®-Strips. Les hauteurs de préparation insuffisantes sont ainsi visibles sous forme de marquage coloré.

Jauges en silicone |  |  | Pour contrôler les hauteurs de préparation




Instruments et accessoires Bausch

Les fourchettes d'occlusion et les pinces bien conçues facilitent considérablement l'utilisation confortable de nos moyens de contrôle de l'occlusion.

Nous proposons des instruments de haute qualité, notamment des fourchettes d'occlusion, pour le contrôle d'occlusion bilatéral ou pour l'utilisation proximale.

Pinces pour papiers et Bausch Arti-Fol®

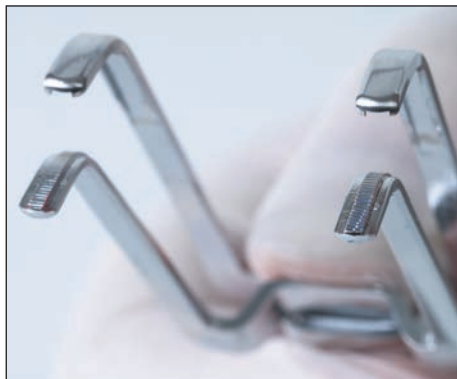

				REF
		1 x		BK 132
		1 x		BK 133
		1 x		BK 142
		1 x		BK 144
		1 x		BK 145



= recommandé pour l'utilisation en cabinet

Pinces pour papiers et Bausch Arti-Fol®



Pinces pour papiers et Bausch Arti-Fol®

Pinces Arti-Fol® BK 132 | |

Pour un maintien particulièrement fiable de nos papiers et feuilles d'articulation et d'occlusion, nous recommandons les pinces Arti-Fol® BK 132 autobloquantes à rainure longitudinale fraisée.

Pinces pour papier de type « Miller » BK 142 | |

Les pinces pour papier d'articulation de type « Miller » constituent un instrument de haute qualité permettant le maintien de différents types de papiers d'articulation.

Pinces Arti-Fol® « SteriSlide » BK 144 | |

Les pinces Arti-Fol® « SteriSlide » Bausch ont une rainure longitudinale fraisée pour un maintien optimal des feuilles. En outre, ces pinces disposent d'une glissière (aide à la stérilisation) permettant d'ouvrir les pinces, de manière à faciliter la stérilisation sans problème dans cette position.


Pinces Arti-Fol® pour contacts proximaux BK 145 | |

Les pinces Arti-Fol® du Dr Müller sont utilisées pour l'adaptation proximale rapide et ciblée des restaurations. Leur design novateur et pratique pour l'utilisateur permet un bien meilleur maniement que les méthodes de contrôle habituelles.

La force de serrage élevée des pinces permet de maintenir solidement la feuille d'articulation sur les deux côtés et assure un guidage précis, lorsque le dentiste corrige le contact. La feuille peut être tendue rapidement et facilement. L'instrument ne contient pas d'espaces vides et peut être désinfecté ou stérilisé sans difficultés par tous les procédés connus.

Nous proposons également l'Arti-Fol® métallique 12 µm en 8 mm de largeur adaptée aux pinces. Compte tenu de sa grande résistance à la déchirure, des marquages bien visibles et de la faible épaisseur du matériau, Arti-Fol® métallique est parfaitement adaptée au contrôle des contacts proximaux lors de la mise en place de bridges ou de couronnes.

Fourchettes d'occlusion Bausch | Accessoires

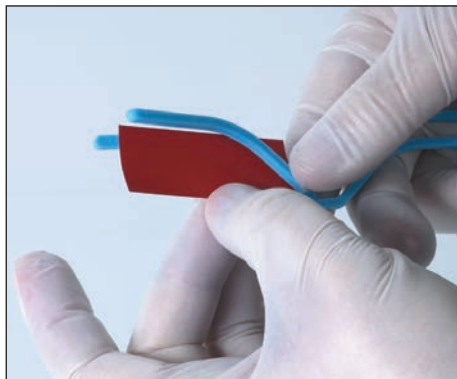

				REF
		1 x		BK 130
		1 x		BK 133
		1 x		BK 140
		5 x		BK 143
				REF
		1 x		BK 137
		1 x		BK 139




= recommandé pour l'utilisation en cabinet



= recommandé pour l'utilisation en laboratoire

Fourchettes d'occlusion Bausch | Accessoires

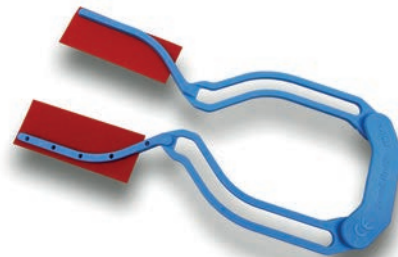

Fourchettes d'occlusion Bausch

Fourchette d'occlusion BK 130 (+ 2x BK 133) |  |

Notre fourchette d'occlusion flexible est une combinaison de deux pinces courbes BK 133 et d'une poignée en caoutchouc BK 130. Les pinces sont simplement enfoncées dans la poignée en caoutchouc et restent mobiles dans celle-ci.

Fix-Clip® Bite Frame BK 143 |  |

La fourchette d'occlusion Fix-Clip® est une alternative aux instruments métalliques qui servent à la fixation des papiers d'articulation minces et des feuilles de contrôle de l'occlusion. La poignée élastique peut être stérilisée.

Bausch Y-Halter BK 140 |  |

Support Y Bausch pour feuilles de 75 mm de largeur ou soies 80 mm de largeur. Ce support est conçu de manière à pouvoir être utilisé dans l'articulateur.

Accessoires

Pour nos soies et feuilles larges, nous proposons le **distributeur acrylique BK 137**.

Nous proposons un **distributeur** en matière synthétique pour papiers et feuilles de 22 mm de largeur sous la référence **BK 139**. Ce distributeur dispose de bords à découper métalliques intégrés.



Dr. Jean Bausch GmbH & Co. KG
Oskar-Schindler-Straße 4
D-50769 Köln - Germany
Tel: +49-221-70936-0
Fax: +49-221-70936-66
info@bauschdental.de
www.bauschdental.de

Bausch Articulating Papers, Inc.
12 Murphy Drive
Nashua, NH 03062, U.S.A.
Tel: +1-603-883-2155
Tel: 888-6-BAUSCH
Fax: +1-603-883-0606
info@bauschdental.com
www.bauschdental.com

Bausch Articulating Papers (Australasia) Pty. Ltd
ABN 73093760402
G.P.O. Box 3733, Sydney NSW 2001, Australia
Tel: +61-2-9345-1945
Fax: +61-2-9345-1955
info@bauschdental.com.au
www.bauschdental.com.au

www.bauschdental.com

Bausch Articulating Papers Japan K. K.
5F, 1-1-31, Nishimidorigaoka
Toyonakashi, Osaka 560-0005 - Japan
Tel: +81 6-6845-0020
Fax: +81 6-6845-0024
E-Mail: info@bauschdental.jp
Web: www.bauschdental.jp

Bausch Importação de Materiais Odontológicos Ltda.
Rua Paulo Eduardo Xavier de Toledo, 379 salas 8 e 9
13304-240 Itu-SP, Brasil
Tel: +55 11 3020-9263
vendas@bauschbrasil.com.br
www.bauschbrasil.com.br

Bausch Articulating Papers Co., Ltd.
#1004, The O Ville B/D, 344, Jong-Ro, Jongno-Gu
Seoul 03114, Korea
Tel: +82 2-2236-0158
Fax: +82 2-6499-9158
info@bauschdental.kr
www.bauschdental.kr

