



Bausch

WE MAKE OCCLUSION VISIBLE

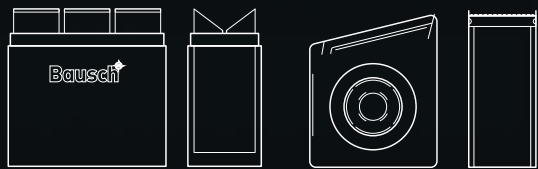

| 교합검사재료

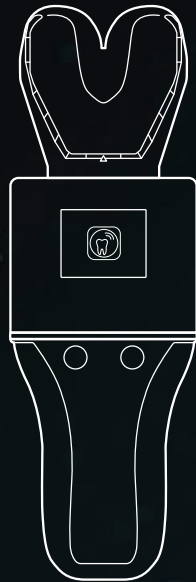





We make Occlusion visible.

Bausch의 설립자인 치과의사 장 바우쉬(Jean Bausch)와 한스 바우쉬(Hans Bausch)는 교합을 최대한 정확히 시각화하기 위해서는 압력 변화에 민감한 교합지가 필요하다는 것을 일찍이 깨달았습니다.

Dr. Jean Bausch GmbH & Co. KG는 1953년 설립된 이래로 점진적 색 이동이 잘되는 교합지를 제조하고 있습니다. BK 01은 색의 변화로 저작력의 변화를 나타내주는 최초의 교합지로 유명합니다. 점진적 색 이동의 원리는 교합이 높은 부위(high spot)를 정확히 감지하는 중요한 방법입니다.

세라믹, 아크릴릭 레진, 메탈등의 다양한 표면에서 정확히 색깔이 잘 이동되게 만드는 것이 Bausch의 최우선 목표입니다

따라서 Bausch는 두께, 모양, 색상이 다양한 교합검사재료를 개발하여 업계를 선도하는 제조사가 되었습니다.

2세대가족기업으로 Bausch는 앞으로도 혁신과 꾸준한 제품개발에 집중할 것입니다. Bausch는 독일 쾰른에서 열린 IDS 2019에서 디지털교합조절을 위한 새로운 OccluSense® 시스템을 제시하기도 했습니다.

한스 바우쉬의 아내인 이블린 바우쉬는 1961년부터 회사운영에 참여하기 시작했고 부부의 아들인 안드레 바우쉬, 피터 바우쉬는 1998년부터 Dr. Jean Bausch GmbH & Co. KG의 상무이사(Managing Director)를 맡아오고 있습니다.

Bausch의 모든 제품은 유럽의 의료기기 규정(European Medical Device Regulation)을 엄격히 준수하며 DIN EN ISO 13485에 따라 Bausch의 품질보증팀은 제품의 품질을 지속적으로 관리하고 있습니다.

본 책자는 전문사용자가 목적에 맞는 적절한 검사재료를 선택하는데 도움을 주기 위해 제작되었습니다.




- 1953 - 점진적 색이동 기능이 있는 교합지를 시작으로 쾰른에 회사설립
- 1962 - 쾰른 IDS 첫 참여
- 1972 - micro-thin 40 μ m 교합지 출시
- 1974 - 라인란트팔츠주로 생산시설 이전
- 말편자형 교합지 출시
- 1979 - IDS 뒤셀도르프: Arti-Fol® 시장출시
- Bausch Dental Co. of America를 대표사무소로 설립
- 1983 - IDS 뮌헨: 4가지색상 Arti-Fol® 8 μ m
- 1986 - IDS 쾰른: Arti-Spot® High Spot Indicator
- 1994 - 미국뉴햄프셔주 내슈아에 Bausch Articulating Papers, Inc. 설립
- 1999 - IDS 쾰른: Arti-Fol® metallic 12 μ m
- 2003 - 호주 시드니에 Bausch Articulating Papers (Australasia) Pty. Ltd 설립
- 2007 - 일본 오사카에 Bausch Articulating Papers Japan K.K. 설립
- 브라질 상파울루에 Bausch Importação de Materiais Odontológicos Ltda. 설립
- 2009 - 독일 라인란트팔츠주에 생산시설확장
- 2017 - IDS 쾰른: 색소코팅압력센서가 탑재된 OccluSense® 시스템발표
- 2019 - IDS 쾰른: OccluSense®의 시장출시
- 2020 - 쾰른에 생산건물 및 교육시설 확장
- 2021 - 한국 서울에 Bausch Articulating Papers Co. Ltd. 설립

목차

교합 - 영향 - 결과 정확한 고교합점 발견	6
Bausch 교합검사재료 두께에 대한 개괄	8
OccluSense® - 디지털교합조절	12
점진적 색이동 원리	16
2단계법을 활용한 교합확인	18
교합지/교합실크	20
교합지 : 점진적 색 이동이 적용된 200 µm 교합지	22
PROGRESS 100 : 100 µm 교합지	24
Bausch Arti-Ceram 교합지 200 µm 및 100 µm	26
교합실크 : 점진적 색 이동이 적용된 80 µm 교합실크	28
Arti-Check® : 아주 얇은 40 µm Bausch 교합지	30
Bausch 교합검사필름	32
Bausch Arti-Fol® metallic Shimstock Film 12 µm black/red	
Bausch Arti-Fol® metallic Complete 12 µm black/red	34
Bausch Arti-Fol® metallic Shimstock Film 12 µm	36
Arti-Fol® Articulating Film 8 µm	38
액상형 밀스프레이형	40
Bausch Arti-Spot® Highspot Indicator	42
Bausch Arti-Spray® Occlusion Spray	44
Bausch Bio-Ink®-Flow Sore Spot Indicator	46
Bausch Arti-Brux® Occlusal Indicator Paint	48
Bausch Arti-Pink 교합 인기용 왁스	50
Bausch Fleximeter®-Strips	54
Bausch 기구및부품	58
Bausch Paper & Arti-Fol® Forceps	60
Bausch Bite Frames 부품	62

교합 - 영향 - 결과

두개하악기능장애

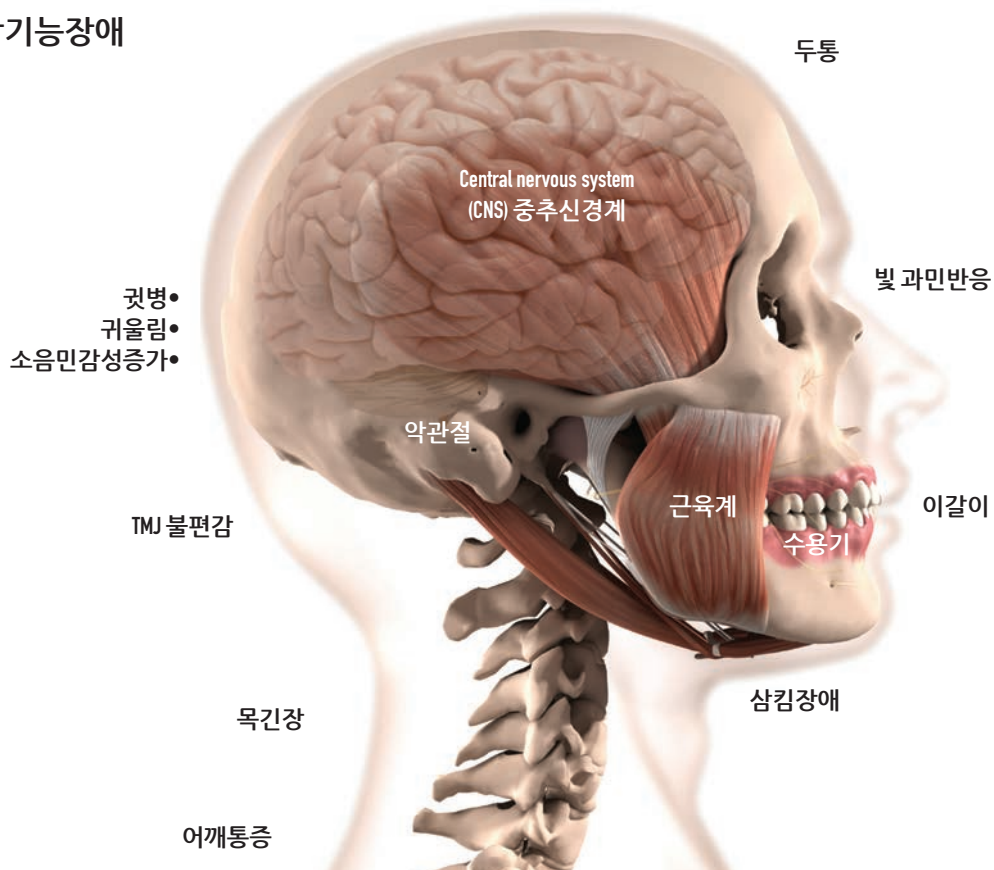

정확한 조기접촉(premature contact)

발견

교합은 상악 치아와 하악 치아 서로의 접촉을 뜻합니다.

교합은 구강하악계를 형성하며, 구강하악계는 TMJ, 저작근, 감각신경, 압력 수용체, 중추신경계의 해부학적 집합체입니다.

수복, 발치, 보철, 교정치료는 정적 및 동적 교합에 변화를 가져오며, 이로 인해 전반적인 해부학적 구조에 영향을 미칠 수 있습니다.

이에 관하여, Bausch는 전문가 사용자들을 위한 교합검사제품을 개발하여, 환자의 개별적인 생리적 교합을 복원하는데 일조하는 것이 목표입니다.

정적교합 상태의 조절(최대교두감합위(maximum intercuspation)에서 하악의 움직임이 없는 치아접촉)뿐 아니라 동적움직임 상태의 조절도 중요합니다.

동적움직임, 즉, 하악의 움직임으로 인한 치아접촉은 전방유도(anterior guidance), 견치유도(canine guidance), 집단유도(group guidance)로 구분됩니다.

전체 치열궁에서 여러 움직임 패턴을 확인할 수 있도록 다양한 색상의 8 µm, 12 µm, 16 µm 필름을 제작하고 있습니다. 예를들어

정적패턴(static)은검정색,
측방운동(laterotrusion)은 빨강색,
내측방운동(mediotrusion)은 녹색,
전방운동(protrusion)은 파란색을 사용해

확인할 수 있습니다.

습관성교합의 변화, 즉, 습관적으로 사용하는 정적교합의 변화는 신경근탄력변화로 이어질 수 있으며, 이는 적응적억제자세(adapted restrained posture)를 유발하여 턱관절장애(craniomandibular dysfunction disorder, CMD)로 이어질 수 있습니다.

이러한 여러 요인의 상호작용을 도표에서 명확히 확인할 수 있습니다.

이미 학계에서 다양한 교합개념을 정의한 바 있으며 이는 교합재건의 기준으로 활용할 수 있습니다. 그러나 유일한 단 하나의 교합은 없기 때문에 다양한 교합개념은 단지 모델로 이해해야 합니다. 무엇보다 실제치료에서는 환자에 따라 다른 생체역학적 조건을 고려하여 개개인에 맞춘 교합에 초점을 맞춰야합니다.

다양한 두께의 여러 교합지와 필름을 목적에 맞게 합리적으로 활용하여 시각적으로 발견할 수 없는 중요한 간섭접촉을 놓치지 않을 수 있습니다.

Bausch Articulating Papers 100 µm 및 200 µm는 점진적 색 이동 기능이 있어 정적 접촉점의 위치를 표시하는데 사용되며, 색 표시에 재료를 가리지 않고 타액도 흡수하는 장점이 있습니다. 진료실뿐만 아니라 기공소에서 사용할 수 있습니다.

또다른 교합지로는 40 µm 두께의 Arti-Check® Articulating Paper도 있습니다. 이 교합지는 양면에 액체색소가 도색되어 있으며, 재료의 두께가 얇아 표시가 정밀하고 번짐접촉(smear contact)이 적습니다.

교합에 큰 영향을 미치는 근육의 양상도 포함하기 위해 디지털 교합조절을 위한 OccluSense® 시스템을 개발하였습니다. 치과에서는 이 시스템을 활용해 시간에 따른 치열궁 전반의 저작력분포를 확인할 수 있습니다.

간섭접촉으로 인한 악관절장애를 예방하려면 적절한 장비로 교합을 최종확인해야 합니다.

	200 μm	파랑	침윤형	양면	200 μm 교합지
	200 μm	빨강	침윤형	양면	200 μm 교합지
	100 μm	파랑	침윤형	양면	100 μm 교합지
	100 μm	빨강	침윤형	양면	100 μm 교합지
	200 μm	초록	침윤형	양면	200 μm 교합지
	100 μm	초록	침윤형	양면	100 μm 교합지
	80 μm	파랑	침윤형	양면	80 μm 교합 실크
	80 μm	빨강	침윤형	양면	80 μm 교합 실크
	80 μm	초록	침윤형	양면	80 μm 교합 실크
	40 μm	파랑/파랑	코팅형	양면	20 μm 교합지 + 10 μm + 10 μm 코팅
	40 μm	빨강/빨강	코팅형	양면	20 μm 교합지 + 10 μm + 10 μm 코팅
	40 μm	파랑/빨강	코팅형	양면	20 μm 교합지 + 10 μm + 10 μm 코팅
	12 μm	검정/빨강	코팅	양면	12 μm 필름 + 6 μm + 6 μm 코팅
	12 μm	검정	코팅	단면	12 μm 필름 + 6 μm 코팅
	12 μm	빨강	코팅	단면	12 μm 필름 + 6 μm 코팅
	12 μm	초록	코팅	단면	12 μm 필름 + 6 μm 코팅
	12 μm	파랑	코팅	단면	12 μm 필름 + 6 μm 코팅
	12 μm	비코팅	비코팅	-	12 μm 필름 + 6 μm 코팅
	8 μm	검정	코팅	단면	8 μm 필름 + 6 μm 코팅
	8 μm	빨강	코팅	단면	8 μm 필름 + 6 μm 코팅
	8 μm	초록	코팅	단면	8 μm 필름 + 6 μm 코팅
	8 μm	파랑	코팅	단면	8 μm 필름 + 6 μm 코팅
	8 μm	검정	코팅	양면	8 μm 필름 + 6 μm + 6 μm 코팅
	8 μm	빨강	코팅	양면	8 μm 필름 + 6 μm + 6 μm 코팅
	8 μm	초록	코팅	양면	8 μm 필름 + 6 μm + 6 μm 코팅
	8 μm	파랑	코팅	양면	8 μm 필름 + 6 μm + 6 μm 코팅

Bausch 교합검사재료

1953년 이후 교합검사 재료를 전문적으로 제조해 온 Bausch는 현재 치과학계에서 필수적인 존재로 자리잡았습니다.

제품의 범위를 지속 확장하여 전문사용자의 필요를 충족하고 새로운 치료방법과 치료재료를 개발하고 있습니다.

1970년대초, 기존에 입증된 교합지, 교합실크 뿐만 아니라 두께가 40 µm밖에 되지 않는 얇은 교합지를 제공하기 시작했습니다.

오늘날 기능진단분야를 대표하는 gnathology라는 새로운 치의학분야가 탄생한 것도 바로 1970년대입니다. gnathology에는 얇은 검사재료가 필요했기 때문에 Bausch는 이후 잘 잊어지지 않으며 얇고 정확한 필름을 다양한 색상과 두께로 제공해왔습니다.

이에 더해 액체접촉색소(liquid contact color), 교합스프레이, 기타 지시약도 제공하고 있습니다.

2019년 국제치과기자재전시회(International Dental Show, IDS)에서는 전통적인 교합검사재료에 새로운 디지털 선택안을 제시하는 OccluSense® 시스템을 소개하기도 했습니다.



Articulating Papers 200 µm



- 점진적 색이동
- 습기가 많은 교합면에서도 표시가 잘됨
- 세라믹에서 시각적 표시
- 압력을 기반으로 한 색이동
- 정적교합 확인용
- 광범위하고 선명한 시각적 표시
- 부드러운 마이크로플리스 재료
- 교합면에 원활히 적용 가능
- 초기접촉의 초기조절용
- 모든 재료에 적합



Articulating Papers 100 µm



- 점진적 색이동
- 습기가 많은 교합면에서도 표시가 잘 됨
- 세라믹에서 시각적 표시 가능
- 압력을 기반으로 한 색이동
- 정적, 동적교합 확인용
- 매우 정확하고 선명한 시각적 표시
- 매우 부드럽고 잘 찢어지지 않는 마이크로플리스 재질
- 교합면에 원활히 적용 가능
- 초기 접촉의 초기 조절용
- 모든 재료에 적합



Arti-Ceram 200 µm | 100 µm



- 점진적 색 이동
- 습한 교합면에서도 표시가 잘됨
- CAD/CAM 세라믹 재료에 시각적 표시
- 압력을 기반으로 한 색이동
- 정적 교합 확인용 (200 µm)
- 정적 및 동적 교합 확인용 (100 µm)
- 광범위하고 선명한 시각적 표시
- 부드러운 마이크로플리스 소재 - 교합면 원활히 적용 가능 (200 µm)
- 매우 부드럽고 찢어지지 않는 마이크로플리스 소재 (100 µm)
- 초기 접촉의 초기조절용
- 모든 재료에 적합



Articulating Silks 80 µm



- 점진적 색이동
- 습기가 많은 교합면에서도 표시가 잘됨
- 세라믹에서 시각적 표시
- 압력을 기반으로 한 색이동
- 정적, 동적교합 확인용
- 매우 정확하고 선명한 시각적 표시
- 매우 부드럽고 잘 찢어지지 않는 실크소재
- 교합면에 원활히 적용가능
- 초기접촉의 초기조절용
- 모든 재료에 적합
- Gerber 테크닉용으로 권장



Articulating Papers 40 µm



- 습기가 많은 교합면에서도 표시가 잘됨
- 세라믹에서 시각적 표시
- 압력, 충격을 기반으로 한 색이동
- 정적, 동적교합 확인용
- 매우 정확하고 선명한 시각적 표시
- 매우 얇은 종이
- 모든 재료에 적합
- 교합접촉을 정확히 표시



Arti-Fol® metallic 12 µm



- 매우 얇은 메탈필름
- 모든 접촉점을 정확히 표시
- 번짐접촉 방지
- 충격을 기반으로 한 색이동
- 정전기 방지
- 매우 정확한 접촉
- 교합면에 원활히 적용가능
- 모든 재료에 적합
- 잡아 당겨도 찢어지지 않음
- 건조한 세라믹 재료에 표시가 잘 됨
- 코팅되지 않은 버전도 있음 (Shimstock 필름)
- 75 mm 너비 롤도 존재



Arti-Fol® 8 µm




- 매우 얇은 필름
- 모든 접촉점을 정확히 표시
- 번짐접촉 방지
- 충격을 기반으로 한 색이동
- 매우 정확한 접촉
- 교합면에 원활히 적용 가능
- 모든 재료에 적합
- 잡아 당겨도 찢어지지 않음
- 75 mm 너비 롤도 존재
- 단면 또는 양면에 코팅이 되어 있음



OccluSense® 60 µm

- 저작력을 치아에서 시각적으로 확인할 수 있으며 바형 도표형식으로 디지털로도 확인가능
- 수직 또는 수평의 상하악 교합관계를 여러 바 색상으로 시각화
- 정적 및 동적 교합에서의 교합평가 개선
- 임플란트 지지 재건과 보철물에서의 Axial force를 시각화
- 초기접촉 발견
- 환자와의 소통 및 정보전달 개선
- 전자압력 센서: 얇고 유연하며 색소 코팅된 60 µm
- 저작력 분포를 퍼센트로 표시
- OccluSense® 아이패드 앱을 통해 문서관리

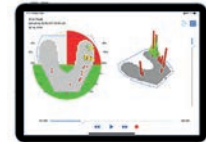



CELLERANT
BEST OF CLASS
TECHNOLOGY AWARD
2019



Bausch OccluSense® - 디지털교합조절

교합점을 정확하게 시각화하려는 노력은 OccluSense®를 개발하면서 집중했던 부분 중 하나입니다. 색소코딩된 OccluSense® 센서로는 기존에 입증된 교합지나 포일처럼 분명하고 선택적인 표시가 가능합니다.

OccluSense®는 통계와 역학측면에서 최종교합점을 나타낼 뿐만 아니라 교합이 완료될 때까지 임시적인 진행상황을 기록합니다.


OccluSense®가 기록한 교합압은 기존교합검사재료를 사용해 측정한 교합압과 다르며 더 많은 정보를 효율적으로 제공합니다. 이때 제공하는 정보로는 최대교두감합위와의 최초접촉에서 하악의 움직임 등이 있습니다. 치과에서는 Bausch의 OccluSense®를 바탕으로 여러 교합형태를 기록하고 단계에 따라 평가할 수 있습니다.

Bausch의 OccluSense® 시스템은 미국 캘리포니아 샌프란시스코에서 열린 2019 ADA/FDI 회의(2019 ADA/FDI Congress)의 셀러런트 최고기술상(Cellerant Best of Class Technology Award)을 수상했습니다.

또 유기 및 인쇄전자협회(Organic and Printed Electronics Association, OE-A)에서 주최한 2021년 OE-A 대회(2021 OE-A Competition)에서는 '신제품(New Products)' 카테고리에서 우승을 차지하였습니다.

OccluSense® 시스템에 대한 더 많은 정보는 아래 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다.

www.occlusense.com

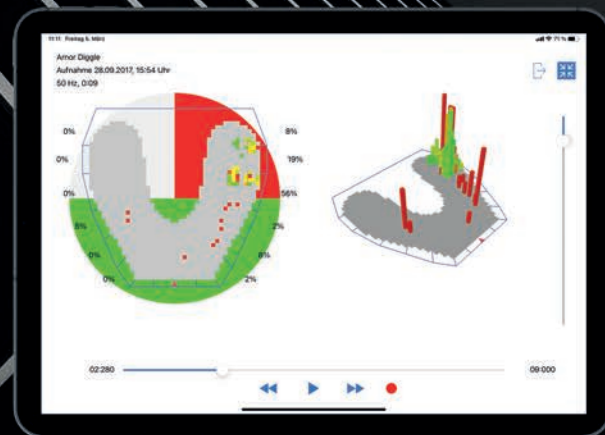



홀리스틱치료 접근법에서의 디지털 교합조절

Bausch의 Occlusense®는 수상 내역이 있는 새로운 사용자 친화적 제품으로, 교합면의 저작압분포의 기존기록방식과 디지털 기록방식을 결합한 시스템입니다.

Occlusense® 기기는 빨간색 코팅이 되어 있는 60 µm의 얇은 단회용 압력센서가 장착되어 있어 기존의 교합검사 필름과 같은 방식으로 이용할 수 있으며 다음의 특징이 있습니다.

- 전체 치열궁의 교합 확인 가능
- 시간별 저작압 분포 확인 가능
- 저작압 분포를 퍼센트로 확인 가능
- 측방운동과 간섭가능성이 있는 내측방 (mediotrusion side) 부분 확인 가능

- 교합 상태를 아날로그와 디지털 방식으로 확인 가능
- 전후비교를 통해 치료단계를 시각적으로 기록
- 스프린트 치료(splint therapy), 보철임플란트 치료, 대규모 재건치료, 정골 요법(osteopathy), 물리 치료 등에 사용 가능

Occlusense® 시스템:

Occlusense® 핸드헬드

배터리로 작동하는 핸드헬드 기기로 압력센서를 삽입하면 데이터를 읽어냅니다.

Occlusense® 충전기

무선충전이 가능한 유도 충전기

Occlusense® 전자압력센서


- 60 µm 두께
- 유연함
- 빨간색 코팅
- 256단계로 교합압 상태 기록
- 정적, 동적 교합 확인용

Occlusense® CenterFix 센터링 장치 BK 5040

Occlusense® 시스템에 대한 자세한 설명은 www.occlusense.com에서 확인하실 수 있습니다.


				REF
		Set		BK 5000
	L	25 x	==	BK 5025
	XL	25 x	==	BK 5035
		10 x	●	BK 5040

점진적 색이동 원리

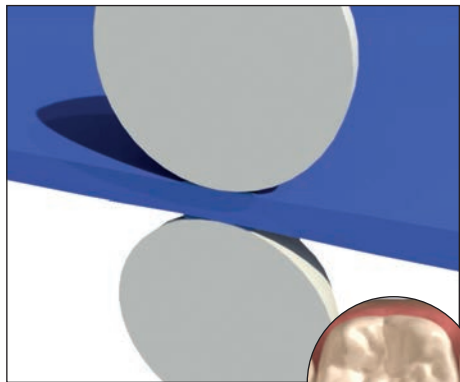


약한 압력

점진적 색이동 원리로 생리적 교합접촉을 발견할 수 있습니다.
이로 생긴 표시는 접촉점을 간섭하지 않습니다

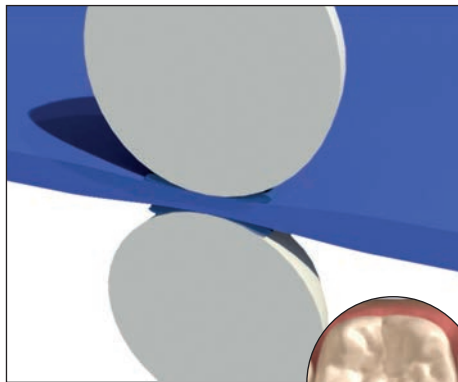

강한 압력

저작압이 강할수록 재료에서 색상이 더욱 진하게 나타나며 가까운 접촉점은 어두운 색상으로 표시됩니다. 그 결과, 색소가 압출되어 접촉점 주변으로 원을 형성합니다. Bausch의 점진적 검사제품들에서 일반적으로 확인할 수 있는 표시입니다.

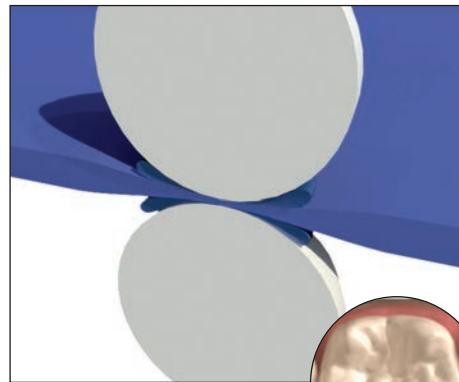

최대압력

최대교두감합위나 간섭접촉의 경우 이러한 결과가 더욱 뚜렷하게 나타납니다. 표시된 중앙의 실제 접촉점에는 뚜렷한 색이 나타나지 않는 반면 주변의 원 색상이 짙게 나타납니다.

점진적 색이동 원리



교합지 200 μm , "PROGRESS 100" 100 μm , 아티 세람 200 μm 및 100 μm , 그리고 교합 실크 80 μm 는 점진적 색이동의 특성을 가지고 있습니다.



점진적 색이동 기능이 있는 Bausch 교합지와 교합 실크는 정적교합을 나타내기에 적합합니다.

부드러운 마이크로폴리스 종이 혹은 실크의 스펀지 같은 구조는 색소를 저장하고, 압력이 가해지면 색소가 압출됩니다. 이러한 제품을 사용하면 치아의 접촉점 모두를 표시할 수 있습니다.

여기에서 점진적 색이동이란 저작력이 강할수록 더많은 색소가 압출되어 나오고 교합면으로 이동한다는 뜻입니다.

색소제제에 포함된 결합제인 Transculase®는 색소가 다양한 재료와 자연치아에 보다 잘 부착될 수 있도록 해줍니다.


압력 감지 교합지를 통해 저작압의 분포를 시각적으로 정확하게 확인할 수 있습니다.

따라서 Bausch의 점진적 검사재료는 타액으로 덮인 교합면에도 적합합니다.

교합접촉을 정확히 확인하기를 원한다면 여러 검사재료를 조합하여 사용하기를 권장합니다.



2-step방법을 활용한 교합확인

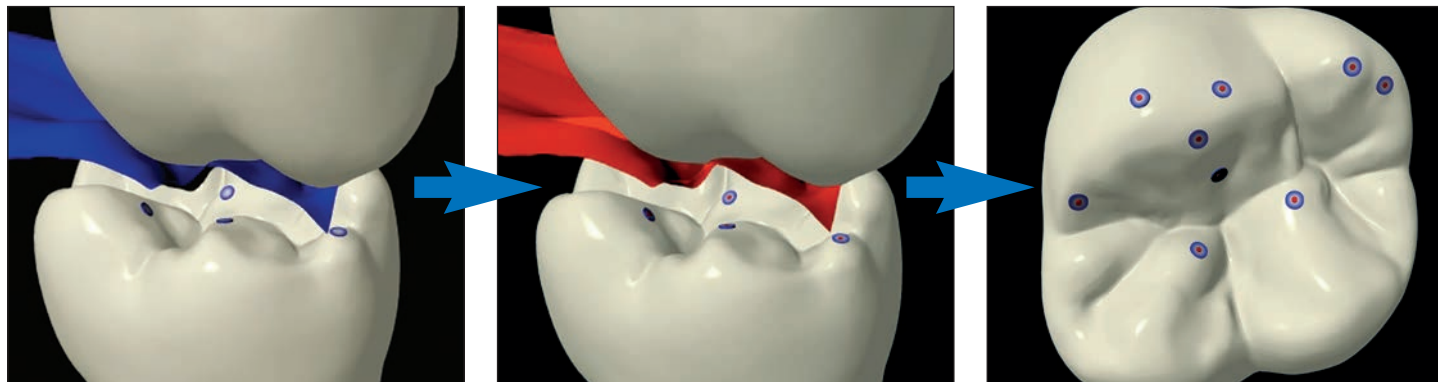

타액이 있는 표면의 접촉을 시각화하고자 한다면 점진적 검사재료와 얇은 포일을 함께 사용을 권장합니다.

용해 접촉점을 정확히 표시할 수 있습니다.

이 2-step방법의 장점은 다음과 같습니다.

첫번째 단계에서는 Articulating Papers 200 μ m나 "PROGRESS 100" 100 μ m를 사용해 교합을 확인합니다. 이들 교합지는 타액을 흡수하므로 2단계에서 Arti-Fol® metallic 12 μ m나 Arti-Fol® 8 μ m foil을 사

- 교합점과 교합면의 표시 구별
- 여러 색상을 사용해 구별이 용이
- 결합제인 Transculase®가 먼저 이동하여 타액에 노출된 표면에서 교합필름의 색이동을 개선



Bausch 교합지

Bausch 교합실크

점진적 색이동 기능이 있는 Bausch 교합지는 1953년 회사 설립의 기반이기도 합니다.

설립직후 80 μm 교합실크를 개발했으며 이 실크는 지금도 주로 기공소에서 교합조정에 사용되고 있습니다.

1972년 Bausch Occlusion Papers micro-thin 40 μm 가 Bausch 제품군에 추가되었습니다.

2000년에는 PROGRESS 100, 점진적 색이동 기능이 있는 Articulating Paper 100 μm 를 출시했습니다.

교합지 : 점진적 색 이동이 적용된 200 μ m 교합지



				REF
	52 mm x 18 mm	300 x		BK 01
	52 mm x 18 mm	300 x		BK 1001 
	52 mm x 18 mm	300 x		BK 02
	52 mm x 18 mm	300 x		BK 1002 
		50 x		BK 03
		50 x		BK 04
	52 mm x 18 mm	300 x		BK 05

 = 환경 친화적인 리필팩

 = 진료실에서의 사용권장

 = 기공소에서의 사용권장

교합지 : 점진적 색 이동이 적용된 200 μm 교합지



Bausch Articulating Papers with progressive color transfer 200 μm

Bausch Articulating Papers with progressive color transfer 200 μm 는 여러 색상을 활용해 저작압에 따른 다양한 교합압을 나타냅니다.

약한 압력 - 약한 표시

강한 압력 - 진한 표시

최대 압력 - 교합점 주변을 둘러싼 어두운 색상의 원

치과에서는 저작압 분포의 정확한 이미지를 확인할 수 있습니다. 조기접촉도 확인 가능합니다.

스트립 |  | 

예: 충전재, 크라운, 브릿지 (수복 및 기능 치과학)

말편자형 |  | 

예: 교합 스플린트, 전체틀니에 사용. 교합기와 구강내 전체 치열궁 확인

PROGRESS 100 : 100 μ m 교합지



				REF	
	52 mm x 18 mm	300 x		BK	51
	52 mm x 18 mm	300 x		BK	52
		50 x		BK	53
		50 x		BK	54
	52 mm x 20 mm	50 x		BK	57
	52 mm x 20 mm	50 x		BK	58

 = 진료실에서의 사용권장

 = 기공소에서의 사용권장

PROGRESS 100 : 100 μ m 교합지



Bausch PROGRESS 100

Articulating Paper with progressive color transfer 100 μ m

부드러운 섬유 강화 종이로 선명한 색상을 자랑하며 교합면에 정확히 적용됩니다.

점진적 색이동기능으로 교합점을 정확히 표시합니다.

얇은 종이와 Transculase® 본딩제의 특별한 조합으로, 금속합금이나 세라믹같이 매끄러운 표면

에서도 교합점과 교합면을 정확히 표시할 수 있습니다.

말편자형 |  | 

예: 교합 스플린트, 전체틀니에 사용, 교합기와 구강내 전체치열궁 확인

스트립 |  | 

예: 충전재, 크라운, 브릿지 (수복 및 기능 치과학)

Bausch Arti-Ceram 교합지 200 μ m 및 100 μ m



					
Arti-Ceram 200μm					
	52 mm x 20 mm	50 x		BK	92
		50 x		BK	93
Arti-Ceram 100μm					
	52 mm x 20 mm	50 x		BK	97
		50 x		BK	98

 = 진료실에서의 사용권장
 = 기공소에서의 사용권장

Bausch Arti-Ceram 교합지 200 μ m 및 100 μ m



Bausch Arti-Ceram 교합지 200 μ m 및 100 μ m

자연 치아 물질에 최적의 색상을 구현하기 위해 유리 세라믹, 지르코니아 세라믹 및 장식 세라믹과 같은 다양한 유형의 세라믹을 사용할 수 있습니다. 이러한 재료는 (임시) 크라운 뿐만 아니라 인레이 및 온레이에도 사용되며 뛰어난 심미성을 위해 고도로 연마할 수 있습니다. 그러나 기존의 교합 테스트 재료는 교합을 확인하는 데 효과적이지 않은 경우가 많

기 때문에 CAD/CAM 기술을 사용하여 제작되는 이러한 고광택 재료로 교합을 조정할 때 치과 의사에게는 어려움이 있습니다.

조기 접촉을 효과적으로 식별할 수 있도록 이 문제를 집중적으로 해결하고 수십 년 동안 치과 기술 분야에서 확립된 검증된 색상인 녹색을 사용하기로 결정했습니다. 이 색상은 특수 컬러 안료로 인해 미학적으로 고광택 세라믹 표면에서 선명하고 대비가 풍부하다는 결정적인 이점을 제공합니다. Arti-Ceram 교합지 200 μ m와 100 μ m의 두 가지 두께로 스트립과 말

굽 모양으로 제공되며, 교합을 정밀하게 조정하여 최상의 기능과 심미성을 보장합니다.

스트립 | 
예: 충전재, 크라운, 브릿지
(수복 및 기능 치과학)

말편자형 | 
예: 교합 스플린트, 전체틀니에 사용, 교합기와 구강내 전체 치열궁 확인

교합실크 : 점진적 색 이동이 적용된 80 μ m 교합실크



			REF
	80 mm x 3 m		BK 06
	80 mm x 3 m		BK 876
	80 mm x 3 m		BK 877
	16 mm x 10 m		BK 07
	16 mm x 10 m		BK 08

 = 진료실에서의 사용권장

 = 기공소에서의 사용권장

교합실크 : 점진적 색 이동이 적용된 80 μm 교합실크



Bausch Articulating Silk with progressive color transfer 80 μm

Bausch 교합실크는 고품질 직물 제품으로 Articulating paper with progressive color transfer 200 μm 와 성능이 유사합니다.

두께가 얇고 유연해 잘 찢어지지 않으며 교두(cusp)와 와(fossae)에도 완벽히 적용할 수 있습니다.

교합실크 표시는 매우 정확하며 색상도 명확합니다.

교합 실크는 수십년 동안 교합면 시험을 거쳐 치과학과 치기공학 분야 모두에서 입증된 제품입니다.



예: 교합 스플린트, 전체틀니에 사용. 교합기와 구강내 전체치열궁확인.

Arti-Check® : 아주 얇은 40 μm Bausch & Lomb



				REF	
	103 mm x 20 mm	200 x		BK 09	
	103 mm x 20 mm	200 x		BK 10	
	100 mm x 70 mm	100 x		BK 11	
	100 mm x 70 mm	100 x		BK 12	
	16 mm x 15 mm			BK 13	BK 1013
	16 mm x 15 mm			BK 14	BK 1014
	22 mm x 10 mm			BK 15	BK 1015
	22 mm x 10 mm			BK 16	BK 1016
		150 x		BK 17	
		150 x		BK 18	
	52 mm x 20 mm	200 x		BK 61	
	52 mm x 20 mm	200 x		BK 62	
	52 mm x 20 mm	200 x		BK 63	
	103 mm x 20 mm	200 x		BK 80	
		150 x		BK 81	

 = 환경 친화적인 리필팩

 = 진료실에서의 사용권장

 = 기공소에서의 사용권장

Arti-Check® : 아주 얇은 40 μm Bausch교합지



Bausch Articulating Papers Arti-Check® micro-thin 40 μm

Bausch Articulating Papers 40 μm는 매우 얇은 교합지로 양면에 액상 색소가 코팅되어 있습니다. 재료의 두께가 얇기 때문에 표시가 매우 정확합니다. 그 결과 표시 오류나 번짐이 확연히 줄어듭니다.

액상 색소로 코팅하여 세라믹, 금속합금, 아크릴릭, 타액에 노출된 교합면을 포함해 모든 접촉면을 명확히 표시할 수 있습니다.

코팅에는 색소로 채워진 마이크로 캡슐이 많이 존재합니다. 이러한 캡슐은 낮은 저작압에도 색소를 분출하기 때문에 명확하고 선명한 표시가 가능합니다. 코팅에 색소 저장량이 많기 때문에 여러번의 표시도 가능합니다.

Bausch Arti-Check® micro-thin BK 63, BK 80, BK 81 (two-colored)은 정적 및 동적 교합을 표시하기에 적합합니다.

시트 | 

예: 교합 스플린트, 전체틀니에 사용, 교합기의 전체치열궁

말편자형 | 

예: 교합스플린트, 전체틀니에 사용, 교합기와 구강내 전체치열궁확인

스트립 | 

예: 충전재, 크라운, 브릿지 (수복 및 기능치과학)

롤 | 

갈고르고 경제적인 분배를 위한 롤

예: 충전재, 크라운, 브릿지 (수복 및 기능 치과학)



Bausch 교합검사필름


1970년대 약학은 치과학의 중요한 부분이되었습니다.
Bausch는 기능진단분야 전문가의 필요를 충족하기 위해
1979년 얇은 교합필름을 출시했습니다.

1983년 Arti-Fol® 8 µm가 4가지 색상으로 출시되었습니다. 필름은 단면 또는 양면 코팅 형태로 제공됩니다.

1999년, Bausch는 필름 제품군을 확장하여 Arti-Fol® metallic 12 µm를 출시하였습니다.

2020년에는 Arti-Fol® metallic Complete BK 328을 출시하였습니다.

Bausch Arti-Fol® metallic Shimstock film 12 µm black/red

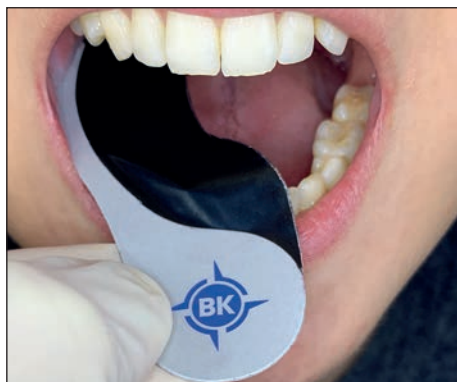

				REF
		22 mm x 20 m		BK 28
		22 mm x 20 m		BK 1028 
		20 x		BK 328

 = 환경 친화적인 리필팩

 = 진료실에서의 사용권장

 = 기공소에서의 사용권장

Bausch Arti-Fol® metallic Shimstock film 12 µm black/red



Arti-Fol® metallic 12 µm black/red

Arti-Fol® metallic 12 µm black/red는 교합검사필름으로 12 µm 두께의 금속화 폴리에스터필름(심스톡필름)과 양면색소코팅으로 이루어져 있습니다.

유연성, 찢김방지, 정전하 감소 등이 특징입니다. 두께가 얇아 맞물림을 매우 근접하게 확인할 수 있습니다.

롤 |  | 

갈끔하고 경계적인 분배를 위한 롤
예: 충전재, 크라운, 브릿지
(수복 및 기능치 과학)

Arti-Fol® metallic Complete 12 µm

Arti-Fol® metallic Complete BK 328은 기존에 입증된 Arti-Fol® metallic film black/red에 위생적인 판지홀더를 결합한 제품입니다.

Arti-Fol® metallic Complete는 독특한 모양으로 인해 구강 좌측과 우측에 각각 사용할 수 있을 뿐만 아니라 결합하여 전체 치열궁을 확인할 수도 있습니다.

판지홀더가 있는 스트립 | 

기구를 직접 만지지 않기 때문에 위생적으로 사용 가능

예: 충전재, 크라운, 브릿지
(수복 및 기능 치과학)

Bausch Arti-Fol® metallic Shimstock film 12 µm



				REF	
		22 mm x 20 m			BK 30
		22 mm x 20 m			BK 31
		22 mm x 20 m			BK 32
		22 mm x 20 m			BK 33
		8 mm x 50 mm	100 x		BK 35
		8 mm x 50 mm	100 x		BK 38
		16 mm x 20 m			BK 39
		75 mm x 20 m			BK 730
		75 mm x 20 m			BK 731

 = 진료실에서의 사용권장

 = 기공소에서의 사용권장

Bausch Arti-Fol® metallic Shimstock film 12 µm



Bausch Arti-Fol® metallic Shimstock film 12 µm

Arti-Fol® metallic은 교합검사 필름으로 12 µm 두께의 금속화 폴리에스터필름(심스톡필름)과 단면 또는 양면 색소코팅으로 이루어져 있습니다.

유연성, 찢김방지, 정전하감소 등이 특징입니다. 두께가 얇아 대합치의 맞물림을 매우 근접하게 확인할 수 있습니다. 모든 재료에서 교합 접촉을 정확히 표시할 수 있습니다. 따라서 번짐이나 표시오류를 크게 줄일 수 있습니다. 필름의 뒷면은 금속화되어 코팅되지 않은 면과

색소 코팅된 면을 혼동하지 않도록 방지합니다. 또 금속화를 통해 정전기도 방지하였습니다.

Arti-Fol® metallic BK 35의 8 mm 너비의 프리컷 스트립은 Arti-Fol® forceps BK 145(61)와 함께 사용하면 브릿지나 크라운 삽입시 인접면 접촉을 확인할 때 특히 유용합니다.

Arti-Fol® metallic의 보완제로 기존의 심스톡 필름을 코팅없이 8 mm, 16 mm 너비로 제공하고 있습니다.

심스톡 규정은 다음의 페이지에서 다운로드할 수 있습니다.

www.bauschdental.com/downloads

롤 22 mm 너비 |  |
깔끔하고 경제적인 분배를 위한 롤
예: 충전재, 크라운, 브릿지
(수복 및 기능 치과학)

롤 75 mm 너비 |  |
예: 교합스플린트, 전체틀니에 사용, 교합기의
전체치열궁

Arti-Fol® Articulating Film 8 µm



				REF	
 	22 mm x 20 m			BK 20	BK 1020
	22 mm x 20 m			BK 21	BK 1021
	22 mm x 20 m			BK 22	BK 1022
	22 mm x 20 m			BK 23	BK 1023
	22 mm x 20 m			BK 24	BK 1024
	22 mm x 20 m			BK 25	BK 1025
	22 mm x 20 m			BK 26	BK 1026
	22 mm x 20 m			BK 27	BK 1027
	75 mm x 20 m			BK 70	
	75 mm x 20 m			BK 71	
	75 mm x 20 m			BK 72	
	75 mm x 20 m			BK 73	
	75 mm x 15 m			BK 74	
	75 mm x 15 m			BK 75	
	75 mm x 15 m			BK 76	
	75 mm x 15 m			BK 77	
	75 mm	1 x		BK 137	
	22 mm	1 x		BK 139	

 = 진료실에서의 사용권장
 = 기공소에서의 사용권장

Arti-Fol® Articulating Film 8 μm



Arti-Fol® Articulating Film 8 μm

Arti-Fol® 8 μm는 매우 얇은 교합 검사필름으로 8 μm 두께의 폴리에스터필름과 단면 또는 양면 색소코팅으로 이루어져 있습니다.

얇은 색소코팅은 왁스와 안료로 구성되며 여러 재료에서 표시를 명확히 확인할 수 있도록 친수성 요소도 담겨 있습니다.

두께가 얇아 교합 접촉을 정확하고 확실하게 표현할 수 있습니다. Bausch Arti-Fol® Articulating Film은 정적, 동적 교합을 여러 색상으로 나타내는

데 특히 유용합니다. 정적 움직임과 여러 기능적인 동적 움직임(돌출, 측방, 내측방운동 등)을 나타내기 위해 4가지 색상을 사용합니다.

색상이 다양하기 때문에 기공소에서 왁스업(wax-up) 시에도 유용합니다.

롤 22mm 너비 |  |
갈끔하고 경제적인 분배를 위한 롤
예: 충전재, 크라운, 브릿지
(수복 및 기능 치과학)

Arti-Fol® articulating film 8 μm in 75 mm width
이 필름은 4가지 색상과 75 mm 너비로 제공됩니다. 넓은 필름은 주로 기공소에서 사용합니다.

교합기에서 용이하게 다루기 위해 Bausch Y-Holder BK 140도 제공하고 있습니다(63쪽참조).

롤 75mm 너비 |  |
예: 교합 스플린트, 전체틀니에 사용, 교합기의 전체치열궁



액체류 및 스프레이

1980년대 이후 Bausch는 보철 수복물조정을 위한 액체류 및 스프레이제품을 제공하고 있습니다.


- 크라운의 적합(fitting) 정확성을 확인하기 위한 Arti-Spot® contact color, 도포하기 쉬움

- 같은 용도의 Arti-Spray®, 스프레이캔을 적용하여 신속한 사용 가능

2016년에는 통증부위를 표시할 수 있는 Bio-Ink-Flow를 도입 하였습니다.

교합시험을 위해 해당기간에 Arti-Brux® 표시색소(indicator paint)를 추가하였습니다.

Bausch Arti-Spot® High Spot Indicator

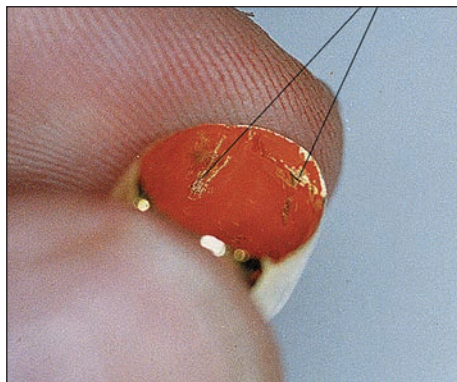

				REF	
 Arti-Spot® 1		15 ml		BK	85
Arti-Spot® 2		15 ml		BK	86
Arti-Spot® 3		15 ml		BK	87

 = 진료실에서의 사용권장
 = 기공소에서의 사용권장

Bausch Arti-Spot® High Spot Indicator



Bausch Arti-Spot® High Spot Indicator

Arti-Spot®은 크라운, 인레이, 온레이, 텔레스코프 크라운(telescope crown), 클라스프(clasp), 마찰면 등의 적합성을 정확히 확인하기 위한 액체류 접촉색소입니다.

검사하고자 하는 면에 Arti-Spot®을 브러쉬로 도포하고 용액이 증발되면 약 3 µm의 얇은 필름이 남습니다. 정확한 접촉지점에서 색소막(color skin)이 파괴되면서 접촉부분을 선명히 확인할 수 있습니다.

여러 재료에서 접촉부분을 명확히 확인할 수 있도록 3가지 색상을 사용하였습니다.


Arti-Spot®은 따뜻한 물을 사용해 기계적으로(치솔 또는 치간칫솔) 쉽게 제거할 수 있습니다. 알코올, 이소프로필알코올, 증기분사를 사용하면 마지막 잔여색소도 제거할 수 있습니다. 밀봉된 석고 모형(sealed plaster model)에서는 미세한 브러쉬로 제거할 수 있습니다.

병과 브러쉬 | 

검사면에 정확한 도포
(구강내 직접도포 금지)

예: 텔레스코프 크라운, 클라스프, 마찰면에 사용

Bausch Arti-Spray® Occlusion Spray

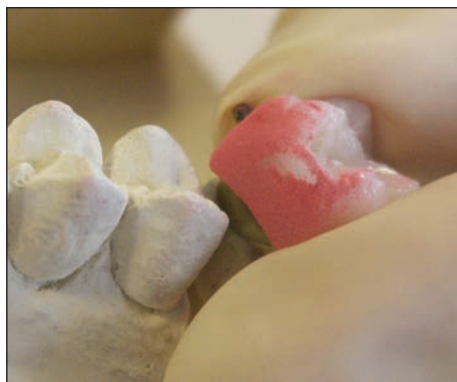

				REF
	Arti-Spray®	75 ml		BK 285
	Arti-Spray®	75 ml		BK 286
	Arti-Spray®	75 ml		BK 287
	Arti-Spray®	75 ml		BK 288

 = 진료실에서의 사용권장

 = 기공소에서의 사용권장

Bausch Arti-Spray® Occlusion Spray



Bausch Arti-Spray® Occlusion Spray

Arti-Spray®는 다용도 표시 스프레이로 4가지 색상으로 제공되며 교합접촉을 확인하고 크라운, 브릿지, 전체틀니, 부분틀니 등의 적합도를 점검할 수 있습니다.

Arti-Spray®는 정확한 도포가 가능하고 얇은 분말 색소층을 형성하며 물이나 증기 분사로 잔여물 없이 깨끗이 제거할 수 있습니다. Arti-Spray®는 접촉면이나 크라운 또는 브릿지 내부면에 3-5 cm 거리를 두고 분사합니다.

모든 접촉점은 색소층에서 점으로 나타나기 때문에 쉽게 확인할 수 있습니다. 필요시 접촉점을 색깔펜이나 Bausch Arti-Fol® Articulating Films로 표시하면 추 후 평가도 가능합니다. Arti-Spray®를 사용하면 크라운이나 브릿지를 끼울 때 인접면 접촉도 확인할 수 있습니다.

스프레이캔

BK 285 | 


BK 286 | BK 287 | BK 288 |  |  | MD

검사면에 빠른 도포

(구강내 직접 도포금지)

예: 텔레스코프 크라운, 클라스프, 마찰면에 사용

Bausch Bio-Ink®-Flow sore spot marker

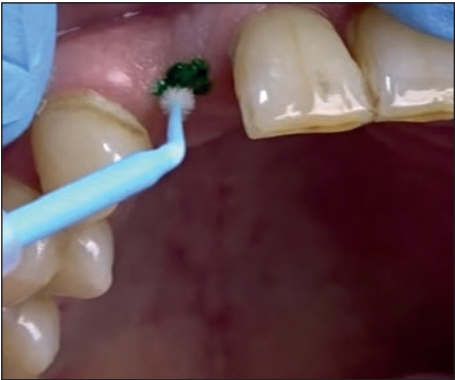

				REF
	Set	1 ml		BK 205
		1 ml		BK 206

 = 진료실에서의 사용권장

Bausch Bio-Ink®-Flow sore spot marker



Bausch Bio-Ink®-Flow sore spot marker

Bio-Ink®-Flow는 초록색의 점도가 높으며 도포가 쉬운 페이스트 형태로 점막의 통증부위를 표시하여 의치에서의 위치를 파악할 수 있습니다. Ah-line, 의치연(denture edge), 전정대(vestibular fold)를 표시하는데도 사용됩니다.

앞서 건조한 점막의 해당 부위를 Bio-Ink®-Flow로 표시합니다. 건조한 의치를 삽입하면 통증부위에 도포된 색소가 의치로 이동하여 조정할 위치를 보여줍니다.

바늘이 있는 어플리케이터 주사기 | 
BK 205 세트: 1회용 어플리케이터. 어플리케이터 홀더점막에 정확한 도포가능

바늘이 있는 어플리케이터 주사기 | 
BK 206: 점막에 정확한 도포가능

Bausch Arti-Brux® Occlusal Indicator Paint



				REF
	Applicator	0,15ml		BK 88
	Set	15 ml		BK 89

 = 진료실에서의 사용권장

Bausch Arti-Brux® Occlusal Indicator Paint



Bausch Arti-Brux® Occlusal Indicator Paint

Arti-Brux®는 빨간색 교합표시 색소로 매우 매끄러운 수복물 및 보철물, 교합 스플린트 등에서 움직임 패턴을 시각적으로 확인하게 해줍니다.

타액에 의해 잘 지워지지 않는 얇고 균일한 색소코팅으로 긴 시간 동안의 환자의 동적 교합을 시각적으로 확인할 수 있습니다(최대 24시간).

단단한 교합 스플린트나 보철 수복물에서 이상 기능(이갈이)도 시각적으로 확인할 수 있습니다. 스플린트의 절치-견치 유도 등 교합 개념도 상세하게 확인할 수 있습니다.

병과 1회용 브러쉬 BK 89 |  | 수복물, 보철물, 교합 스플린트에 정확한 도포

1회용 어플리케이터 BK 88 |  | 수복물, 보철물, 교합 스플린트에 정확한 도포



Bausch Arti-Pink 교합 인기용 왁스

2024년에 Arti-Pink 교합 인기용 왁스를 추가했습니다.

교합 인기용 왁스는 치의학이 좀더 체계적이고 과학적으로 발전해 나가던 19세기로 거슬러 올라갑니다. 이 왁스는 크라운, 브리지 또는 틀니와 같은 보철 작업을 위해 치아의 정확한 위치와 환자의 교합을 결정하기 위해 개발되었습니다.

실리콘, 기타 인상재료 및 디지털화와 같은 새로운 재료와 기술 개발에도 불구하고, 교합 인기용 왁스는 치과에서 여전히 중요하고 널리 사용되는 재료입니다.

왁스의 이런 특정 속성들은 특수 치료 요법에서 유리하게 사용될 수 있습니다.

Bausch Arti-Pink 교합 인기용 왁스



				REF
	150 x 80 x 3 mm	12 x		BK 6003
	„L“ 79 x 68 x 3 mm	24 x		BK 6016
	„M“ 68 x 60 x 3 mm	24 x		BK 6017
	„S“ 64 x 56 x 3 mm	24 x		BK 6018

 = 진료실에서의 사용권장

 = 기공소에서의 사용권장

Bausch Arti-Pink 교합 인기용 왁스



Bausch Arti-Pink 교합 인기용 왁스

바우쉬의 아티-핑크 바이트 왁스는 정밀한 교합 등록에 사용되며 교합부의 윤곽을 정확하게 재현할 수 있습니다. 이 제품은 뛰어난 모델링 특성이 특징입니다. 두께가 3mm인 이 엑스트라 하드 왁스는 150mm x 80mm 플레이트뿐만 아니라 조립식 사이즈 S, M, L의 타원형 형태로도 제공됩니다.

아티-핑크 바이트 왁스를 사용하려면 엑스트라 하드 왁스를 뜨거운 물에 약 55°C의 녹는 온도에 도달할 때까지 가열하면 모양이 만들어지고 정확한 바이트 등록에 사용할 수 있습니다.

플레이트 |  | 

보철 수복물을 위한 검증된 교합 인기용 왁스, 완전의치 그리고 일반적으로 상악 하악간 관계 기록을 결정하는 데 사용

타원형 |  | 

보철 수복물을 위한 타원형으로 제작된 검증된 교합 인기용 왁스, 완전의치 그리고 일반적으로 상악 하악간 관계 기록을 결정하는 데 사용



REF BK 252
Bausch Fleximeter® Strips
15 Fleximeter®-Strips
2.5 mm - Blue

Dr. Jean Bausch GmbH & Co. KG
Helm-Schneider-Str. 4 • D-50169 Köln
Bausch Articulating Papers (Australia) Pty Ltd
Hawthorn, VIC 3122, Australia
© P.A. Baur 3723 • Sydney NSW 2001 • Australia
Bausch Articulating Papers Japan K. K.
1st Floor, 1-4-2, Jinno, Yokohama, Kanagawa 223-0292
Made in Germany
Medical Product • For professional use only • Read instructions • Not for consumption

REF BK 252
Bausch Fleximeter® Strips
15 Fleximeter®-Strips
2.5 mm - Pink

Dr. Jean Bausch GmbH & Co. KG
Helm-Schneider-Str. 4 • D-50169 Köln
Bausch Articulating Papers (Australia) Pty Ltd
Hawthorn, VIC 3122, Australia
© P.A. Baur 3723 • Sydney NSW 2001 • Australia
Bausch Articulating Papers Japan K. K.
1st Floor, 1-4-2, Jinno, Yokohama, Kanagawa 223-0292
Made in Germany
Medical Product • For professional use only • Read instructions • Not for consumption

Bausch Fleximeter®-Strips

1980년, Fleximeter®가 유일한 실리콘 기구로 Bausch 제품군에 추가 되었습니다. 이후 발전을 거듭하여 2002년 오늘날 사용형태인 Fleximeter®-Strips가되었습니다.

Bausch Fleximeter®-Strips



				REF
	1,0 mm	15 x		BK 250
	1,5 mm	15 x		BK 251
	2,0 mm	15 x		BK 252
1,0 mm 1,5 mm 2,0 mm		3 x 5 = 15	  	BK 253
1,0 mm 1,5 mm 2,0 mm		3 x 1 = 3	  	BK 254

 = 진료실에서의 사용권장

 = 기공소에서의 사용권장

Bausch Fleximeter®-Strips



Bausch Fleximeter®-Strips

Fleximeter®-Strips는 살균 가능한 실리콘으로 만든 유연한 측정 도구로 3가지 두께로 제공되며 수복물의 프렙거리(preparation distance)를 결정하는데 사용합니다.

1.0 mm, 1.5 mm, 2.0 mm 두께의 Fleximeter®-Strips는 교합의 거상을 한 보철의 바이트를 채득 하는데 사용할 수 있습니다(예: 마모치아, 교합 스플린트).

Arti-Spot®, Arti-Spray®, Fleximeter®-Strips가 있는 색소침을 도포함으로써 프렙거리를 확인할 수 있

습니다. 프렙거리가 너무 짧은 경우, 프렙에서 색소표시를 확인할 수 있습니다.

실리콘 측정도구 |  |  |
프렙 거리 검사용




Bausch 기구 및 부품

Bausch의 교합 검사 제품은 Bausch 바이트 프레임(bite frame), 포셉 등과 함께 사용하면 보다 유용합니다.

Bausch는 고품질 기구를 제공할 뿐만 아니라 양측교합조절(bilateral occlusion control)나 인접면 사용등에 활용할 수 있는 바이트 프레임을 제공합니다.

Bausch paper & Arti-Fol® forceps

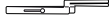

				REF
		1 x		BK 132
		1 x		BK 133
		1 x		BK 142
		1 x		BK 144
		1 x		BK 145

 = 진료실에서의 사용권장

Bausch paper & Arti-Fol® forceps



Bausch Paper & Arti-Fol® Forceps

Arti-Fol® Forceps BK 132 |  | 자동 고정 기능이 가능하며 세로방향의 홈이 있는 Arti-Fol® forceps BK 132를 사용하면 교합지와 교합필름을 안정적으로 잡을 수 있습니다.

Articulating Paper Forceps Type “Miller” BK 142 |  | ‘Miller’형 교합지 포셉은 여러 유형의 교합지를 잡을 수 있는 고품질 기구입니다.


Arti-Fol® forceps “SteriSlide” BK 144 |  | Bausch forceps Arti-Fol® “SteriSlide”에는 세로 방향의 홈이 있으며 교합필름을 안정적으로 잡을 수 있습니다. 또한, 슬라이더(살균보조장치)가 있어 살균과정에서 포셉을 개방한 채로 유지할 수 있습니다.

Arti-Fol® forceps for approximal contacts BK 145 |  | 밀러 박사가 설계한 Arti-Fol® forceps for approximal contacts는 수복물이 인접면에 걸리지 않고 빠르게 안착될 수 있도록 도와줍니다. 혁신적이며 사용자 친화적인 디자인으로 기존방법에 비해 다루기가 용이합니다. 체결력이 높아 교합필름을 양면에 단단히 고정할 수 있으며 치과의사가

인접면 컨택을 평가할 때도 안정적인 유도가 가능합니다. 필름은 빠르고 간편하게 삽입할 수 있습니다. 구멍이 없어 방법에 상관없이 쉽게 멸균 또는 살균할 수 있습니다.

Bausch에서는 Arti-Fol® forceps for approximal contacts와 함께 사용할 수 있는 Arti-Fol® metallic도 12 µm와 8 µm, 두 가지 너비로 제공하고 있습니다. Arti-Fol® metallic은 인장력이 높아 브릿지나 크라운을 삽입할 때 인접면 확인을 위해 사용하며 표시가 선명하고 두께가 얇습니다.


Bausch Bite Frames | 부품

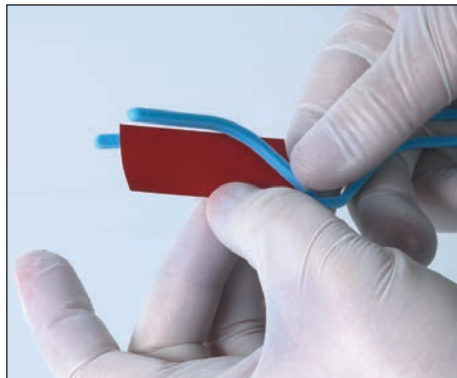

				REF
		1 x		BK 130
		1 x		BK 133
		1 x		BK 140
		5 x		BK 143
				REF
		1 x		BK 137
		1 x		BK 139

 = 진료실에서의 사용권장

 = 기공소에서의 사용권장

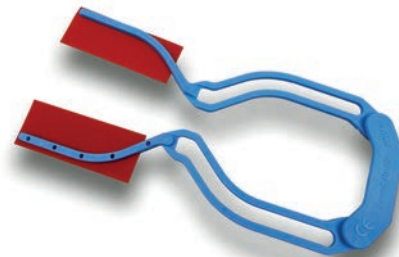

Bausch Bite Frames

Flexible Bite Fork BK 130 (+ 2x BK 133) | |

Bausch의 유연한 바이트 포크(bite fork)는 이중곡선 포셉 BK 133과 고무핸들 BK 130이 결합된 형태입니다. 포셉을 간단히 고무핸들에 삽입하면 다양한 턱 크기에 맞춰 거리를 조절할 수 있습니다.

Fix-Clip® Bite Frame BK 143 | |

Fix-Clip® Bite Frame은 금속기구의 대체제로 얇은 교합지와 교합검사필름을 안정적으로 잡기 위해 사용합니다. 유연하며 살균이 가능합니다.

Bausch Y-Holder BK 140 | |

75 mm 너비 필름 또는 80 mm 너비 실크용 Bausch Y-Holder 이 홀더는 교합기에서 활용하기 위해 설계되었습니다.

부품

아크릴릭 디스펜서인 BK 137은 너비가 넓은 실크와 필름에 사용합니다.

BK 139는 22 mm 너비 교합지와 필름에 사용할 수 있는 플라스틱 디스펜서입니다. 이 디스펜서는 통합 금속 톱니면으로 구성되어 있습니다.



www.bauschdental.com

Dr. Jean Bausch GmbH & Co. KG
Oskar-Schindler-Straße 4
D-50769 Köln - Germany
Tel: +49-221-70936-0
Fax: +49-221-70936-66
info@bauschdental.de
www.bauschdental.de

Bausch Articulating Papers, Inc.
12 Murphy Drive
Nashua, NH 03062, U.S.A.
Tel: +1-603-883-2155
Tel: 888-6-BAUSCH
Fax: +1-603-883-0606
info@bauschdental.com
www.bauschdental.com

Bausch Articulating Papers (Australasia) Pty. Ltd
ABN 73093760402
G.P.O. Box 3733, Sydney NSW 2001, Australia
Tel: +61-2-9345-1945
Fax: +61-2-9345-1955
info@bauschdental.com.au
www.bauschdental.com.au

Bausch Articulating Papers Japan K. K.
5F, 1-1-31, Nishimidorigaoka
Toyonakashi, Osaka 560-0005 - Japan
Tel: +81 6-6845-0020
Fax: +81 6-6845-0024
E-Mail: info@bauschdental.jp
Web: www.bauschdental.jp

Bausch Importação de Materiais Odontológicos Ltda.
Rua Paulo Eduardo Xavier de Toledo, 379 salas 8 e 9
13304-240 Itu-SP, Brasil
Tel: +55 11 3020-9263
vendas@bauschbrasil.com.br
www.bauschbrasil.com.br

Bausch Articulating Papers Co., Ltd.
#1004, The O Ville B/D, 344, Jong-Ro, Jongno-Gu
Seoul 03114, Korea
Tel: +82 2-2236-0158
Fax: +82 2-6499-9158
info@bauschdental.kr
www.bauschdental.kr

