



Bausch

WE MAKE OCCLUSION VISIBLE

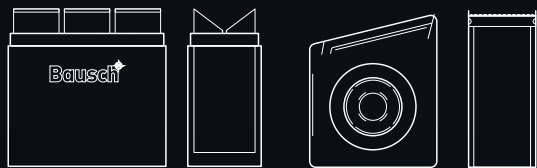

MATERIAŁY DO BADANIA ARTYKULACJI I OKLUZJI

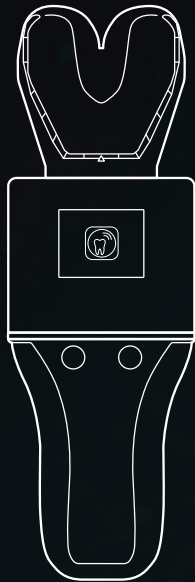





Sprawiamy, że Okluzja jest widoczna.

Założyciele firmy, dentyści Dr. Jean Bausch i Dr. Hans Bausch, bardzo wcześnie zauważyli potrzebę opracowania czulej na nacisk kalki artykulacyjnej, aby możliwie najdokładniej wizualizować zwarecie.

Od 1953 firma Dr. Jean Bausch GmbH & Co. KG specjalizuje się w produkcji kalki artykulacyjnej z progresywnym transferem koloru. Sprawdzony produkt BK 01 był pierwszym papierem artykulacyjnym prezentującym różne siły żucia w różnych odcieniach koloru. Ta zasada progresywnego transferu kolorów pozostaje ważną metodą dokładnego wykrywania przedwczesnych kontaktów.



Naszym priorytetem jest precyzyjne przenoszenie kolorów na powierzchniach takich jak ceramika, akryl czy metale.

W ten sposób opracowano szeroką gamę różnych materiałów do badania artykulacji i okluzji o różnych grubościach, kształtach i kolorach, co czyni nas jednym z wiodących światowych producentów.

Jako firma rodzinna drugiego pokolenia nadal koncentrujemy się na innowacjach i konsekwentnym rozwoju produktów. W związku z tym zaprezentowaliśmy nowy system OccluSense® do cyfrowej kontroli okluzji na targach IDS 2019 w Kolonii, Niemcy.



Pani Evelyn Bausch, żona dr Hansa Bauscha, dołączyła do firmy w 1961 roku. André i Peter Bausch (synowie Dr. Hansa Bausch i Evelyn Bausch) są dyrektorami zarządzającymi Dr. Jean Bausch GmbH & Co. KG od 1998 roku.

Wszystkie nasze produkty są wytwarzane ściśle zgodnie z europejskimi przepisami dotyczącymi wyrobów medycznych pod stałą kontrolą naszego zespołu ds. zapewnienia jakości zgodnie z normą DIN EN ISO 13485.

Niniejsza broszura jest przeznaczona przede wszystkim dla profesjonalnych użytkowników, aby pomóc im wybrać odpowiedni materiał testowy do indywidualnych potrzeb.




- 1953 - Założenie firmy w Kolonii wraz z pierwszą kalką artykułacyjną z progresywnym transferem
- 1962 - Pierwszy udział w IDS w Kolonii
- 1972 - Wprowadzenie na rynek ultracienkiej kalki okluzyjnej 40 µm
- 1974 - Przeniesienie produkcji do Nadrenii-Palatynatu
- Wprowadzenie kalki w kształcie podkowy
- 1979 - IDS Düsseldorf: Wprowadzenie na rynek Arti-Fol®
- Założenie Bausch Dental Co. of America jako przedstawicielstwo
- 1983 - IDS Monachium: Arti-Fol® 8 µm w 4 kolorach
- 1986 - IDS Cologne: Prezentacja kalki w płynie Arti-Spot®
- 1994 - Założenie Bausch Articulating Papers, Inc., w Nashua, NH, U.S.A.
- 1999 - IDS Cologne: Arti-Fol® metallic 12 µm
- 2003 - Założenie Bausch Articulating Papers (Australazja) Pty. Ltd w Sydney, Australia
- 2007 - Założenie Bausch Articulating Papers Japan K.K., w Osace, Japonia
- Założenie of Bausch Importação de Materiais Odontológicos Ltda. w São Paulo, Brazylia
- 2009 - Rozszerzenie obszaru produkcyjnego w Niemczech
- 2017 - IDS Cologne: Prezentacja OccluSense® systemu z cienkim, pokrytym pigmentem elektronicznym czujnikiem nacisku
- 2019 - IDS Cologne: Wprowadzenie na rynek OccluSense®
- 2020 - Rozbudowa budynku produkcyjnego i obiektów szkoleniowych w Kolonii
- 2021 - Założenie Bausch Articulating Papers Co. Ltd. w Seulu, Korea

Zawartość

Okluzja - Wpływy - Efekty Dokładne wykrywanie przedwczesnych kontaktów	6
Materiały do badania artykulacji i okluzji Bauscha Przegląd grubości	8
OccluSense® — Elektroniczna kontrola okluzji	12
Zasada progresywnego transferu kolorów	16
Sprawdzenie zgryzu metodą dwuetapową	18
Kalki artykulacyjne i okluzyjne/Jedwabie artykulacyjne	20
Kalki artykulacyjne z progresywnym transferem koloru 200 µm	22
PROGRESS 100 Kalki artykulacyjne z progresywnym transferem koloru 100 µm	24
Arti-Ceram	26
Artykulacyjny jedwab z progresywnym transferem koloru 80 µm	28
Kalka artykulacyjna Bauscha Arti-Check® ultracienka 40 µm	30
Folie do badania okluzji Bauscha	32
Bausch Arti-Fol® metallic Shimstock Film 12 µm czarno/czerwona	
Bausch Arti-Fol® metallic Complete 12 µm czarno/czerwona	34
Bausch Arti-Fol® metallic Folia artykulacyjna 12 µm	36
Arti-Fol® Folia artykulacyjna 8 µm	38
Płyny i spraye	40
Bausch Arti-Spot® Precyzyjny wskaźnik podcieleni	42
Bausch Arti-Spray® Aerosol okluzyjny	44
Bausch Bio-Ink Flow®- Wskaźnik punktu nacisku	46
Bausch Arti-Brux® Kontrola bruksizmu	48
Bausch Arti-Pink Bite Wax	50
Bausch Fleximeter®-Strips	54
Bausch Instrumenty i akcesoria	58
Bausch Paper & Arti-Fol® Pęsety	60
Bausch Bite Ramki Akcesoria	62

Okluzja – Wpływy – Efekty

Dysfunkcja czaszkowo-żuchwowa

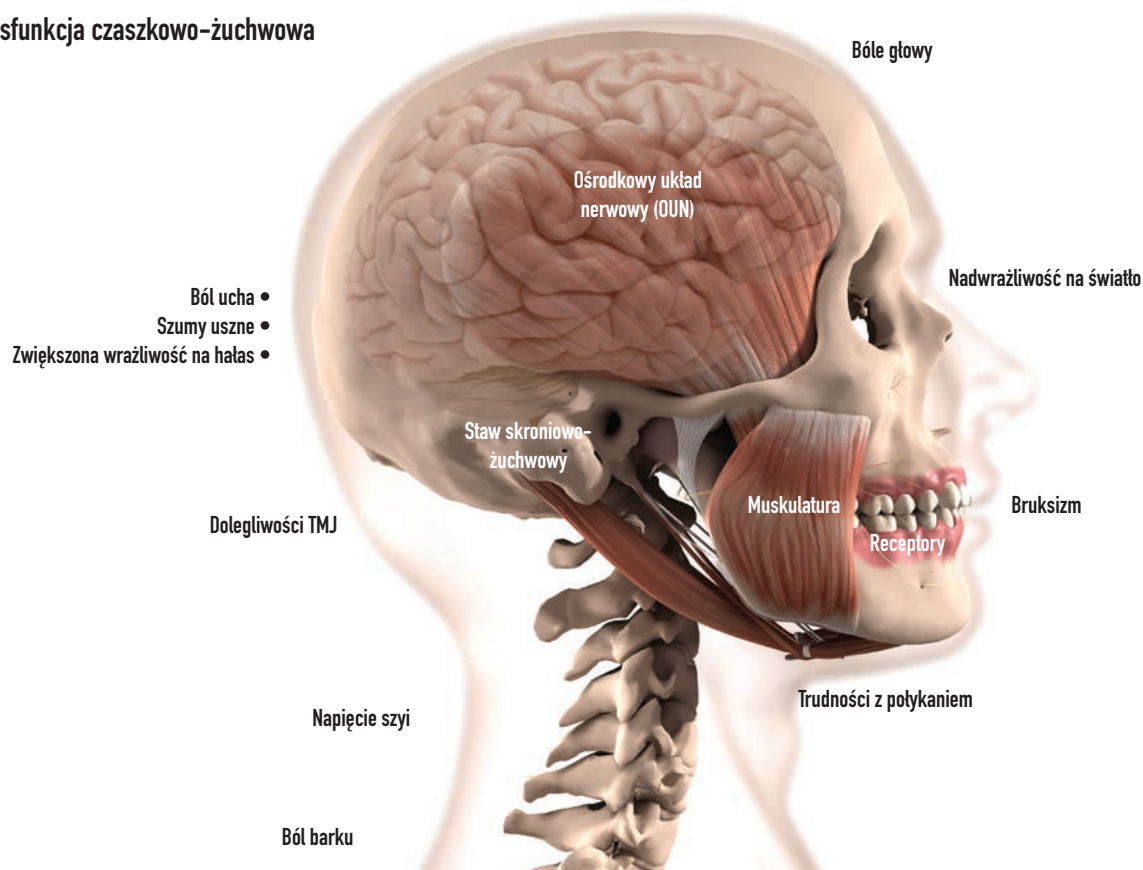

Dokładne wykrywanie przedwczesnych kontaktów.

Okluzja to każdy kontakt między zębami szczęki i żuchwy.

Okluzja stanowi część układu stomatognatycznego, który reprezentuje anatomiczną jednostkę stawu skroniowo-żuchwowego, mięśni żucia, nerwów czuciowych, receptorów nacisku i ośrodkowego układu nerwowego.

Każda odbudowa, ekstrakcja czy leczenie protetyczne, a także każde leczenie ortodontyczne zmienia zgryz statyczny i dynamiczny, a tym samym może mieć wpływ na całą anatomię ciała.

W tym kontekście Bausch postawił sobie za cel opracowanie produktów do testów okluzyjnych dla profesjonalistów w celu przywrócenia indywidualnej fizjologicznej okluzji dla każdego pacjenta.

Należy zatem rozważyć nie tylko kontrolę statycznej okluzji (kontakt zębów bez ruchu żuchwy w maksymalnym zązębieniu), ale również ruchy dynamiczne.

Ruchy dynamiczne, tj. kontakty zębów wynikające z ruchu żuchwy, dzieli się na prowadzenie przednie, kierowanie kłów i prowadzenie grupowe.

Folie 8 µm i 12 µm w różnych kolorach zostały zaprojektowane w celu sprawdzenia różnych wzorców ruchu w całym łuku zębowym.

Na przykład,

czarny	dla okluzji statycznej
czerwony	dla laterotruzzji
zielony	dla mediotruzzji
niebieski	dla protruzji

Zmiana nawykowej okluzji, tj. nawykowo przyjmowanej statycznej okluzji, może prowadzić do zmiany napięcia nerwowo-mięśniowego, co z kolei może wyzwoić zmiany postawy i objawić się CMD (dysfunkcją czaszkowo-żuchwową).

Interakcja powyższych czynników jest wyraźnie pokazana na schemacie.

W nauce zdefiniowano różne koncepcje okluzji, które mogą służyć jako szablon do rekonstrukcji okluzji. Należy je jednak rozumieć tylko jako modele, ponieważ nie istnieje coś takiego jak "jedyna okluzja". Należy raczej skupić się na indywidualnej okluzji z uwzględnieniem warunków biomechanicznych każdego pacjenta podczas terapii.

Celowe i rozsądne stosowanie różnych kalek i folii o różnej grubości może zapewnić, dokładne odbudowanie punktów kontaktu, bez ryzyka zafałszowania obrazu.

Kalki artykulacyjne Bauscha 100 µm i 200 µm z progresywnym transferem koloru służą do ogólnej lokalizacji statycznych punktów kontaktowych, ponieważ oznaczają każdy materiał i wchłaniają ślinę. Mogą być stosowane w gabinecie stomatologicznym, ale także w laboratorium techniki dentystycznej.

Do grupy kalek artykulacyjnych należą również kalki artykulacyjne Arti-Check® o grubości 40 µm. Te cienkie kalki są obustronnie pokryte płynnymi kolorami i znakują precyzyjnie dzięki niewielkiej grubości materiału.

Aby uwzględnić aspekt mięśniowy, który ma duży wpływ na okluzję, opracowano system OccluSense® do cyfrowej kontroli okluzji, który umożliwia lekarzowi ocenę rozkładu sił żucia w całym łuku zębowym na osi czasu.

Końcowa kontrola okluzji przy użyciu odpowiedniego sprzętu jest ważna, aby uniknąć zakłócających kontaktów i następnych zaburzeń stawu skroniowo-żuchwowego.

	200 µm	niebieski	impregnowany	dwustronny	200 µm papier
	200 µm	czerwony	impregnowany	dwustronny	200 µm papier
	100 µm	niebieski	impregnowany	dwustronny	100 µm papier
	100 µm	czerwony	impregnowany	dwustronny	100 µm papier
	200 µm	zielony	impregnowany	dwustronny	200 µm papier
	100 µm	zielony	impregnowany	dwustronny	100 µm papier
	80 µm	niebieski	impregnowany	dwustronny	80 µm jedwab
	80 µm	czerwony	impregnowany	dwustronny	80 µm jedwab
	80 µm	zielony	impregnowany	dwustronny	80 µm jedwab
	40 µm	niebieski/niebieski	powlekany	dwustronny	20 µm papier + 10 µm + 10 µm pigmentu
	40 µm	czerwony/czerwony	powlekany	dwustronny	20 µm papier + 10 µm + 10 µm pigmentu
	40 µm	niebieski/czerwony	powlekany	dwustronny	20 µm papier + 10 µm + 10 µm pigmentu
	12 µm	czarna/czerwona	powlekana	dwustronna	12 µm folia + 6 µm + 6 µm pigmentu
	12 µm	czarna	powlekana	jednostronna	12 µm folia + 6 µm pigmentu
	12 µm	czerwona	powlekana	jednostronna	12 µm folia + 6 µm pigmentu
	12 µm	zielona	powlekana	jednostronna	12 µm folia + 6 µm pigmentu
	12 µm	niebieska	powlekana	jednostronna	12 µm folia + 6 µm pigmentu
	12 µm	-	niepowlekana	-	12 µm folia bez pigmentu
	8 µm	czarna	powlekana	jednostronna	8 µm folia + 6 µm pigmentu
	8 µm	czerwona	powlekana	jednostronna	8 µm folia + 6 µm pigmentu
	8 µm	zielona	powlekana	jednostronna	8 µm folia + 6 µm pigmentu
	8 µm	niebieska	powlekana	jednostronna	8 µm folia + 6 µm pigmentu
	8 µm	czarna	powlekana	dwustronna	8 µm folia + 6 µm + 6 µm pigmentu
	8 µm	czerwona	powlekana	dwustronna	8 µm folia + 6 µm + 6 µm pigmentu
	8 µm	zielona	powlekana	dwustronna	8 µm folia + 6 µm + 6 µm pigmentu
	8 µm	niebieska	powlekana	dwustronna	8 µm folia + 6 µm + 6 µm pigmentu

Materiały Bauscha do badania artykulacji i okluzji.

Od 1953 roku specjalizujemy się w produkcji materiałów do testów artykulacyjnych i okluzyjnych, które są niezbędnym elementem pracy w stomatologii.

Z czasem rozszerzyliśmy nasz asortyment do potrzeb naszych profesjonalnych użytkowników jak również do nowych metod leczenia oraz materiałów stomatologicznych.

Na początku lat 70 obok sprawdzonych papierów artykulacyjnych i jedwabi zaoferowaliśmy cieńsze kalki o grubości zaledwie 40 µm.

W tej samej dekadzie pojawiła się stomatologiczna koncepcja gnathologii, która obecnie reprezentuje dziedzinę diagnostyki funkcjonalnej. Dla tej koncepcji konieczne były cieńsze materiały do badań. Od tego czasu oferujemy odporne na rozdarcie, cienkie i precyzyjne folie w różnych kolorach i grubościach.

Ponadto dostępne są środki płynne do badań, jak również spraye okluzyjne i inne wskaźniki kolorystyczne.

Na targach IDS International Dental Show 2019 wprowadziliśmy m.in. System OccluSense®, który dodaje opcję elektroniczną do klasycznych materiałów do badania okluzji.



Kalki artykulacyjne 200 µm



- progresywny transfer kolorów
- dobre odwzorowanie na wilgotnych powierzchniach zgryzowych
- widoczne ślady na ceramice
- transfer koloru pod naciskiem
- do sprawdzania statycznej okluzji
- rozległe, dobrze widoczne oznaczenia
- miękki materiał z mikropolaru – dobrze dopasowuje się do powierzchni zgryzowej
- do wstępnej kontroli przedwczesnych kontaktów
- nadaje się do wszystkich materiałów



Kalki artykulacyjne 100 µm



- progresywny transfer kolorów
- dobre odwzorowanie na wilgotnych powierzchniach zgryzowych
- widoczne ślady na ceramice
- transfer koloru pod naciskiem
- do sprawdzania statycznej i dynamicznej okluzji
- bardzo dokładne, dobrze widoczne oznaczenia
- bardzo miękki, odporny na rozdarcia materiał mikropolar
- dobrze dopasowuje się do powierzchni zgryzowej
- do wstępnej kontroli przedwczesnych kontaktów
- nadaje się do wszystkich materiałów



Arti-Ceram 200 µm | 100 µm



- barwi się progresywnie
- dobrze barwi na wilgotnych powierzchniach zgryzowych
- dobrze widocznie barwi na ceramice CAD/CAM
- barwi pod wpływem nacisku
- do weryfikacji statycznej okluzji (200 µm)
- do weryfikacji statycznej i dynamicznej okluzji (200 µm)
- precyzyjne, dobrze widoczne oznaczenia
- miękki materiał włókninowy - dobrze dopasowuje się do powierzchni zgryzowych (200 µm)
- bardzo miękki, odporny na rozdarcie materiał włókninowy (100 µm)
- dobrze dopasowuje się do powierzchni zgryzowych
- do wstępnej kontroli przedwczesnych kontaktów
- odpowiedni do wszystkich materiałów



Jedwabie artykulacyjne 80 µm



- progresywny transfer kolorów
- dobrze zaznacza na wilgotnych powierzchniach zgryzowych
- widoczne ślady na ceramice
- transfer koloru pod naciskiem
- do sprawdzania statycznej i dynamicznej okluzji
- bardzo dokładne, dobrze widoczne oznaczenia
- bardzo miękka, odporna na rozdarcia tkanina jedwabna – dopasowuje się dobrze do powierzchni zgryzowej
- do wstępnej kontroli przedwczesnych kontaktów
- nadaje się do wszystkich materiałów
- zalecany do techniki Gerbera



Kalki artykulacyjne 40 µm



- dobrze zaznacza na wilgotnych powierzchniach zgryzowych
- widoczne ślady na ceramice
- przenoszenie koloru przez nacisk i tarcie
- do sprawdzania statycznej i dynamicznej okluzji
- bardzo dokładne, dobrze widoczne oznaczenia
- bardzo cienka kalka
- nadaje się do wszystkich materiałów
- precyzyjnie zaznacza kontakty zgryzowe



Arti-Fol® metallic 12 µm



- ultracienka folia metalizowana
- precyzyjnie zaznacza wszystkie punkty styku
- brak kontaktów rozmazujących
- przeniesienie koloru przez tarcie
- antystatyczny
- bardzo dokładne kontakty
- dobrze dopasowuje się do powierzchni zgryzowej
- nadaje się do wszystkich materiałów
- nie rozdziera się nawet po pociągnięciu
- dobrze zostawia ślady na suchych, ceramicznych materiałach
- dostępna również w wersji niepowlekanej (folia Shimstock)
- dostępna również jako rolka o szerokości 75 mm



Arti-Fol® 8 µm




- ultracienka folia
- precyzyjnie zaznacza wszystkie punkty styku
- brak kontaktów rozmazujących
- przeniesienie koloru przez tarcie
- bardzo dokładne kontakty
- dobrze dopasowuje się do powierzchni zgryzowej
- nadaje się do wszystkich materiałów
- nie rozdziera się nawet po pociągnięciu
- dostępna również jako rolka o szerokości 75 mm
- dostępne powlekane jednostronnie lub dwustronnie



OccluSense® 60 µm

- odwzorowanie sił żucia, widocznych na zębach oraz cyfrowo w postaci diagramu słupkowego
- pionowe lub płaskie relacje guzków i dołków są wizualizowane przez różne kolory słupków
- udoskonalona ocena okluzji w statycznej i dynamicznej okluzji
- wizualizacja sił osiowych na rekonstrukcjach wspartych, na implantach, na rekonstrukcjach wspartych, na implantach i na protezach
- wykrywanie przedwczesnych kontaktów
- efektywniejsza komunikacja z pacjentem
- elektroniczny czujnik nacisku: 60 µm cienki, elastyczny i pokryty pigmentem
- prezentacja rozkładu siły żucia w procentach
- ułatwiona dokumentacja dzięki OccluSense®-iPad-App

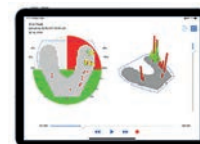



CELLERANT
BEST OF CLASS
TECHNOLOGY AWARD
2019



Bausch OccluSense® – Cyfrowa Kontrola Okluzji

Próba wizualizacji dokładnego odwzorowania kontaktów zgryzowych była jednym z głównych wymagań, jakie postawiliśmy sobie podczas opracowywania OccluSense®. Powlekany kolorem czujnik OccluSense® charakteryzuje się jakością wyraźnego i selektywnego znakowania, podobnie jak sprawdzone i niezawodne kalki i folie artykulacyjne.


OccluSense® nie tylko wyświetla ostateczny kontakt zgryzowy pod względem statyki i dynamiki, ale także rejestruje progresję czasową aż do zakończenia ruchu zgryzowego.

Interpretacja nacisku sił zwania rejestrowanego przez OccluSense® różni się od klasycznych materiałów do badania okluzji, ponieważ więcej informacji jest dostarczanych w sposób efektywny czasowo. Informacje te obejmują rejestrację kontaktów zgryzowych podczas ruchu żuchwy od początkowego kontaktu do maksymalnego położenia międzykołkowego. OccluSense® firmy Bausch umożliwia każdemu dentyście rejestrowanie tych sytuacji zgryzowych i ich ocenę krok po kroku.

Nasz system OccluSense® otrzymał nagrodę Cellerant Best of Class Technology Award na kongresie ADA/FDI 2019 w San Francisco, Kalifornia, USA.

W konkursie OE-A 2021, organizowanym przez Stowarzyszenie Elektroniki Organicznej i Drukowanej (OE-A), nasz system OccluSense® został zwycięzcą w kategorii „Nowe produkty”.

Więcej informacji na temat systemu OccluSense® można znaleźć na stronie: www.occlusense.com

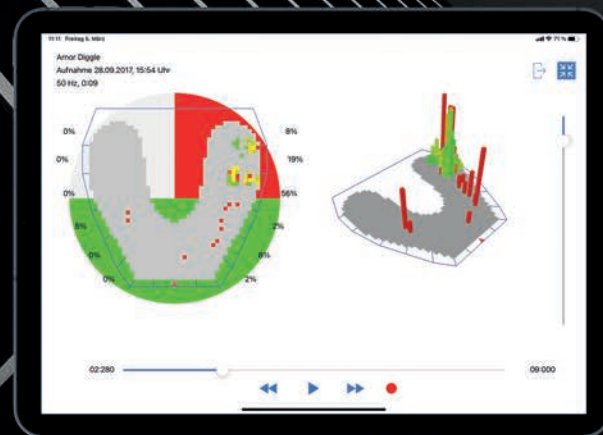



Cyfrowa kontrola okluzji w holistycznej terapii

Nowy, wielokrotnie nagradzany i przyjazny dla użytkownika produkt OccluSense® firmy Bausch łączy w sobie tradycyjną i cyfrową rejestrację rozkładu nacisku sił żucia na powierzchniach okluzyjnych.

Urządzenie OccluSense® z cienkim na 60 µm jednowizytowym czujnikiem nacisku z czerwoną powłoką kolorystyczną jest stosowane dokładnie tak jak konwencjonalne folie do badania okluzji i oferuje następujące cechy produktu:

- Kontrola okluzji na całym łuku zębowym
- Prezentacja przebiegu czasowego rozkładu nacisku sił żucia
- Przedstawienie procentowego rozkładu nacisku sił żucia
- Przedstawienie ruchów laterotruzyjnych i możliwych

- interferencji po stronie mediotruzyj
- Analogowa i cyfrowa prezentacja stanu okluzji
- Wizualna dokumentacja etapów leczenia poprzez porównanie przed i po
- Możliwość zastosowania np. przy szynoterapii, leczenia implantologicznego, dużych uzupełnień protezycznych, jak również do leczenia osteo- i fizjoterapii

The OccluSense® system:

Urządzenie OccluSense®

Zasilane bateriami urządzenie do rejestrowania danych z wprowadzonego czujnika nacisku

OccluSense® Ładowarka

Indukcyjna ładowarka do bezprzewodowego ładowania

OccluSense® Sensor


- 60 µm cienki
- elastyczny
- czerwona powłoka kolorystyczna
- umożliwia rejestrację warunków nacisku okluzyjnego w 256 poziomach
- do kontroli statycznej i dynamicznej okluzji

OccluSense® CenterFix Urządzenie centrujące BK 5040

Więcej informacji na temat systemu OccluSense® znajduje się dostępne na stronie: www.occlusense.com

				REF
		Set		BK 5000
	L	25 x		BK 5025
	XL	25 x		BK 5035
		10 x		BK 5040


Zasada progresywnego transferu kolorów

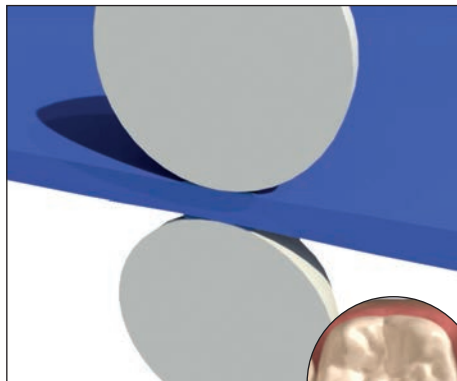

Mały nacisk


Fizjologiczny kontakt okluzyjny może być wykryty dzięki zasadzie progresywnego transferu kolorów.

Takie oznaczenia nie stanowią interferujących punktów kontaktowych.

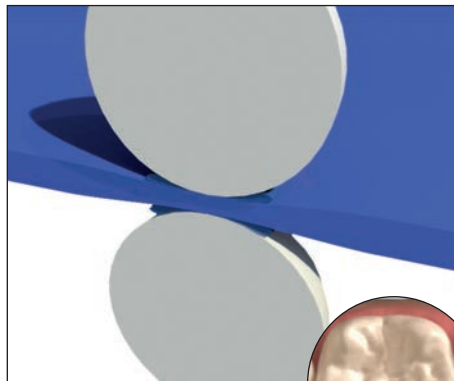

Większy nacisk

Przy większym nacisku zęba z materiału wydobywa się więcej koloru, a przybliżone punkty kontaktowe stają się widoczne dzięki ciemniejszemu kolorowi. W rezultacie powstaje oznaczenie typowe dla naszych produktów do testów progresywnych: wyciskany kolor tworzy okrąg wokół punktu kontaktowego.

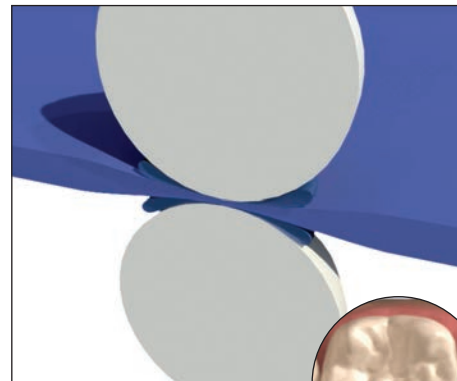

Maksymalny nacisk

W przypadku maksymalnego zaguzkowania lub zakłócającego kontaktu, efekt ten jest jeszcze bardziej widoczny, ponieważ w centrum oznaczenia, właściwy punkt kontaktowy prawie nie ma koloru, ale jest zarysowany przez ciemny pierścień koloru.

Zasada progresywnego transferu kolorów



Kalki artykulacyjne 200 µm, „PROGRESS 100” 100 µm, Arti-Ceram 200 µm oraz 100 µm, jak również jedwabie do artykulacji 80 µm charakteryzują się progresywnym przenoszeniem koloru.



Kalki i jedwabie artykulacyjne Bauscha z progresywnym przenoszeniem kolorów nadają się do przedstawiania okluzji statycznej.

Gębcza struktura miękkiej kalki z mikrowłókniny lub odpowiednio jedwabiu, magazynuje kolor, który jest wyciskany podczas nacisku. Dzięki zastosowaniu tych produktów zaznaczane są wszelkie kontakty z zębami

Progresywny transfer koloru w tym kontekście oznacza, że poprzez wywieranie coraz większej siły żucia, więcej koloru jest wyciskane z materiału i przenoszone na powierzchnie okluzyjne.


Zawarty w recepturze koloru środek wiążący Transculase® umożliwia lepsze przyleganie koloru do różnych materiałów i naturalnych zębów. Wrażliwa na nacisk kalka artykulacyjna umożliwia precyzyjną wizualizację rozkładu nacisku żucia.

Nasze progresywne materiały testowe nadają się więc idealnie do powierzchni okluzyjnych pokrytych śliną.

Dla dokładnego odwzorowania kontaktów okluzyjnych zalecamy kombinację różnych materiałów testowych.



Kontrola okluzji metodą 2 kroków

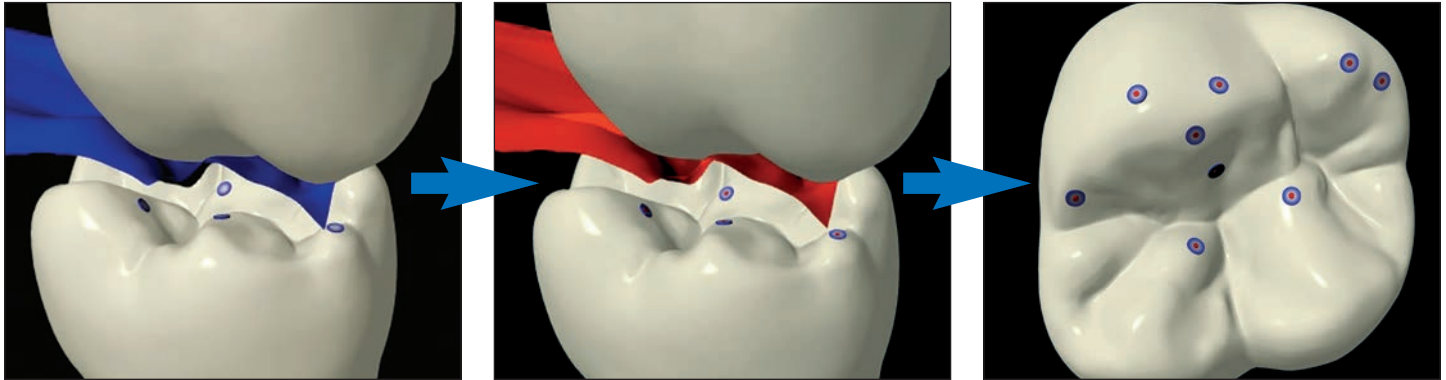

Aby uwidocznić kontakty na powierzchniach zwilżonych śliną, zalecamy stosowanie progresywnych materiałów testowych w połączeniu z cieńszymi foliami.

W pierwszym etapie należy sprawdzić okluzję za pomocą kalki artykulacyjnej 200 µm lub "PROGRESS 100" 100 µm.

Kalki te wchłaniają ślinę i tym samym tworzą doskonałą

podstawę do precyzyjnego, punktowego oznaczenia punktów kontaktowych folią Arti-Fol® metallic 12µm lub Arti-Fol® 8µm w drugim kroku.

Zaletami tej 2-stopniowej metody są:

- Zróżnicowane przedstawienie punktów i powierzchni okluzyjnych

- Wysoki kontrast reprezentacji przez różne kolory

- Lepsze przenoszenie kolorów folii okluzyjnych na powierzchniach narażonych na działanie śliny poprzez wcześniejsze naniesienie środka wiążącego Transculase®.



Bausch kalki artykulacyjne i okluzyjne

Bausch jedwabie artykulacyjne

Nasze kalki artykulacyjne z progresywnym transferem kolorów stanowiły podstawę do założenia naszej firmy w 1953 roku.

Wkrótce potem opracowano jedwabie artykulacyjne o grubości 80 µm, które do dziś są wykorzystywane do kontroli okluzji, głównie w laboratorium techniki dentystycznej.

W 1972 roku do naszego asortymentu dołączyły kalki okluzyjne Bauscha mikrocienkie 40 µm.

W 2000 roku wprowadzono produkt PROGRESS 100, kalki artykulacyjne z progresywnym transferem koloru 100 µm.

Bausch kalki artykulacyjne z progresywnym transferem kolorów 200 µm



				REF
	52 mm x 18 mm	300 x		BK 01
	52 mm x 18 mm	300 x		BK 1001 
	52 mm x 18 mm	300 x		BK 02
	52 mm x 18 mm	300 x		BK 1002 
		50 x		BK 03
		50 x		BK 04
	52 mm x 18 mm	300 x		BK 05

 = przyjazne dla środowiska opakowanie uzupełniające

 = zalecane do użytku w gabinetach stomatologicznych

 = zalecane do użytku w laboratoriach

Bausch kalki artykułacyjne z progresywnym transferem kolorów 200 µm



Bausch kalki artykułacyjne z progresywnym transferem kolorów 200 µm

Bausch kalki artykułacyjne z progresywnym transferem koloru 200 µm wskazują różne siły zgryzu za pomocą różnych odcieni koloru, w zależności od siły żucia:

- MAŁE CIŚNIENIE** – jasne oznaczenie
- WIĘKSZE CIŚNIENIE** – ciemniejsze oznaczenie
- MAXYMALNE CIŚNIENIE** – ciemny pierścień koloru otaczający kontakt okluzyjny

Stomatolog uzyskuje dokładny obraz rozkładu nacisku żucia. Widoczne są przedwczesne kontakty.

Paski |  | 

np. do wypełnień, koron i mostów (stomatologia zachowawcza i protetyka)

Kształt podkowy |  | 

np. do szyn okluzyjnych, protez całkowitych, kontroli całego łuku zębowego w artykulatorze i wewnątrzustnie

Bausch PROGRESS 100 kalki artykulacyjne 100 µm



				REF	
	52 mm x 18 mm	300 x		BK	51
	52 mm x 18 mm	300 x		BK	52
		50 x		BK	53
		50 x		BK	54
	52 mm x 20 mm	50 x		BK	57
	52 mm x 20 mm	50 x		BK	58

 = zalecane do użytku w gabinetach stomatologicznych

 = zalecane do użytku w laboratoriach

Bausch PROGRESS 100 kalki artykulacyjne 100 µm



Bausch PROGRESS 100

Kalki artykulacyjne z progresywnym transferem kolorów 100 µm

Ta miękka, wzmocniona włóknami kalka oferuje dużą pojemność kolorystyczną i dokładnie dopasowuje się do powierzchni okluzyjnej.

Dzięki możliwości stopniowego przenoszenia kolorów, precyzyjnie zaznacza okluzyjne punkty kontaktowe.

Unikalne połączenie ze środkiem wiążącym Transculase® i cienką kalką, precyzyjnie wskazuje kontakty okluzyjne i powierzchnie na materiałach o wysokiej polerowalności, takich jak stopy metali i materiały ceramiczne.


Kształt podkowy |  | 

np. do szyn okluzyjnych, protez całkowitych, kontroli całego łuku zębowego w artykulatorze i wewnątrzustnie

Paski |  | 

np. do wypełnień, koron i mostów (stomatologia zachowawcza i protetyka)

Bausch Arti-Ceram kalki artykulacyjne 200 μm i 100 μm

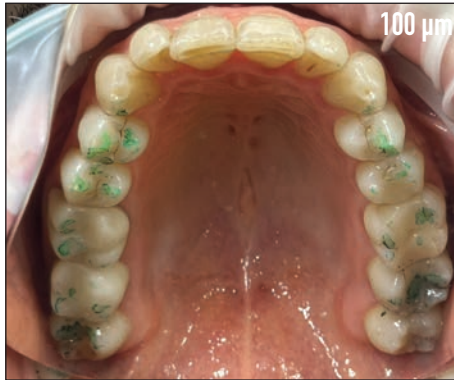

				REF	
Arti-Ceram 200µm					
	52 mm x 20 mm	50 x		BK	92
		50 x		BK	93
Arti-Ceram 100µm					
	52 mm x 20 mm	50 x		BK	97
		50 x		BK	98

 = zalecane do użyciu w gabinetach stomatologicznych

 = zalecane do użyciu w laboratoriach

Bausch Arti-Ceram kalki artykulacyjne 200 µm i 100 µm



Kalki artykulacyjne Bausch Arti-Ceram zielony 200 µm i 100 µm

W celu uzyskania optymalnego dopasowania koloru do naturalnej substancji zęba, dostępne są różne rodzaje ceramiki, takie jak ceramika szklana, ceramika cyrkonowa i ceramika skaleniowa. Materiały te są stosowane do (tymczasowych) koron, a także do wkładów i nakładów i mogą być polerowane na wysoki połysk w celu uzyskania wyjątkowej estetyki. Jednakże, dla dentystów istnieje pewne trudności przy dopasowywaniu okluzji przy użyciu tych wysoce wypolerowanych materiałów, które często są wytwarzane przy użyciu technologii CAD / CAM, ponieważ tradycyjne materiały do testowania okluzji przy tych

wysoce wypolerowanych materiałach są często nieskuteczne.

Aby móc skutecznie identyfikować przedwczesne kontakty, intensywnie zajęliśmy się tym problemem i zdecydowaliśmy się na sprawdzony kolor zielony, który jest znany w technologii dentystycznej od dziesięcioleci. Kolor ten ma tę decydującą zaletę, że jest dobrze widoczny i kontrastowy na estetycznych powierzchniach ceramiki o wysokim połysku dzięki specjalnym pigmentom barwiącym. Nasz produkt Arti-Ceram jest dostępny w dwóch grubościach, 200 µm i 100 µm, w paskach i w kształcie podkowy, i umożliwia precyzyjne dopasowanie okluzji w celu zapewnienia najlepszej możliwej funkcjonalności i estetyki.

Paski |  | 

np. do wypełnień, koron i mostów (stomatologia zachowawcza i protetyka)

Kształt podkowy |  | 

np. do szyn okluzyjnych, protez całkowitych, kontroli całego łuku zębowego w artykulatorze i wewnątrzustnie

Jedwab artykulacyjny z progresywnym transferem kolorów 80 µm



			REF
	80 mm x 3 m		BK 06
	80 mm x 3 m		BK 876
	80 mm x 3 m		BK 877
	16 mm x 10 m		BK 07
	16 mm x 10 m		BK 08

 = zalecane do użytku w gabinetach stomatologicznych

 = zalecane do użytku w laboratoriach

Jedwab artykulacyjny z progresywnym transferem kolorów 80 μm



Jedwab artykulacyjny Bauscha z progresywnym transferem koloru 80 μm

Jedwab artykulacyjny Bauscha jest wysokiej jakości produktem tekstylnym i posiada właściwości porównywalne z kalką artykulacyjną z progresywnym transferem koloru 200 μm . Tkanina jest odporna na rozdarcie, a dzięki niewielkiej grubości i elastyczności doskonale dopasowuje się do guzków i bruzd.

Znakowanie jedwabiem artykulacyjnym jest niezwykle precyzyjne i intensywne kolorystycznie.

Od dziesięcioleci jedwab artykulacyjny sprawdza się w badaniu powierzchni okluzyjnych, zarówno w stomatologii, jak i technice dentystycznej

Rolki |  | 

np. do szyn okluzyjnych, protez całkowitych, sprawdzania całego łuku zębowego w artykulatorze i wewnątrzustnie.

Bausch kalki artykulacyjne Arti-Check® ultracienkie 40 µm



				REF	
	103 mm x 20 mm	200 x		BK 09	
	103 mm x 20 mm	200 x		BK 10	
	100 mm x 70 mm	100 x		BK 11	
	100 mm x 70 mm	100 x		BK 12	
	16 mm x 15 mm			BK 13	BK 1013
	16 mm x 15 mm			BK 14	BK 1014
	22 mm x 10 mm			BK 15	BK 1015
	22 mm x 10 mm			BK 16	BK 1016
		150 x		BK 17	
		150 x		BK 18	
	52 mm x 20 mm	200 x		BK 61	
	52 mm x 20 mm	200 x		BK 62	
	52 mm x 20 mm	200 x		BK 63	
	103 mm x 20 mm	200 x		BK 80	
		150 x		BK 81	

 = przyjazne dla środowiska opakowanie uzupełniające

 = zalecane do użytku w gabinetach stomatologicznych

 = zalecane do użytku w laboratoriach

Bausch kalki artykulacyjne Arti-Check® ultracienkie 40 µm



Bausch kalki artykulacyjne Arti-Check® ultracienkie 40 µm

Bausch kalki artykulacyjne 40 µm to ultracienkie kalki pokryte obustronnie płynnymi barwnikami. Ze względu na niewielką grubość materiału, kalki te znakują niezwykle precyzyjnie. Dzięki temu, fałszywe lub rozmazane kontakty praktycznie nie występują.

Specjalna powłoka z płynnymi kolorami umożliwia wyraźne znakowanie wszystkich kontaktów okluzyjnych, nawet na materiałach takich jak ceramika, stopy metali, akryl i powierzchni okluzyjne narażone na działanie śliny.

Specjalna powłoka składa się z wielu małych mikrokapsułek wypełnionych kolorem. Nawet niewielki nacisk żucia powoduje pęknięcie tych kapsułek i uwolnienie koloru, co daje wyraźnie widoczne oznaczenia. Możliwe jest również wielokrotne znakowanie, ponieważ powłoka ma dużą pojemność przechowywania koloru.

Bausch Arti-Check® ultracienkie BK 63, BK 80 i BK 81 (dwukolorowe) nadają się bardzo dobrze do przedstawiania statycznej i dynamicznej okluzji.

Łuki | 

np. do szyn okluzyjnych, protez całkowitych, kontroli całego łuku zębowego w artykulatorze

Kształt podkowy |  | 

np. w przypadku szyn okluzyjnych, protez całkowitych, kontroli całego łuku zębowego w artykulatorze i wewnątrzustnie

Paski |  | 

np. do wypełnień, koron i mostów (stomatologia zachowawcza i protetyka)

Rolki |  | 

Dozowniki rolkowe do czystego i ekonomicznego dozowania np. do wypełnień, koron i mostów (stomatologia zachowawcza i protetyka)



Bausch Folie do testów okluzji


W latach 70-tych gnatologia stała się ważną częścią stomatologii. Aby zaspokoić potrzeby specjalistów w dziedzinie diagnostyki czynnościowej, w 1979 roku dodaliśmy do naszej oferty cienkie folie okluzyjne.

W 1983 roku wprowadzono Arti-Fol® 8 µm w czterech różnych kolorach. Folie te są dostępne z jedno- lub dwustronną kolorową powłoką.

W 1999 roku asortyment naszych folii został rozszerzony o Arti-Fol® metallic 12 µm.

W 2020 roku wprowadzono produkt metalizowany Arti-Fol® metallic Complete BK 328.

Bausch Arti-Fol® metallic folia Shimstock 12 µm czarno/czerwona

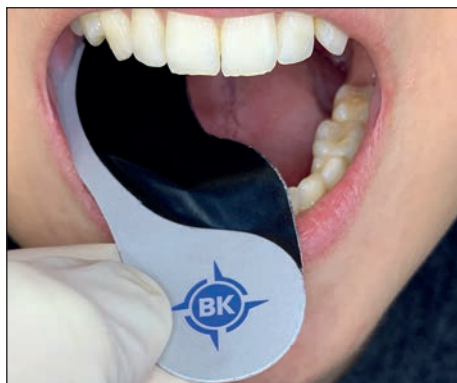

				REF
		22 mm x 20 m		BK 28
		22 mm x 20 m		BK 1028 
		20 x		BK 328

 = przyjazne dla środowiska opakowanie uzupełniające

 = zalecane do użytku w gabinetach stomatologicznych

 = zalecane do użytku w laboratoriach

Bausch Arti-Fol® metallic folia Shimstock 12 µm czarno/czerwona



Arti-Fol® metallic 12 µm czarno/czerwona

Arti-Fol® metallic 12 µm czarno/czerwona to folia do testów okluzyjnych składająca się z metalizowanej folii poliesterowej (shimstock film) o grubości 12 µm i dwustronnej kolorowej powłoki.

Folia ta charakteryzuje się elastycznością, odpornością na rozdarcie i zmniejszonym ładunkiem statycznym. Niewielka grubość materiału pozwala na bliskie zbliżenie antagonistów.

Rolki

Dozowniki rolkowe do czystego i ekonomicznego dozowania np. do wypełnień, koron i mostów (stomatologia zachowawcza i protetyka)

Arti-Fol® metallic Complete 12 µm

Arti-Fol® metallic Complete BK 328 łączy sprawdzoną folię Arti-Fol® metallic czarno/czerwoną z nowym i higienicznym uchwytem kartonowym.

Dzięki specjalnemu kształtowi Arti-Fol® metallic Complete może być stosowany pojedynczo po lewej lub prawej stronie lub w połączeniu dla całego łuku zębowego.

Paski z laminowanym uchwytem kartonowym

Higieniczne stosowanie bez instrumentu utrzymującego, np. przy wypełnieniach, koronach i mostach (stomatologia zachowawcza i protetyka).

Bausch Arti-Fol[®] metallic folia Shimstock 12 µm



				REF
		22 mm x 20 m		BK 30
		22 mm x 20 m		BK 31
		22 mm x 20 m		BK 32
		22 mm x 20 m		BK 33
	8 mm x 50 mm	100 x		BK 35
	8 mm x 50 mm	100 x		BK 38
		16 mm x 20 m		BK 39
		75 mm x 20 m		BK 730
		75 mm x 20 m		BK 731

 = zalecane do użytku w gabinetach stomatologicznych
 = zalecane do użytku w laboratoriach

Bausch Arti-Fol® metallic folia Shimstock 12 µm



Bausch Arti-Fol® metallic Folia Shimstock 12 µm

Arti-Fol® metallic to folia do testów okluzyjnych składająca się z metalizowanej folii poliestrowej (folia shimstock) o grubości 12 µm oraz jedno- lub dwustronnej kolorowej powłoki.

Folia ta charakteryzuje się elastycznością, odpornością na rozdarcie i zmniejszonym ładunkiem statycznym. Niewielka grubość materiału pozwala na bliskie zbliżenie antagonistów. Folia precyzyjnie zaznacza kontakty okluzyjne na wszystkich materiałach.

Rozmazane lub fałszywe kontakty są dzięki temu znacznie zredukowane.

Metalizowana tylna strona folii pozwala uniknąć pomyłki między stroną niepowleczoną a stroną pokrytą kolorem. Dodatkowo, dzięki metalizacji, folia ma właściwości antystatyczne.

Wstępnie przycięte paski o szerokości 8 mm produktu Arti-Fol® metallic BK 35 w połączeniu z kleszczykami Arti-Fol® BK 145 (patrz strona 61) nadają się szczególnie do sprawdzania kontaktów interproksymalnych podczas zakładania mostów lub koron.

Jako uzupełnienie do Arti-Fol® metallic oferujemy klasyczną folię Shimstock bez kolorowej powłoki w szerokości 8 mm, jak również w szerokości 16 mm. Przygotowany protokół shimstock można pobrać z naszej strony: www.bauschdental.com/downloads

Rolki o szerokości 22 mm |  |  |
Dozwolniki rolkowe do czystego i ekonomicznego dozowania np. do wypełnień, koron i mostów (stomatologia zachowawcza i protetyka)

Rolki o szerokości 75 mm |  |  |
np. do szyn okluzyjnych, protez całkowitych, kontroli całego łuku zębowego w artykulatorze

Arti-Fol® Folia artykulacyjna 8 µm



				REF	
 	22 mm x 20 m			BK 20	BK 1020
	22 mm x 20 m			BK 21	BK 1021
	22 mm x 20 m			BK 22	BK 1022
	22 mm x 20 m			BK 23	BK 1023
	22 mm x 20 m			BK 24	BK 1024
	22 mm x 20 m			BK 25	BK 1025
	22 mm x 20 m			BK 26	BK 1026
	22 mm x 20 m			BK 27	BK 1027
 	75 mm x 20 m			BK 70	
	75 mm x 20 m			BK 71	
	75 mm x 20 m			BK 72	
	75 mm x 20 m			BK 73	
	75 mm x 15 m			BK 74	
	75 mm x 15 m			BK 75	
	75 mm x 15 m			BK 76	
	75 mm x 15 m			BK 77	
 	75 mm	1 x		BK 137	
 	22 mm	1 x		BK 139	

 = zalecane do użytku w gabinetach stomatologicznych

 = zalecane do użytku w laboratoriach

Arti-Fol® Folia artykulacyjna 8 µm



Arti-Fol® Folia artykulacyjna 8 µm

Arti-Fol® 8 µm jest ultracienką folią do testów okluzyjnych, składającą się z folii poliestrowej o grubości 8 µm i jedno- lub dwustronnej kolorowej powłoki.

Cienka kolorowa powłoka składa się z wosków i pigmentów, wzbogaconych o składniki hydrofilowe, dla lepszego znakowania na różnych materiałach.

Folia ta wyróżnia się niewielką grubością materiału i umożliwia dokładne i ostro konturowe odwzorowanie kontaktów okluzyjnych.

Folie artykulacyjne Bausch Arti-Fol® są szczególnie przydatne do odwzorowania statycznej i dynamicznej okluzji w wielu kolorach. W tym celu dostępne są cztery różne kolory, aby reprezentować statyczne i różne funkcjonalne ruchy dynamiczne (protrużja, laterotrużja, mediotrużja boczna).

Różne kolory mogą być również stosowane do koncepcji wax-up w laboratorium.

Rolki o szerokości 22 mm |  |  |

Dozowniki rolkowe do czystego i ekonomicznego dozowania np. do wypełnień, koron i mostów (stomatologia odtwórcza i czynnościowa)

Arti-Fol® Folia artykulacyjna 8 µm w szerokości 75 mm
Folie do badania okluzji dostępne są w czterech kolorach i w szerokości 75 mm. Szerokie folie są stosowane głównie w laboratoriach techniki dentystycznej.

Dla ułatwienia pracy w artykulatorze oferujemy nasz specjalny uchwyt Bauscha Y-Holder BK 140 (patrz strona 59).

Rolki o szerokości 75 mm |  |
np. do szyn okluzyjnych, protez całkowitych, kontroli całego łuku zębowego w artykulatorze



Płyny i spraye


Od lat 80 ubiegłego wieku oferujemy płyny i spraye do dopasowywania uzupełnień protetycznych:

- Arti-Spot® kolor kontaktowy do sprawdzania dokładności dopasowania koron, jest bardzo łatwy w aplikacji
- Arti-Spray® do tego samego celu, puszka w sprayu umożliwia szybkie użycie

Bio-Ink-Flow do oznaczania punktu kontaktów został wprowadzony w 2016 roku.

Dla rozszerzonych badań okluzyjnych w tym samym okresie dodano farbę wskaźnikową Arti-Brux®.

Bausch Arti-Spot® wskaźnik do oznaczania miejsc wysokich

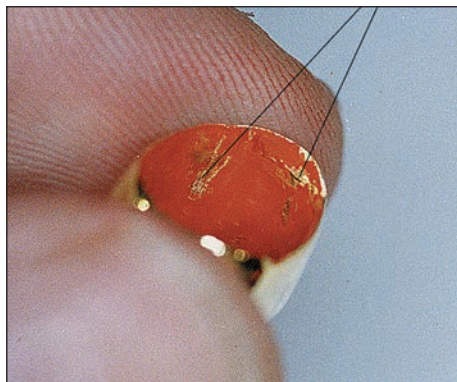

				REF	
	Arti-Spot® 1	15 ml		BK	85
	Arti-Spot® 2	15 ml		BK	86
	Arti-Spot® 3	15 ml		BK	87



= zalecane do użytku w gabinetach stomatologicznych



= zalecane do użytku w laboratoriach

Bausch Arti-Spot® wskaźnik do oznaczania miejsc wysokich



Bausch Arti-Spot® wskaźnik do oznaczania miejsc wysokich

Arti-Spot® to płynny kolor kontaktowy do sprawdzania dokładnego dopasowania koron, wkładów, nakładek, koron teleskopowych, zatrzasków, jak również powierzchni ciernych.

Arti-Spot® nakłada się pędzelkiem na badaną powierzchnię i po kilku sekundach od odparowania rozpuszczalnika pozostawia cienką warstwę o grubości ok. 3 µm. Każdy punkt kontaktu niszczy kolorową warstwę dokładnie w

miejscu kontaktu. Obszar kontaktu jest wtedy wyraźnie widoczny.


Oferujemy trzy różne kolory dla uzyskania kontrastowego obrazu na różnych materiałach.

Arti-Spot® można łatwo usunąć za pomocą ciepłej wody z mechanicznym ścieraniem (szczoteczka do zębów lub szczoteczka interdentalna). Alkohol, alkohol izopropylowy lub strumień pary wodnej rozpuszczą nawet końcowe pozostałości koloru. Arti-Spot® można usunąć z uszczelnionych modeli gipsowych za pomocą delikatnego pędzelka.

Butelka z pędzelkiem |  | 

Precyzyjna aplikacja na badaną powierzchnię (nie stosować bezpośrednio w jamie ustnej) np. na korony, wkłady, nakłady, korony teleskopowe, zatrzaski i powierzchnie cierne

Bausch Arti-Spray® Aerozol okluzyjny

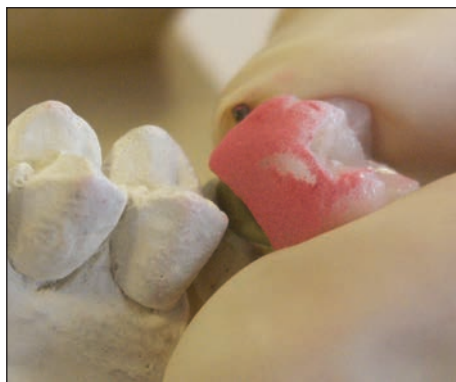

				REF
	Arti-Spray®	75 ml		BK 285
	Arti-Spray®	75 ml		BK 286
	Arti-Spray®	75 ml		BK 287
	Arti-Spray®	75 ml		BK 288



= zalecane do użyciu w gabinetach stomatologicznych



= zalecane do użyciu w laboratoriach

Bausch Arti-Spray® Aerozol okluzyjny



Bausch Arti-Spray® Aerozol okluzyjny

Arti-Spray® to uniwersalny spray do znakowania, dostępny w czterech różnych kolorach, służący do sprawdzania kontaktów zgryzowych, jak również dokładnego dopasowania koron, mostów, protez i protez częściowych.

Arti-Spray® może być precyzyjnie dozowany i tworzy cienką, proszkową warstwę koloru, która jest łatwa do usunięcia za pomocą wody lub strumienia pary wodnej bez pozostawiania śladów. Arti-Spray® jest rozpylany z odległości 3-5 cm na powierzchnię okluzyjną lub wewnętrzną powierzchnię korony lub mostów.

Wszystkie punkty kontaktowe są łatwo rozpoznawalne jako plamy w warstwie barwnej. W razie potrzeby punkty kontaktowe można zaznaczyć kolorowym pisakiem lub folią artykulacyjną Bausch Arti-Fol® w celu dalszej oceny.

Arti-Spray® może być również stosowany do korygowania punktów styčných podczas dopasowywania koron lub mostów.


Pojemnik ze sprayem

BK 285 |

BK 286 | BK 287 | BK 288 | | | MD

Szybka aplikacja na sprawdzaną powierzchnię (bez możliwości bezpośredniej aplikacji wewnętrznej) np. na korony, wkłady, nakłady, korony teleskopowe, zatrzaski i powierzchnie frykcyjne

Bausch Bio-Ink®-Flow marker punktowy

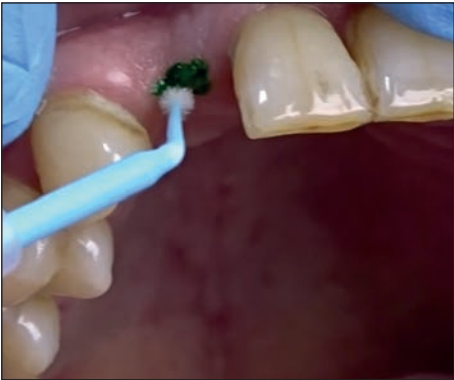

				REF
	Set	1 ml		BK 205
		1 ml		BK 206

 = zalecane do użyciu w gabinetach stomatologicznych

Bausch Bio-Ink®-Flow marker punktowy



Bausch Bio-Ink®-Flow marker punktowy

Bio-Ink®-Flow to zielona, wysoce lepka, łatwa w aplikacji pasta do oznaczania odleżyn na błonie śluzowej i ich identyfikacji na protezie.

Bio-Ink®-Flow może być również stosowany do oznaczania linii AH, brzegów protezy i fałdu przedśionkowego.

Odpowiednie miejsca są oznaczane za pomocą Bio-Ink®-Flow na wcześniej wysuszonej błonie śluzowej. Podczas zakładania suchej protezy kolor nałożony w miejscu zranienia przenosi się na protezę, pokazując miejsce, które należy skorygować.

Strzykawka aplikacyjna z igłą |  |
Zestaw BK 205: zawiera aplikatory jednorazowe, uchwyt do aplikatorów Precyzyjna aplikacja na błonę śluzową

Strzykawka aplikacyjna z igłą |  |
BK 206: Precyzyjna aplikacja na błonę śluzową

Bausch Arti-Brux® Lakier do wizualizacji okluzji



				REF
	Applicator	0,15ml		BK 88
	Set	15 ml		BK 89



= zalecane do użyciu w gabinetach stomatologicznych

Bausch Arti-Brux® Lakier do wizualizacji okluzji



Bausch Arti-Brux® Lakier do wizualizacji okluzji

Arti-Brux® jest czerwoną farbą wskaźnikową do wizualizacji wzorców ruchów na wysoko polerowanych uzupełnieniach protetycznych, jak również na szynach okluzyjnych.

Odporna na ślinę, cienka i równomierna powłoka kolorystyczna umożliwia wizualizację dynamicznej okluzji pacjenta przez dłuższy czas (maks. 24 h). Parafunkcje (bruksizm) mogą być wizualizowane na twardych szynach okluzyjnych lub uzupełnieniach protetycznych. Można również sprawdzić koncepcje okluzji, takie jak prowadzenie kłowe na szynach

Butelka z pędzelkami jednorazowego użytku BK89 |  | Precyzyjna aplikacja na uzupełnieniach protetycznych i szynach okluzyjnych

Jednorazowy aplikator BK 88 |  | Precyzyjna aplikacja na uzupełnieniach, protezach i szynach



Arti-Pink wosk do precyzyjnej rejestracji zgryzu

W 2024 roku wprowadziliśmy wosk Arti-Pink Bite Wax do naszego programu.

Woski do rejestracji zgryzu mają swoją historię sięgającą XIX wieku, kiedy to stomatologia stała się bardziej systematyczna i naukowa. Woski te zostały opracowane w celu określenia dokładnej pozycji zębów i zgryzu pacjenta do prac protetycznych, takich jak korony, mosty czy protezy.

Pomimo nowych materiałów i rozwoju technologii, takich jak silikon, inne materiały do wycisków oraz cyfryzacja, wosk do rejestracji zgryzu pozostaje ważnym i szeroko stosowanym materiałem w stomatologii. Specyficzne właściwości wosku mogą być korzystnie wykorzystywane w szczególnych terapiach leczenia.

Bausch Arti-Pink Bite Wax



				REF
	150 x 80 x 3 mm	12 x		BK 6003
	„L“ 79 x 68 x 3 mm	24 x		BK 6016
	„M“ 68 x 60 x 3 mm	24 x		BK 6017
	„S“ 64 x 56 x 3 mm	24 x		BK 6018

 = zalecane do użyciu w gabinetach stomatologicznych
 = zalecane do użyciu w laboratoriach

Bausch Arti-Pink Bite Wax



Bausch Arti-Pink Bite Wax

Arti-Pink Bite Wax firmy Bausch służy do precyzyjnej rejestracji zgryzu i umożliwia dokładne odwzorowanie konturów zgryzu. Charakteryzuje się doskonałymi właściwościami modelującymi. Ten wyjątkowo twardy wosk o grubości 3 mm jest dostępny nie tylko jako płytka o wymiarach 150 mm x 80 mm, ale także w kształcie owalnym w gotowych rozmiarach S, M i L.

Aby wosk Arti-Pink Bite Wax był gotowy do użytku, należy podgrzać bardzo twardy wosk w gorącej wodzie, aż do osiągnięcia temperatury topnienia ok. 55°C. Dzięki temu można wosk kształtować i jest on gotowy do użycia w celu precyzyjnej profilaktyki zgryzu.

Płytki |  | 

Sprawdzony wosk do rejestracji zwarcia w odbudowach protetycznych, np. w przypadku protez całkowitych i ogólnie do określania relacji szczękowo-żuchwowej.

Kształt owalny |  | 

Sprawdzony wosk do rejestracji zwarcia w prefabrykowanych kształtach owalnych do odbudów protetycznych, np. w przypadku protez całkowitych i ogólnie do określania relacji szczękowo-żuchwowej.



Bausch Fleximeter®-Strips

Już w 1980 roku Fleximeter® został dodany do naszego asortymentu jako pojedynczy instrument silikonowy. Dalszy rozwój do dzisiejszego produktu Fleximeter®-Strips nastąpił w 2002 roku.

Bausch Fleximeter®-Strips



				REF
	1,0 mm	15 x		BK 250
	1,5 mm	15 x		BK 251
	2,0 mm	15 x		BK 252
1,0 mm 1,5 mm 2,0 mm 3 x 5 = 15			  	BK 253
1,0 mm 1,5 mm 2,0 mm 3 x 1 = 3			  	BK 254

 = zalecane do użytku w gabinetach stomatologicznych
 = zalecane do użytku w laboratoriach

Bausch Fleximeter®-Strips



Bausch Fleximeter®-Strips

Fleximeter®-Strips to elastyczne przyrządy wykonane ze sterylizowalnego silikonu o trzech różnych grubościach, służące do określania odległości preparacji uzupełnień.

Fleximeter®-Strips w grubościach 1,0 mm, 1,5 mm i 2,0 mm mogą być stosowane do wykonania rejestracji zgryzu z kontrolowanym jego podniesieniem, np. w przypadku uzębienia abrazyjnego lub szyn okluzyjnych.

Poprzez nałożenie warstwy koloru za pomocą Arti-Spot® lub Arti-Spray®, Fleximeter®-Strips może być użyty do kontroli odległości preparacji. W przypadku zbyt małych odległości preparacji na preparacie widoczne jest kolorowe oznaczenie.

Silikonowe przyrządy |  |  |
Do sprawdzania odległości preparacji



Bausch Instrumenty & Akcesoria

Komfortowe stosowanie naszych produktów do kontroli zgryzu jest znacznie ułatwione dzięki naszym ramkom zgryzowym i pęsetom.

Dostarczamy wysokiej jakości instrumenty, jak również ramki zgryzowe do obustronnej kontroli okluzji lub do użytku jednostronnego.

Kalki Bausch & Pęsety Arti-Fol®



				REF
		1 x		BK 132
		1 x		BK 133
		1 x		BK 142
		1 x		BK 144
		1 x		BK 145

 = zalecane do użytku w gabinetach stomatologicznych

Kalki Bausch & Pęsety Arti-Fol®



Pęsety do kalki Bausch & pęsety Arti-Fol®

Arti-Fol® Pęseta BK 132 |

Dla szczególnie pewnego chwytu naszych kalki artykulacyjnych i folii okluzyjnych polecamy samozaciskowe kleszcze Arti-Fol® BK 132 z wyfrezowanym rowkiem wzdłużnym.

Pęsety do kalki artykulacyjnej typu "Miller" BK 142 |

Pęsety do kalki artykulacyjnej typu "Miller" są wysokiej jakości instrumentem do trzymania różnych rodzajów kalki artykulacyjnej

Arti-Fol® Pęseta "SteriSlide" BK 144 |

Pęsety Bauscha Arti-Fol® "SteriSlide" posiadają wyfrezowany podłużny rowek, który zapewnia doskonały chwyt folien artykulacyjnych. Dodatkowo pęsety te posiadają suwak (pomocnik sterylizacyjny), który może być użyty do utrzymania otwartych pęset podczas procesu sterylizacji.


Arti-Fol® Pęsety do kontaktów okrężnych BK 145 |

Arti-Fol® Pęsety do kontaktów przybliżonych, zaprojektowane przez Dr. Müllera, służą do szybkiego osadzania uzupełnień w przybliżeniu. Innowacyjna i przyjazna dla użytkownika konstrukcja umożliwia znacznie lepszą obsługę w porównaniu z tradycyjnymi metodami. Duża siła zacisku umożliwia trzymanie folii okluzyjnej z dwóch stron

i zapewnia pewne prowadzenie podczas oceny przez lekarza. Folie zakładają się szybko i wygodnie. Instrument nie zawiera żadnych ubytków i może być łatwo dezynfekowany lub sterylizowany wszystkimi znanymi metodami.

Abby dopasować pęsety Arti-Fol® do kontaktów okrężnych, oferujemy Arti-Fol® metallic 12 µm w szerokości 8 mm. Arti-Fol® metallic dzięki wysokiej wytrzymałości na rozciąganie, dobrze widocznym oznaczeniom i niewielkiej grubości jest idealny do sprawdzania kontaktów przybliżonych podczas zakładania mostów lub koron.

Bausch Ramki zgryzowe | Akcesoria

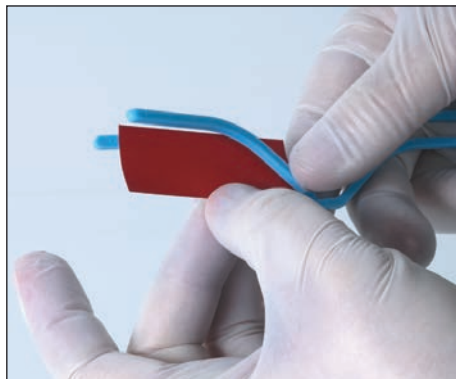

				REF
		1 x		BK 130
		1 x		BK 133
		1 x		BK 140
		5 x		BK 143
				REF
		1 x		BK 137
		1 x		BK 139

 = zalecane do użytku w gabinetach stomatologicznych
 = zalecane do użytku w laboratoriach

Bausch Ramki zgryzowe | Akcesoria



Bausch Ramki zgryzowe

Elastyczne widełki zgryzowe BK 130 (+2x BK 133) |  |
Nasze elastyczne widełki zgryzowe są kombinacją dwóch zakrzywionych kleszczy BK 133 i gumowej rękojeści BK 130. Kleszcze wkłada się po prostu do gumowego uchwytu, a odległość można dopasować do różnych wielkości szczęk.

Fix-Clip® Bite Frame BK 143 |  |
Fix-Clip® Bite Frame to alternatywa dla instrumentów metalowych, służąca do bezpiecznego mocowania cienkich artykulatorów i filmów do testów okluzyjnych. Elastyczny instrument może być sterylizowany.

Bausch Y-Holder BK 140 |  |

Uchwyt Bauscha Y-Holder do folii o szerokości 75 mm lub jedwabiu o szerokości 80 mm. Uchwyt ten jest przeznaczony do zastosowania w artykulatorze.

Akcesoria

Dla naszych szerokich jedwabii i folii dostępny jest akrylowy dyspenser BK 137.

Do kałki i folii o szerokości 22 mm dostępny jest dyspenser z tworzywa sztucznego - numer katalogowy BK 139. Dyspenser ten zawiera zintegrowaną metalową krawędź ząbkowaną.



Dr. Jean Bausch GmbH & Co. KG
Oskar-Schindler-Straße 4
D-50769 Köln - Germany
Tel: +49-221-70936-0
Fax: +49-221-70936-66
info@bauschdental.de
www.bauschdental.de

Bausch Articulating Papers, Inc.
12 Murphy Drive
Nashua, NH 03062, U.S.A.
Tel: +1-603-883-2155
Tel: 888-6-BAUSCH
Fax: +1-603-883-0606
info@bauschdental.com
www.bauschdental.com

Bausch Articulating Papers (Australasia) Pty. Ltd
ABN 73093760402
G.P.O. Box 3733, Sydney NSW 2001, Australia
Tel: +61-2-9345-1945
Fax: +61-2-9345-1955
info@bauschdental.com.au
www.bauschdental.com.au

www.bauschdental.com

Bausch Articulating Papers Japan K. K.
5F, 1-1-31, Nishimidorigaoka
Toyonakashi, Osaka 560-0005 - Japan
Tel: +81 6-6845-0020
Fax: +81 6-6845-0024
E-Mail: info@bauschdental.jp
Web: www.bauschdental.jp

Bausch Importação de Materiais Odontológicos Ltda.
Rua Paulo Eduardo Xavier de Toledo, 379 salas 8 e 9
13304-240 Itu-SP, Brasil
Tel: +55 11 3020-9263
vendas@bauschbrasil.com.br
www.bauschbrasil.com.br

Bausch Articulating Papers Co., Ltd.
#1004, The O Ville B/D, 344, Jong-Ro, Jongno-Gu
Seoul 03114, Korea
Tel: +82 2-2236-0158
Fax: +82 2-6499-9158
info@bauschdental.kr
www.bauschdental.kr

