



Bausch

WE MAKE OCCLUSION VISIBLE

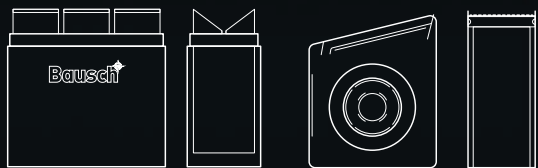

АРТИКУЛЯЦИОННЫЕ И ОККЛЮ-
ЗИОННЫЕ ТЕСТОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ

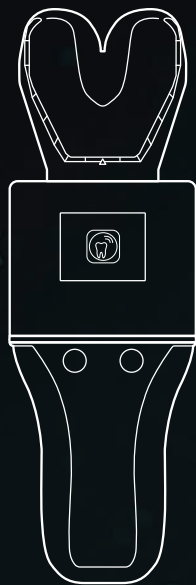





Bausch – мы делаем окклюзию видимой.

Стоматологи д-р. Jean Bausch и д-р. Hans Bausch, основатели компании, поняли о необходимости разработки чувствительной к давлению артикуляционной бумаги для максимально точной визуализации окклюзии.

С 1953 года компания д-р. Jean Bausch GmbH & Co. KG специализируется на производстве артикуляционной бумаги с высокоточной передачей цвета, с помощью которого можно определить окклюзию зубов. Проверенным продуктом ВК 01 была артикуляционная бумага U, которая показывает степень жевательного давления зубов при накусывании.



Артикуляционная копрка является единственным продуктом, который позволяет представить жевательную силу разной интенсивности в виде цветных изображений, оттенки которых зависят от величины нагрузки. Этот принцип прогрессивной передачи цвета остается важным методом для точного обнаружения суперконтактов.

Точная передача цвета на таких поверхностях, как керамика, акрил или металл, является нашим главным приоритетом.

Таким образом, был разработан широкий ассортимент материалов в виде копирок для артикуляции и окклюзии различной толщины, формы и цвета, что делает нас одним из ведущих мировых производителей. Будучи семейным предприятием во втором поколении, мы продолжим фокусироваться на инновациях и последовательном совершенствовании продукции. По-



этому 2019 на выставке Кельна, мы представили новую систему цифрового контроля окклюзии OccluSense.

Г-жа Evelyn Bausch, жена доктора Hans Bausch, присоединилась к компании в 1961 году.

С 1998 года André и Peter Bausch (сыновья д-ра Hans Bausch и Evelyn Bausch) являются управляющими директорами компании Dr. Jean Bausch GmbH & Co. KG.

Вся наша продукция производится в строгом соответствии с Европейским регламентом по медицинским изделиям, под постоянным контролем нашей команды по обеспечению качества в соответствии с DIN EN ISO 13485.

Эта брошюра предназначена, прежде всего, для профессиональных пользователей, чтобы помочь им выбрать правильный материал для соответствующей цели.




- 1953 - Основание компании в Кёльне и первой артикуляционной бумагой с прогрессивной цветопередачей
- 1962 - Первое участие в IDS в Кёльне
- 1972 - Выпуск микротонкой окклюзионной бумаги толщиной 40 мкм
- 1974 - Производство переносится в Рейнланд-Пфальц
- Выпуск подковообразной бумаги
- 1979 - IDS Дюссельдорф : Выход на рынок Arti-Fol®
- Учреждение компании Bausch Dental Co. of America в качестве представителя
- 1983 - IDS Мюнхен: Arti-Fol®, 8 мкм в 4 цветах
- 1986 - IDS Кельн: Arti-Spot® высокоточное копирка
- 1994 - Основание компании Bausch Articulating Papers (Bausch Артикуляционные бумаги), Inc. в Нашуа, штат Нью-Гэмпшир, США
- 1999 - IDS Кельн: Arti-Fol® металлический 12 мкм
- 2003 - Основание компании Bausch Articulating Papers (Australasia) Pty. Ltd в Сиднее, Австралия
- 2007 - Основание компании (Bausch Артикуляционные бумаги) Bausch Articulating Papers Japan K.K. в Осаке, Япония
- Основание компании Bausch Importação de Materiais Odontológicos Ltda. в Сан-Паулу, Бразилия
- 2009 - Расширение производственных площадей в Рейнланд-Пфальце, Германия
- 2017 - IDS Кельн: Презентация системы OccluSense® (Окклюденс) с датчиком давления с цветным покрытием
- 2019 - IDS Кельн: Вывод на рынок OccluSense (Окклюденс)®
- 2020 - Расширение производственного здания и учебных помещений в Кельне
- 2021 - Основание компании Bausch Articulating Papers Co. Ltd. в Сеуле, Корея

Содержание

Окклюзия – Влияние-Эффекты Точное обнаружение высоких точек	6
Материалы для исследования артикуляции и окклюзии Bausch Обзор толщин	8
OccluSense® - Цифровой контроль окклюзии	12
Принцип прогрессивной передачи цвета	16
Проверка окклюзии 2-этапным методом	18
Артикуляционная и окклюзионная бумага/Артикуляционный шелк	20
Артикуляционная бумага с прогрессивным переносом цвета 200 мкм	22
Артикуляционная бумага с прогрессивным переносом цвета 100 мкм	24
Arti-Ceram Артикуляционная бумага зеленого цвета 200 мкм и 100 мкм	26
Артикуляционный шелк с прогрессивной цветопередачей 80 мкм	28
Артикуляционная бумага Bausch Arti-Check® микротонкая 40 мкм	30
Тестовые пленки для окклюзии Bausch	32
Bausch Arti-Fol®металлизирующая пленка Shimstock 12 мкм черный/красный	
Bausch Arti-Fol® металл Complete 12 мкм черный/красный	34
Bausch Arti-Fol® металлизированная пленка Shimstock 12 мкм	36
Bausch Arti-Fol® Артикуляционная пленка 8 мкм	38
Жидкости и спреи	40
Bausch Arti-Spot® Highspot индикатор	42
Bausch Arti-Spray® Окклюзионный спрей	44
Bausch Bio-Ink®-Flow Индикатор для болевых точек	46
Bausch Arti-Bruh® Окклюзионная индикаторная краска	48
Arti-Pink воск для регистрации прикуса	50
Bausch Fleximeter®-Strips	54
Bausch Инструменты и аксессуары	58
Bausch бумага & пинцет Arti-Fol®	60
Оправы для прикусов Bausch Аксессуары	62

Окклюзия, Воспаление, Эффекты

Краниомандибулярная дисфункция

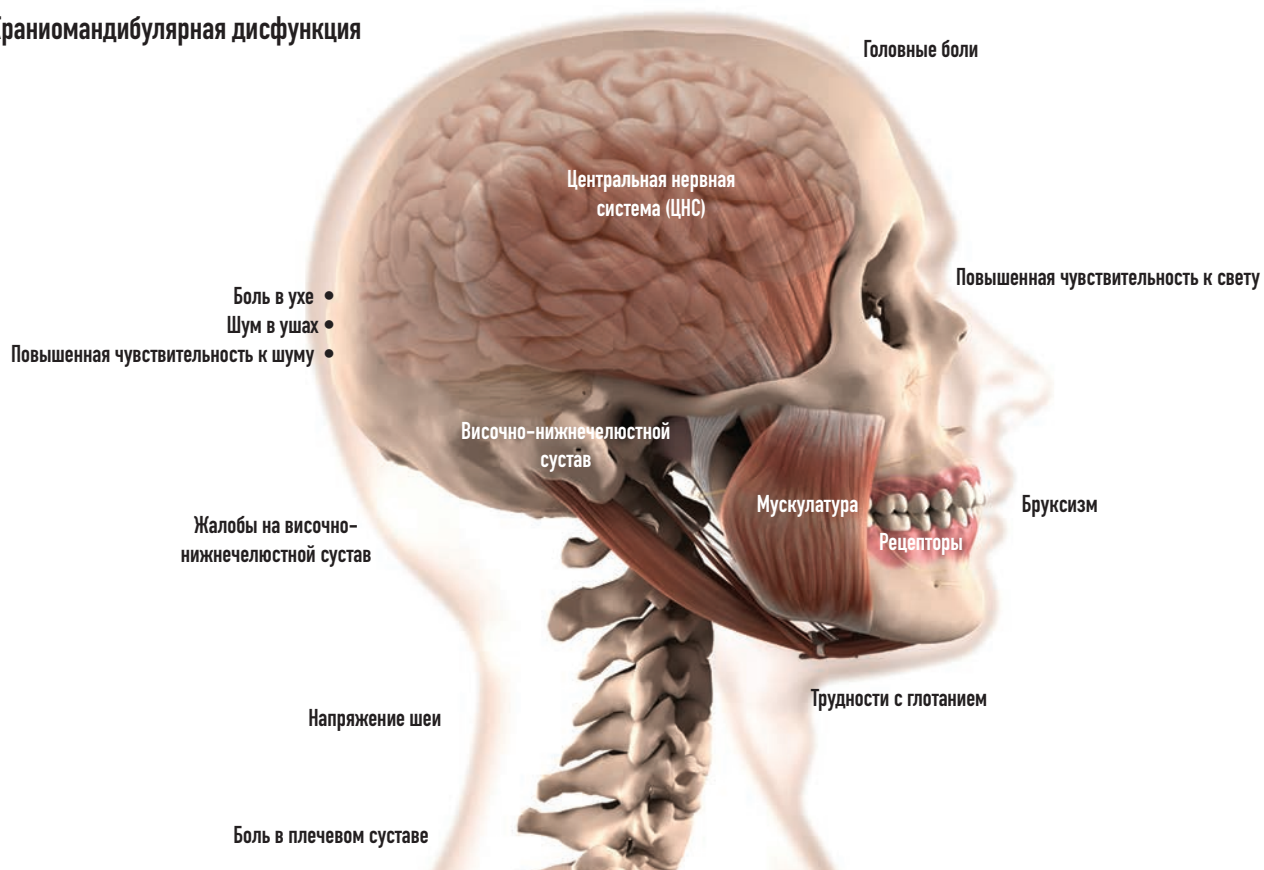

Точное обнаружение преждевременных контактов.

Под окклюзией понимается любой контакт между зубами верхней и нижней челюстей.

Окклюзия является частью стоматогнатической системы, которая представляет собой анатомическую единицу височно-нижнечелюстного сустава, жевательных мышц, чувствительных нервов, рецепторов давления и центральной нервной системы.

Каждая реставрация, удаление или протезирование, а также ортодонтическое лечение изменяют статическую и динамическую окклюзию и, таким образом, могут повлиять на анатомию в целом.

В связи с этим компания Vausch поставила перед собой цель разработать продукты для окклюзионных тестов для профессионального пользователя, чтобы добиться восстановления индивидуальной физиологической окклюзии каждого пациента.

Поэтому следует учитывать не только контроль статической окклюзии (контакт зубов без перемещения нижней челюсти), но и динамические движения.

Динамические движения, т.е. контакт зубов в результате движения нижней челюсти, дифференцируются на вертикальные, сагитальные и трансверсальные.

Пленки толщиной 8 мкм и 12 мкм в различных цветах предназначены для проверки статистических и дина-

мических движений по всей зубной дуге.

Например могут быть использованы:

Черный	для статического движения
красный	для латеротрузии
Зеленый	для медиотрузии
Синий	цвет можно использовать для

переднего движения нижней челюсти.

Изменение привычного прикуса, т.е. привычно принятая статическая окклюзия, может привести к изменению нервно-мышечного тонуса, что, в свою очередь, может спровоцировать адаптированную сдержанную позу и проявиться как краниомандибулярной дисфункцией.

Взаимодействие вышеперечисленных факторов наглядно показано на схеме.

В науке разработаны различные концепции окклюзии, которые могут служить шаблоном для реконструкции окклюзии. Однако их следует понимать только как модели, так как не существует такого понятия, как «одна окклюзия». Скорее, основное внимание должно быть сосредоточено на индивидуальной окклюзии с учетом биомеханических условий каждого пациента во время лечения.

Сознательное и разумное использование различных бумаг и пленок разной толщины может обеспечить то, что важные мешающие контакты не будут упущены из-за оптического невидения.

Артикуляционные бумаги Vausch толщиной 100 мкм и 200 мкм с прогрессивным переносом цвета применяются для общей локализации статических точек контакта, поскольку они отмечают любой материал и устойчивы к слюне. Их можно использовать как в стоматологической клинике, так и в зуботехнической лаборатории.

В группу артикуляционных бумаг также входят артикуляционные бумаги Arti-Check® толщиной 40 мкм. Бумага является очень тонкой и, в то же время, прочной бумагой, которая с обеих сторон покрыта жидкой краской. Малая толщина этой бумаги исключает получение ложных или смазанных контактных пунктов и обеспечивает точные, четкие цветные отпечатки. Покрытие с особенной степенью надёжности выявляет все окклюзионные контакты даже на смоченных слюной золотых, керамических, полированных металлических или пластмассовых поверхностях.

Для учета мышечного аспекта, который оказывает существенное влияние на окклюзию, была разработана система OccluSense® для цифрового контроля окклюзии. Эта система позволяет стоматологу оценивать распределение силы жевания по всей зубной дуге в динамике.

Она обеспечивает возможность измерения и анализа нагрузки на зубы в разные моменты времени. Важна для предотвращения мешающих контактов и избегания связанных с этим расстройств височно-нижнечелюстного сустава.

	200 мкм	синяя	пропитанная	двусторонняя	200 мкм бумага
	200 мкм	красная	пропитанная	двусторонняя	200 мкм бумага
	100 мкм	синяя	пропитанная	двусторонняя	100 мкм бумага
	100 мкм	красная	пропитанная	двусторонняя	100 мкм бумага
	200 мкм	зеленая	пропитанная	двусторонняя	200 мкм бумага
	100 мкм	зеленая	пропитанная	двусторонняя	100 мкм бумага
	80 мкм	синий	пропитанный	двусторонний	80 мкм шелк
	80 мкм	красный	пропитанный	двусторонний	80 мкм шелк
	80 мкм	зеленый	пропитанный	двусторонний	80 мкм шелк
	40 мкм	синяя/синяя	покрытая	двусторонняя	бумага 20 мкм + 10 мкм + 10 мкм покрытие
	40 мкм	красная/красная	покрытая	двусторонняя	бумага 20 мкм + 10 мкм + 10 мкм покрытие
	40 мкм	синяя/красная	покрытая	двусторонняя	бумага 20 мкм + 10 мкм + 10 мкм покрытие
	12 мкм	черная/красная	покрытая	двусторонняя	пленка 12 мкм + 6 мкм + 6 мкм покрытие
	12 мкм	черная	покрытая	односторонняя	пленка 12 мкм + 6 мкм покрытие
	12 мкм	красная	покрытая	односторонняя	пленка 12 мкм + 6 мкм покрытие
	12 мкм	зеленая	покрытая	односторонняя	пленка 12 мкм + 6 мкм покрытие
	12 мкм	синяя	покрытая	односторонняя	пленка 12 мкм + 6 мкм покрытие
	12 мкм	без покрытия	непокрытая	-	пленка 12 мкм без покрытия
	8 мкм	черная	покрытая	односторонняя	пленка 8 мкм + 6 мкм покрытие
	8 мкм	красная	покрытая	односторонняя	пленка 8 мкм + 6 мкм покрытие
	8 мкм	зеленая	покрытая	односторонняя	пленка 8 мкм + 6 мкм покрытие
	8 мкм	синяя	покрытая	односторонняя	пленка 8 мкм + 6 мкм покрытие
	8 мкм	черная	покрытая	двусторонняя	пленка 8 мкм + 6 мкм + 6 мкм покрытие
	8 мкм	красная	покрытая	двусторонняя	пленка 8 мкм + 6 мкм + 6 мкм покрытие
	8 мкм	зеленая	покрытая	двусторонняя	пленка 8 мкм + 6 мкм + 6 мкм покрытие
	8 мкм	синяя	покрытая	двусторонняя	пленка 8 мкм + 6 мкм + 6 мкм покрытие

Bausch Артикуляционные и Оклюзионные Тестовые Материалы.

С 1953 года мы специализируемся на производстве артикуляционных и окклюзионных тестовых материалов и являемся неотъемлемой составляющей стоматологии.

С течением времени мы расширили наш ассортимент продукции в соответствии с потребностями наших профессиональных пользователей, а также новыми методами лечения и зубными материалами.

В начале 1970-х годов мы предложили более тонкие бумаги с толщиной всего 40 мкм в дополнение к проверенным артикуляционным бумагам и шелкам.

В том же десятилетии возник концепт гнатологии в стоматологии, который в настоящее время представляет собой область функциональной диагностики. Для этого концепта требовались более тонкие диагностические копирки. С тех пор мы предлагаем прочные, тонкие и точные пленки разных цветов и толщин.

Кроме того, доступны жидкие контактные краски, а также окклюзионные спреи и другие индикаторы цвета.

На Международной стоматологической выставке IDS 2019 мы представили систему OccluSense®, которая добавляет цифровую опцию к классическим материалам для тестирования окклюзии.



Артикуляционные бумаги 200 мкм



- Прогрессивный перенос цвета
- Хорошо маркируется на влажных окклюзионных поверхностях
- Видимые отметки на керамике
- Перенос цвета при давлении
- Для проверки статической окклюзии
- Обширные, четко видимые маркировки
- Мягкий микрофлис хорошо адаптируется к окклюзионной поверхности
- Для начального контроля предварительных контактов
- Подходит для всех материалов



Артикуляционные бумаги 100 мкм



- Прогрессивный перенос цвета
- Хорошо маркируется на влажных окклюзионных поверхностях
- Видимые отметки на керамике
- Перенос цвета под давлением
- Для проверки статической и динамической окклюзии
- Высокоточные, четко видимые маркировки
- Очень мягкий, прочный микрофлис
- Хорошо адаптируется к окклюзионной поверхности
- Для начального контроля предварительных контактов
- Подходит для всех материалов



Arti-Ceram 200 мкм | 100 мкм



- Прогрессивная передача цвета
- Хорошо оставляет следы на влажных окклюзионных поверхностях
- Видимые метки на керамических материалах CAD/CAM
- Перенос цвета под давлением
- Для проверки статической окклюзии (200 мкм)
- Для проверки статической и динамической окклюзии (100 мкм)
- Обширная, хорошо видимая маркировка
- Мягкий микрофлисовый материал – хорошо приспособливается к окклюзионной поверхности (200 мкм)
- Очень мягкий, прочный на разрыв микрофлис (100 мкм)
- Для первичного контроля преждевременных контактов
- Подходит для всех материалов



Артикуляционный шелк 80 мкм



- Прогрессивный перенос цвета
- Хорошо маркируется на влажных окклюзионных поверхностях
- Видимые отметки на керамике
- Перенос цвета под давлением
- Для проверки статической и динамической окклюзии
- Высокоточные, четко видимые маркировки
- Очень мягкий, прочный шелковый материал хорошо адаптируется к окклюзионной поверхности
- Для начального контроля предварительных контактов
- Подходит для всех материалов
- Рекомендуется для техники Герберта



Артикуляционные бумаги 40 мкм



- Хорошо маркируется на влажных окклюзионных поверхностях
- Видимые отметки на керамике
- Перенос цвета под давлением и воздействием
- Для проверки статической и динамической окклюзии
- Высокоточные, четко видимые маркировки
- Очень тонкая бумага
- Подходит для всех материалов
- Точно маркирует окклюзионные контакты



Arti-Fol® металлическая 12 мкм



- Ультратонкая металлизированная пленка
- Точно маркирует все точки контакта
- Отсутствие размазывания контактов
- Передача цвета при ударе
- Антистатическая
- Высокоточные контакты
- Хорошо приспосабливается к окклюзионной поверхности
- Подходит для всех материалов
- Не рвется даже при растяжении
- Хорошо маркируется на сухих, керамических материалах
- Также доступна в варианте без покрытия (пленка для шимстока)
- Также доступна в виде рулона шириной 75 мм



Arti-Fol® 8 мкм




- Ультратонкая пленка
- Точно маркирует все точки контакта
- Отсутствие размазывания контактов
- Передача цвета при ударе
- Высокоточные контакты
- Хорошо приспосабливается к окклюзионной поверхности
- Подходит для всех материалов
- Не рвется даже при растяжении
- Также доступна в виде рулона шириной 75 мм
- Покрытие может быть нанесено с одной или двух сторон



OccluSense® 60 мкм

- Визуализация жевательных сил, видимых на зубах и в цифровом формате в виде столбчатой диаграммы.
- Вертикальные или плоские отношения между буграми и ямками визуализируются разными цветами столбцов
- Улучшенная оценка окклюзии в статической и динамической фазах
- Визуализация аксиальных сил на имплантатоспособных реконструкциях и на протезах
- Обнаружение предварительных контактов
- Улучшенное взаимодействие с пациентом и предоставление информации
- Электронный датчик давления: тонкая, гибкая и цветная пленка толщиной 60 мкм
- Представление распределения жевательной силы в процентах
- Легкая документация с использованием приложения для OccluSense®-iPad-App

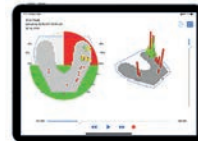



CELLERANT
BEST OF CLASS
TECHNOLOGY AWARD
2019



Bausch OccluSense® – Цифровой контроль окклюзии

Стремление к визуализации точного представления окклюзионных контактов было одним из основных требований, которые мы предъявили себе при разработке OccluSense®. Окклюзионный сенсор OccluSense®, окрашенный в разные цвета, обладает способностью ясно и выборочно маркировать, так же, как проверенные и надежные артикуляционные бумаги и пленки.


OccluSense® не просто отображает окклюзионный контакт в статике и динамике, но также записывает временное развитие до завершения окклюзионного движения.

Интерпретация окклюзионного давления, записанного OccluSense®, отличается от классических материалов для тестирования окклюзии в том смысле, что предоставляется больше информации более эффективным способом. Эта информация включает запись окклюзионных контактов во время движения нижней челюсти от начального контакта до максимальной межзубной позиции. OccluSense® от Bausch позволяет каждому стоматологу записывать эти окклюзионные соотношения и оценивать их пошагово.

Наша система OccluSense® была удостоена награды Cellerant Best of Class Technology Award на конгрессе ADA/FDI 2019 в Сан-Франциско, Калифорния, США

На конкурсе 2021 OE-A, организованном Ассоциацией органической и печатной электроники (OE-A), наша система OccluSense® была признана победителем в категории «Новые продукты».

Для получения дополнительной информации о системе OccluSense® посетите: www.occlusense.com

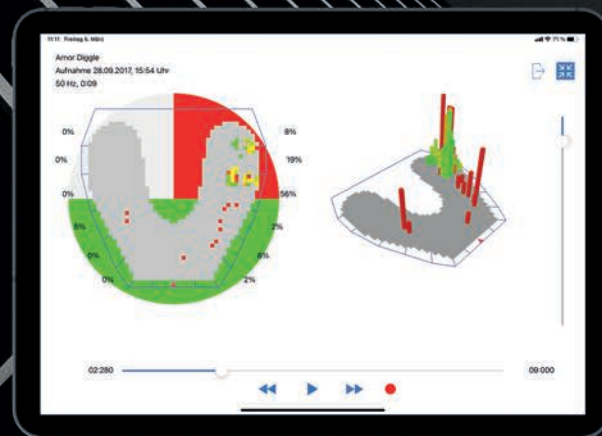



Цифровой контроль окклюзии в рамках подхода к холистической терапии

Новый, удостоенный наград и удобный в использовании продукт OccluSense® от Bausch объединяет традиционную и цифровую запись распределения жевательного давления на окклюзионных поверхностях.

Устройство OccluSense® с его одноразовым датчиком давления толщиной 60 мкм с красным цветным покрытием используется точно так же, как обычные пленки для тестирования окклюзии и предлагает следующие функции продукта:

- Проверка окклюзии по всей зубной дуге
- Представление хронологии распределения жевательного давления
- Представление процентного распределения жевательного давления

- Представление боковых движений и возможных вмешательств в положении медиотрузии
- Аналоговая и цифровая демонстрация окклюзионного статуса
- Визуальная документация этапов лечения с помощью сравнения до и после
- Может использоваться, например, для сплнт терапии, протезирование после имплантации, больших реставраций, а также для остеопатии и физиотерапевтических процедур

Система OccluSense® включает:

Ручной датчик OccluSense®

Ручное устройство с питанием от батареи для сбора данных вставленного датчика давления.

Зарядное устройство OccluSense®

Индукционное зарядное устройство для беспроводной зарядки.

Электронный датчик давления OccluSense®


- Толщиной 60 мкм
- Гибкий
- Красное цветное покрытие
- Предоставляет запись условий окклюзионного давления в 256 уровнях
- Для проверки как статической, так и динамической окклюзии

OccluSense® CenterFix Центрирующее устройство BK 5040

Дополнительная информация о системе OccluSense® доступна на сайте www.occlusense.com

				REF
		Set		BK 5000
	L	25 x	==	BK 5025
	XL	25 x	==	BK 5035
		10 x	●	BK 5040


Принцип постепенного перехода цвета

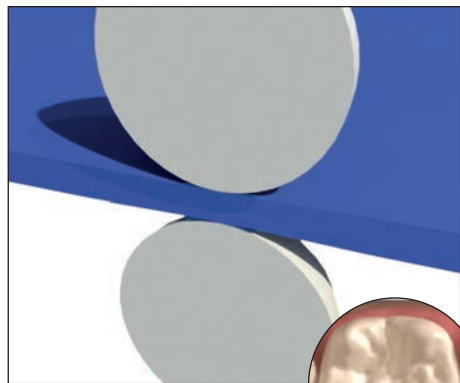

Низкое давление


Физиологический окклюзионный контакт можно обнаружить с использованием принципа постепенного перехода цвета.

Такие отметки не являются мешающими точками контакта.

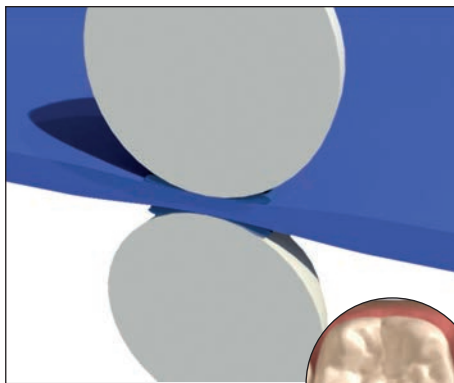

Среднее давление

При повышенном жевательном давлении из материала выделяется больше цвета, и приближающиеся точки контакта становятся видимыми более темным цветом. Результат - отметка, характерная для наших продуктов с постепенным тестированием: выдавленный цвет создает круг вокруг точки контакта.

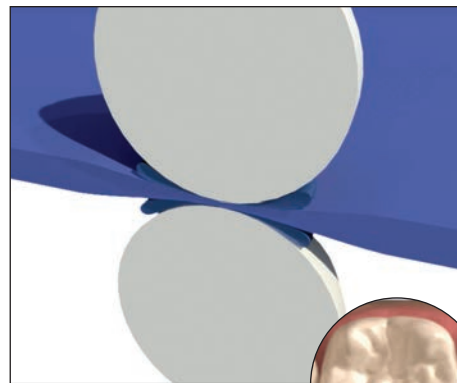

Максимальное давление

В случае максимальной межзубной позиции или мешающего контакта этот эффект становится еще более заметным, поскольку в центре отметки фактическая точка контакта практически не имеет цвета, но обводится темным кольцом.

Принцип постепенного перехода цвета



Артикуляционная бумага 200 мкм, «PROGRESS 100» 100 мкм, Arti-Ceram 200 мкм и 100 мкм, а также артикуляционный шелк 80 мкм обладают свойством прогрессивной передачи цвета.



Бумага и шелк для артикуляции Bausch с прогрессивным переносом цвета подходят для отображения статической окклюзии.

Пористая структура мягкой микрофлисовой бумаги или соответствующего шелка сохраняет цвет, который выдавливается при нажатии. Используя эти продукты, можно выявить контакты между зубами.

Прогрессивный цветной перенос в данном контексте означает, что при увеличении жевательной силы из материала выдавливается больше цвета и передается на окклюзионные поверхности.


Связывающее вещество Transculase®, содержащееся в цветной формуле, обеспечивает лучшую адгезию цвета к различным материалам и естественным зубам. Сверхчувствительная артикуляционная бумага обеспечивает точную визуализацию распределения жевательного давления.

Наши прогрессивные копирки идеально подходят для окклюзионных поверхностей, покрытых слюной.

Для точного отображения окклюзионных контактов рекомендуется использовать комбинацию различных тестовых копирок.



Проверка окклюзии с использованием двухэтапного метода

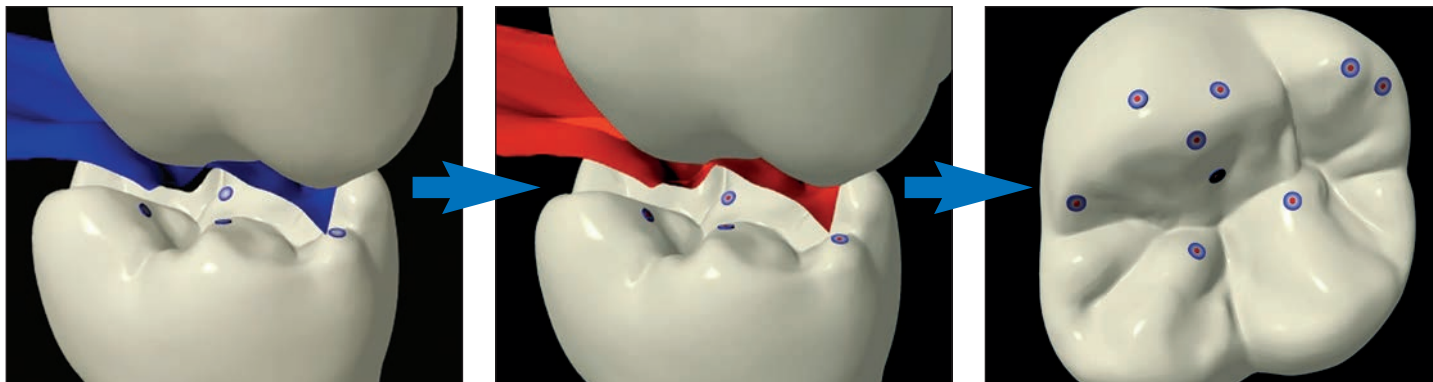

Для визуализации контактов на поверхностях, покрытой слюной, рекомендуется использовать прогрессивные копирики в сочетании с тонкими фольгами.

На первом этапе окклюзию следует проверить с использованием артикуляционной бумаги 200 мкм или "PROGRESS 100" 100 мкм. Эти бумаги впитывают слюну и создают отличную основу для точной маркировки

точек контакта с металлической фольгой Arti-Fol® 12 мкм или Arti-Fol® 8 мкм на втором этапе.

Преимущества этого двухэтапного метода включают:

- Дифференцированное отображение окклюзионных точек и поверхностей
- Контрастное представление с использованием разных цветов

• Улучшенный цветной перенос окклюзионных пленок на поверхности, подвергнутые воздействию слюны, за счет предварительного переноса связывающего агента Transculase®.



Бумаги для артикуляции и окклюзии Bausch

Артикуляционные шелки Bausch

В 1953 году наша компания начала свою деятельность с производства бумаги для артикуляции с инновационным цветным переносом.

Незадолго до этого были разработаны артикуляционные шелки толщиной 80 мкм, которые до сих пор используются для контроля окклюзии, в основном в стоматологических лабораториях.

В 1972 году к нашему ассортименту были добавлены микротонкие 40 мкм окклюзионные бумаги Bausch.

Продукт PROGRESS 100, артикуляционная бумага с прогрессивным цветным переносом толщиной 100 мкм, был представлен в 2000 году.

Бумага для артикуляции с прогрессивным переносом цвета 200мкм



				REF
	52 mm x 18 mm	300 x		BK 01
	52 mm x 18 mm	300 x		BK 1001 
	52 mm x 18 mm	300 x		BK 02
	52 mm x 18 mm	300 x		BK 1002 
		50 x		BK 03
		50 x		BK 04
	52 mm x 18 mm	300 x		BK 05

-  = Экологически чистый многоразовый пакет
-  = Рекомендуется для использования в стоматологических кабинетах
-  = рекомендуется для использования в лабораторных условиях

Бумага для артикуляции с прогрессивным переносом цвета 200мкм



Бумага для артикуляции Bausch с прогрессивным переносом цвета толщиной 200 мкм

Бумага для артикуляции Bausch с прогрессивным цветным переносом толщиной 200 мкм позволяет определить различные окклюзионные силы с помощью различных оттенков цвета, в зависимости от жевательного давления:

НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ – светлая маркировка

СРЕДНЕЕ ДАВЛЕНИЕ – более темная маркировка

МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ – темное кольцо цвета во круг окклюзионного контакта

Стоматолог получает точное представление о распределении жевательного давления. Преждевременные контакты становятся видимыми.

Полосы |  | 

например, для пломб, коронок и мостов (реставрационная и функциональная стоматология)

Форма подковы |  | 

например, для окклюзионных сплнтов, полных зубных протезов, проверки всей зубной дуги в артикуляторе и в полости рта

Бумага для артикуляции Bausch PROGRESS 100 толщиной 100 мкм



				REF	
	52 mm x 18 mm	300 x		BK	51
	52 mm x 18 mm	300 x		BK	52
		50 x		BK	53
		50 x		BK	54
	52 mm x 20 mm	50 x		BK	57
	52 mm x 20 mm	50 x		BK	58



= Рекомендуется для использования в стоматологических кабинетах



= рекомендуется для использования в лабораторных условиях

Бумага для артикуляции Bausch PROGRESS 100 толщиной 100 мкм



Бумага для артикуляции Bausch PROGRESS 100 толщиной 100 мкм

Эта мягкая бумага с волокнами обладает высокой цветопередающей способностью и точно адаптируется к окклюзионной поверхности.

Благодаря своей способности прогрессивного цветного переноса она точно маркирует точки окклюзионного контакта.

Уникальное сочетание с агентом связывания Transculase® и тонкой бумагой точно показывает окклюзионные контакты и поверхности на высокополированных материалах, таких как металлические сплавы и керамические материалы.

Форма подковы могут применяться |  |  | для окклюзионных сплнтов, полных и частично съемных протезов, проверки всей дентальной дуги как в артикуляторе, так и в полости рта

Полосы применяются |  |  | например, для пломб, коронок и мостов (реставрационная и функциональная стоматология)

Arti-Ceram Артикуляционная бумага зеленого цвета 200 мкм и 100 мкм



				
Arti-Ceram 200µm				
	52 mm x 20 mm	50 x		BK 92
		50 x		BK 93
Arti-Ceram 100µm				
	52 mm x 20 mm	50 x		BK 97
		50 x		BK 98

 = Рекомендуется для использования в стоматологических кабинетах

 = рекомендуется для использования в лабораторных условиях

Arti-Ceram Артикуляционная бумага зеленого цвета 200 мкм и 100 мкм



Bausch Arti-Ceram Артикуляционная бумага зеленого цвета 200 мкм и 100 мкм

Для достижения оптимального, естественного цвета зубов, доступны различные типы керамики, такие как стеклокерамика, циркониевая керамика и фельдшпатовая керамика. Эти материалы используются для (временных) коронок, а также для вкладок и накладок и являются высокополированными для лучшей эстетики. И часто производятся с использованием технологий CAD/CAM. Однако для стоматологов возникают сложности при определении окклюзии. Поскольку традиционные материалы для проверки окклюзии часто неэффективны.

Чтобы можно было эффективно определять преждевременные контакты, мы интенсивно занимались этой проблемой и решились на проверенный ЗЕЛЕНый цвет, который был утвержден в стоматологической технологии десятилетиями. Этот цвет благодаря особым красителям, четко виден и контрастен на эстетически высокополированных поверхностях керамических материалов. Наш продукт Arti-Ceram доступен в двух толщинах, 200 мкм и 100 мкм, в виде полосок и в форме подковы, и обеспечивает точное определение окклюзии и обеспечивает наилучшей возможной функциональности и эстетики.

Полосы |  |
для пломб, коронок и мостов (реставрационная и функциональная стоматология)

Форма подковы |  |
для окклюзионных сплнтов, полных зубных протезов, проверки всей зубной дуги в артикуляторе и в полости рта

Артикуляционный шелк с прогрессивным цветным переносом 80мкм



			REF
	80 mm x 3 m		BK 06
	80 mm x 3 m		BK 876
	80 mm x 3 m		BK 877
	16 mm x 10 m		BK 07
	16 mm x 10 m		BK 08

 = Рекомендуется для использования в стоматологических кабинетах

 = рекомендуется для использования в лабораторных условиях

Артикуляционный шелк с прогрессивным цветным переносом 80 мкм



Артикуляционный шелк Bausch с прогрессивным цветным переносом толщиной 80 мкм

Артикуляционный шелк Bausch - это высококачественный текстильный продукт, обладающий свойствами, сравнимыми с артикуляционной бумагой с прогрессивным цветным переносом толщиной 200 мкм. Ткань устойчива к разрыву и благодаря своей низкой толщине и гибкости идеально адаптируется к буграм и фиссурам.

Маркировка артикуляционного шелка чрезвычайно точна и имеет насыщенный цвет.

На протяжении десятилетий артикуляционный шелк доказал свою эффективность при тестировании окклюзионных поверхностей как в стоматологии, так и в зубной технике.

Рулоны например |  |  |

могут применяться для окклюзионных сплинтов, полных зубных протезов, проверки всей зубной дуги в артикуляторе и в полости рта.

Микротонкие бумаги для артикуляции Bausch Arti-Check® 40 мкм



				REF	
	103 mm x 20 mm	200 x		BK 09	
	103 mm x 20 mm	200 x		BK 10	
	100 mm x 70 mm	100 x		BK 11	
	100 mm x 70 mm	100 x		BK 12	
	16 mm x 15 m			BK 13	BK 1013
	16 mm x 15 m			BK 14	BK 1014
	22 mm x 10 m			BK 15	BK 1015
	22 mm x 10 m			BK 16	BK 1016
		150 x		BK 17	
		150 x		BK 18	
	52 mm x 20 mm	200 x		BK 61	
	52 mm x 20 mm	200 x		BK 62	
	52 mm x 20 mm	200 x		BK 63	
	103 mm x 20 mm	200 x		BK 80	
		150 x		BK 81	

 = Экологически чистый многоцветный пакет

 = Рекомендуется для использования в стоматологических кабинетах

 = рекомендуется для использования в лабораторных условиях

Микротонкие бумаги для артикуляции Bausch Arti-Check® 40 мкм



Микротонкие бумаги для артикуляции Bausch Arti-Check® 40 мкм

Бумаги для артикуляции Bausch толщиной 40 мкм представляют собой микро-тонкие бумаги, покрытые с обеих сторон жидкими красителями. Благодаря своей низкой толщине материала эти бумаги обеспечивают чрезвычайно точную маркировку. В результате этого ложные или размазанные контакты значительно сокращаются.

Специальное покрытие жидкими красителями обеспечивает четкую маркировку всех окклюзионных контактов, даже на материалах таких, как керамика,

металлические сплавы, акрил и окклюзионные поверхности, подвергнутые воздействию слюны.

Специальное покрытие состоит из множества маленьких микрокапсул, заполненных краской. Даже небольшое жевательное давление вызовет разрыв этих капсул и высвобождение краски, что приведет к четко видимым меткам. Также возможно многократное нанесение маркировки, поскольку покрытие обладает высоким объемом запаса краски.

Bausch Arti-Check® микро-тонкие ВК 63, ВК 80 и ВК 81 (двухцветная) очень хорошо подходят для представления статической и динамической окклюзии.

Листы | 

для окклюзионных сплинтов, полных зубных протезов,

проверки всей зубной дуги в артикуляторе

Форма подковы |  | 

для окклюзионных сплинтов, полных зубных протезов, проверки всей зубной дуги в артикуляторе и в полости рта

Полосы |  | 

для пломб, коронок и мостов (реставрационная и функциональная стоматология)

Рулоны |  | 

Диспенсеры для рулонов для чистого и экономичного распределения, например, для пломб, коронок и мостов (реставрационная и функциональная стоматология)



Окклюзионная тестовая пленка Bausch

В 1970-х годах гнатология стала важной частью стоматологии. Чтобы удовлетворить потребности специалистов в области функциональной диагностики, мы добавили тонкие пленки для окклюзии в наш ассортимент продукции в 1979 году.

В 1983 году была представлена Arti-Fol® 8 мкм в четырех различных цветах. Эти пленки доступны с одно- или двусторонним цветным покрытием.

В 1999 году ассортимент наших пленок был расширен за счет включения Arti-Fol® metallic 12 мкм.

В 2020 году был представлен продукт Arti-Fol® metallic Complete BK 328.

Arti-Fol® металлическая пленка Shimstock 12 мкм черная/красная



				REF
		22 mm x 20 m		BK 28
		22 mm x 20 m		BK 1028 
		20 x		BK 328

 = Экологически чистый многоразовый пакет

 = Рекомендуется для использования в стоматологических кабинетах

 = рекомендуется для использования в лабораторных условиях

Arti-Fol® металлическая пленка Shimstock 12 мкм черная/красная



Arti-Fol® metallic 12 мкм черная/красная

Arti-Fol® metallic 12 мкм черная/красная представляет собой тест для окклюзии, состоящий из металлизированной полиэстеровой пленки (shimstock) толщиной 12 мкм с двусторонним цветным покрытием.

Эта пленка характеризуется гибкостью, стойкостью к разрыву и низким статическим зарядом. Низкая толщина материала позволяет близкое прилегание к antagonistам.



Рулоны | Диспенсеры для рулонов для чистого и экономичного использования, например, для пломбировок, коронок и мостов (реставрационная и функциональная стоматология)

вается индивидуально с левой или правой стороны или в комбинации для всей зубной дуги.

Arti-Fol® metallic Complete 12 мкм

объединяет проверенную пленку Arti-Fol® metallic черная/красная толщиной 12 мкм с новым и гигиеничным картонным держателем. Благодаря своей специальной форме, Arti-Fol® metallic Complete может использо-

Полосы с ламинированным картонным держателем



Гигиеничное использование без инструмента для удержания, например, для пломб, коронок и мостов (реставрационная и функциональная стоматология)

Bausch Arti-Fol® metallic металлическая пленка Shimstock 12 мкм



				REF	
					
				BK 30	22 mm x 20 m
				BK 31	22 mm x 20 m
				BK 32	22 mm x 20 m
				BK 33	22 mm x 20 m
		100 x		BK 35	8 mm x 50 mm
		100 x		BK 38	8 mm x 50 mm
				BK 39	16 mm x 20 m
				BK 730	75 mm x 20 m
				BK 731	75 mm x 20 m

 = Рекомендуется для использования в стоматологических кабинетах

 = рекомендуется для использования в лабораторных условиях

Bausch Arti-Fol® metallic металлическая пленка Shimstock 12 мкм



Bausch Arti-Fol® metallic металлическая пленка Shimstock 12 мкм

Arti-Fol® metallic это тест для окклюзии, состоящий из металлизированной полиэстеровой пленки (shimstock film) толщиной 12 мкм с одно- или двусторонним цветным покрытием.

Эта пленка характеризуется гибкостью, стойкостью к разрыву и сниженным статическим зарядом. Низкая толщина материала позволяет близкое прилегание к антагонистам. Пленка точно маркирует окклюзионные контакты на всех материалах, существенно сокращая размазывание или ложные контакты.

Металлизированная задняя сторона пленки может предотвратить путаницу между непокрытой стороной и стороной с цветным покрытием. Кроме того, фольга обладает антистатическими свойствами благодаря металлизации.

Предварительно нарезанные полосы шириной 8 мм продукта Arti-Fol® metallic BK 35, в сочетании с щипцами Arti-Fol® BK 145 (см. страницу 61), особенно подходят для проверки апроксимальных контактов при установке мостов или коронок.

В качестве дополнения к Arti-Fol® metallic мы предлагаем классическую пленку Shimstock без цветного покрытия шириной 8 мм, а также шириной 16 мм.

Протокол по использованию shimstock можно скачать с нашего веб-сайта:

www.bauschdental.com/downloads.

Рулоны шириной 22 мм | 

Диспенсеры для рулонов для чистого и экономичного распределения, например, для пломбировок, коронок и мостов (реставрационная и функциональная стоматология)

Рулоны шириной 75 мм | 

могут применяться например, для окклюзионных сплинтов, съемных протезов, проверки всей зубной дуги в артикуляторе.

Bausch Arti-Fol® Артикуляционная Пленка 8 мкм



				REF	
 	22 mm x 20 m			BK 20	BK 1020
	22 mm x 20 m			BK 21	BK 1021
	22 mm x 20 m			BK 22	BK 1022
	22 mm x 20 m			BK 23	BK 1023
	22 mm x 20 m			BK 24	BK 1024
	22 mm x 20 m			BK 25	BK 1025
	22 mm x 20 m			BK 26	BK 1026
	22 mm x 20 m			BK 27	BK 1027
	75 mm x 20 m			BK 70	
	75 mm x 20 m			BK 71	
	75 mm x 20 m			BK 72	
	75 mm x 20 m			BK 73	
	75 mm x 15 m			BK 74	
	75 mm x 15 m			BK 75	
	75 mm x 15 m			BK 76	
	75 mm x 15 m			BK 77	
	75 mm	1 x		BK 137	
	22 mm	1 x		BK 139	

 = Рекомендуется для использования в стоматологических кабинетах

 = рекомендуется для использования в лабораторных условиях

Bausch Arti-Fol® Артикуляционная Пленка 8 мкм



Arti-Fol® Артикуляционная Пленка 8 мкм

Arti-Fol® 8 мкм - это ультратонкая пленка для тестирования окклюзии, состоящая из полиэфирной пленки толщиной 8 мкм и одно- или двусторонним цветным покрытием.

Тонкое цветное покрытие состоит из воска и пигментов, обогащенных гидрофильными компонентами, для улучшенной маркировки на различных материалах.

Эта пленка выделяется своей минимальной толщиной материала и обеспечивает точное и четко очерченное представление окклюзионных контактов.

Артикуляционные пленки Bausch Arti-Fol® особенно применяются для отображения статической и динамической окклюзии в нескольких цветах. Четыре различных цвета доступны для представления статических и различных функциональных динамических движений (протрузии, латеротрузии, медиотрузии).

Различные цвета также могут быть использованы для моделирования воска в лаборатории.

Рулоны шириной 22 мм | 

Диспенсеры для рулонов для экономичного распределения, например, для пломб, коронок и мостов (реставрационная и функциональная стоматология)

Arti-Fol® артикуляционная пленка 8 мкм шириной 75 мм

Пленки для тестирования окклюзии доступны в четырех цветах и шириной 75 мм. Широко используются в зуботехнических лабораториях.

Для упрощения работы с артикулятором мы предлагаем наш специальный держатель Bausch Y-Holder BK 140 (см. страницу 63).

Рулоны шириной 75 мм | 

Применяются например, для окклюзионных щитков, полных протезов, проверки всей дентальной дуги в артикуляторе.



Жидкости и спреи


С 1980-х годов мы предоставляем жидкости и спреи для коррекции протезных реставраций:

- Arti-Spot® контактный краситель для проверки точности посадки коронок, легко наносится
- Arti-Spray® с тем же назначением, аэрозоль для быстрого применения

В 2016 году был представлен Bio-Ink-Flow для маркировки болевых точек.

В этот же период был добавлен индикаторный краситель Arti-Bruх® для более подробных окклюзионных исследований.

Индикатор высоких точек Bausch Arti-Spot®

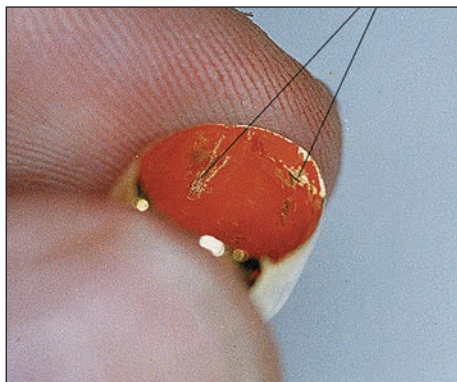

				REF	
	Arti-Spot® 1	15 ml		BK	85
	Arti-Spot® 2	15 ml		BK	86
	Arti-Spot® 3	15 ml		BK	87



= Рекомендуется для использования в стоматологических кабинетах



= рекомендуется для использования в лабораторных условиях

Индикатор высоких точек Bausch Arti-Spot®



Индикатор высоких точек Bausch Arti-Spot®

Arti-Spot® - это жидкий контактный краситель для проверки точной посадки коронок, вкладок, онлеев, телескопических коронок, а также поверхностей трения. Arti-Spot® наносится кистью на поверхность, которую необходимо проверить, и после нескольких секунд, когда растворитель испаряется, оставляет тонкую пленку примерно 3 мкм. Каждый контакт точно разрушает цветную пленку в точке контакта. Затем контактная область становится четко видимой.

Мы предлагаем три различных цвета для контрастного представления на различных материалах.

Arti-Spot® легко удаляется с использованием горячей воды с механическим воздействием (зубная щетка или ирригатор). Спирт, изопропиловый спирт или паровой струйный аппарат растворят даже последние остатки красителя. Arti-Spot® можно удалить с запечатанных гипсовых моделей с помощью тонкой кисти.

Бутылка с кистью |  | 

Точное нанесение на поверхность для проверки (не предназначено для прямого внутриворотного применения) например, для коронок, вкладок, онлеев, телескопических коронок и для визуализации поверхностей трения

Спрей для окклюзии Bausch Arti-Spray®



				REF
	Arti-Spray®	75 ml		BK 285
	Arti-Spray®	75 ml		BK 286
	Arti-Spray®	75 ml		BK 287
	Arti-Spray®	75 ml		BK 288



= Рекомендуется для использования в стоматологических кабинетах



= рекомендуется для использования в лабораторных условиях

Спрей для окклюзии Bausch Arti-Spray®



Спрей для окклюзии Bausch Arti-Spray®

Arti-Spray® универсальный маркирующий спрей, доступный в четырех различных цветах для проверки окклюзионных контактов, а также точной установки коронок, мостов, протезов и частично съемных протезов.

Arti-Spray® может быть точно дозирован и формирует тонкий порошковый слой цвета, который легко удаляется водой или паровой струей без остатков. Arti-Spray® распыляется с расстояния 3-5 см на окклюзионную поверхность или внутреннюю поверхность коронки или моста.

Все точки контакта легко выявляются как пятна на цветном слое. При необходимости точки контакта могут быть помечены цветным маркером или артикуляционными пленками Bausch Arti-Fol® для дальнейшей оценки. Arti-Spray® также может использоваться для аппроксимальных контактов при установки коронок или мостов.

Баллон со спреем


ВК 285 | 

ВК 286 | ВК 287 | ВК 288 |  |  | MD

Быстрое нанесение на проверяемую поверхность (не предназначено для прямого внутриворотного применения)

например, для коронок, вкладок, онлеев, телескопических коронок, вкладок.

Маркер болевых точек Bausch Bio-Ink®

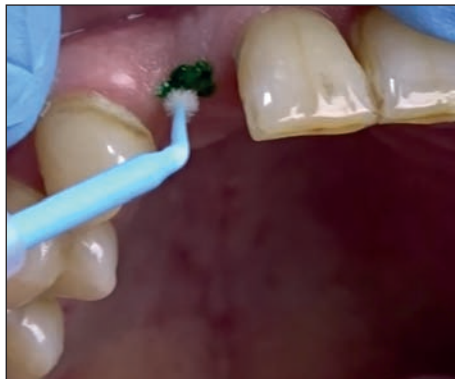

				REF
	Set	1 ml	●	BK 205
		1 ml	●	BK 206



= Рекомендуется для использования в стоматологических кабинетах

Маркер болевых точек Bausch Bio-Ink®



Маркер болевых точек Bausch Bio-Ink®

Bio-Ink®-Flow - это зеленая, высоковязкая, легко наносимая паста для маркировки болевых точек на слизистой и их идентификации на зубном протезе. Bio-Ink®-Flow также можно использовать для маркировки линии АН, краев протеза и вестибулярной складки.

Соответствующие участки маркируются с использованием Bio-Ink®-Flow на предварительно высушенной слизистой. При вставке сухого протеза цвет, нанесенный на болевую точку, передается на протез, показывая место для коррекции.

Шприц-аппликатор с иглой |  |

Набор ВК 205: включает одноразовые аппликаторы, держатель аппликатора

Точное нанесение на слизистую

Шприц-аппликатор с иглой |  |

ВК 206: Точное нанесение на слизистую

Краска индикатор окклюзии Bausch Arti-Bruх®



				REF	
	Applicator	0,15 ml		BK	88
	Set	15 ml		BK	89



= Рекомендуется для использования в стоматологических кабинетах

Краска индикатор окклюзии Bausch Arti-Bruх®



Краска индикатор окклюзии Bausch Arti-Bruх®

Arti-Bruх® - это краска красного цвета для визуализации паттернов движения на высокополированных реставрациях и протезах, а также на окклюзионных сплинтах.

Устойчивое к слюне тонкое и равномерное цветное покрытие позволяет визуализировать динамическую окклюзию пациента на протяжении продолжительного периода времени (максимум 24 часа).

Парафункции (бруксизм) могут быть визуализированы на твердых окклюзионных сплинтах или протезных ре-

ставрациях. Окклюзионные концепции, такие как антеградная направленность на сплинтах, также могут быть специально проверены.

Бутылка с одноразовыми кисточками ВК 89 |  | Точное нанесение на реставрации, протезы и окклюзионные сплинты

Одноразовый аппликатор ВК 88 |  | Точное нанесение на реставрации, протезы и окклюзионные сплинты



Arti-Pink воск для регистрации прикуса

В 2024 году мы добавили в наш ассортимент воск Arti-Pink Bite Wax.

Воски для регистрации прикуса стали применяться с 19 века, когда стоматология стала более систематичной и научной. Эти воски были разработаны для определения точного положения зубов и прикуса пациента во время протезирования для коронок, мостов или же зубных протезов.

Несмотря на новые материалы и технические разработки, такие как силиконы, другие оттисковые материалы и цифровизация, воск для регистрации прикуса остается важным и широко используемым материалом в стоматологии.

Специфические свойства воска могут быть использованы в специальных лечебных процедурах.

Bausch Arti-Pink воск для регистрации прикуса



				REF
	150 x 80 x 3 mm	12 x		BK 6003
	„L“ 79 x 68 x 3 mm	24 x		BK 6016
	„M“ 68 x 60 x 3 mm	24 x		BK 6017
	„S“ 64 x 56 x 3 mm	24 x		BK 6018

 = Рекомендуется для использования в стоматологических кабинетах

 = рекомендуется для использования в лабораторных условиях

Bausch Arti-Pink воск для регистрации прикуса



Arti-Pink воск для регистрации прикуса

Воск для прикуса Arti-Pink от Bausch используется для точной регистрации прикуса и позволяет точно воспроизвести контуры в межбугорье. Он отличается отличными моделирующими свойствами. С толщиной 3 мм этот дополнительно твердый воск доступен не только в виде пластины размером 150 мм x 80 мм, но также в овальной форме в предварительно изготовленных размерах S, M и L.

Чтобы использовать Arti-Pink Bite Wax, нагрейте дополнительно твердый воск в горячей воде до температуры плавления около 55° C. Это делает его формируемым и готовым к использованию для точной регистрации прикуса.

Пластины

Проверенный воск для регистрации прикуса при протезировании зубов, напр. изготовлении полных зубных протезов и в общем для регистрации соотношения верхней и нижней челюстей.

Овальная форма

Проверенный воск в виде готовых к использованию овалов для регистрации прикуса при протезировании зубов, напр. изготовлении полных зубных протезов и в общем для регистрации соотношения верхней и нижней челюстей.



Bausch Fleximeter®-Strips

Уже в 1980 году Fleximeter® был добавлен в наш ассортимент как отдельный силиконовый инструмент. Дальнейшее развитие к текущему продукту Fleximeter®-Strips произошло в 2002 году

Bausch Fleximeter®-Strips



				REF
	1,0 mm	15 x		BK 250
	1,5 mm	15 x		BK 251
	2,0 mm	15 x		BK 252
1,0 mm 1,5 mm 2,0 mm		3 x 5 = 15	  	BK 253
1,0 mm 1,5 mm 2,0 mm		3 x 1 = 3	  	BK 254

 = Рекомендуется для использования в стоматологических кабинетах

 = рекомендуется для использования в лабораторных условиях

Bausch Fleximeter®-Strips



Bausch Fleximeter®-Strips

Fleximeter®-Strips - гибкие измерительные полосы, изготовленные из стерилизуемого силикона в трех различных толщинах для определения расстояний подготовки реставраций.

Fleximeter®-Strips с толщинами 1,0 мм, 1,5 мм и 2,0 мм могут использоваться для создания регистрации прикуса с контролируемым поднятием прикуса, например, в случае абразивной дентитии или окклюзионных сплнтов.

Путем нанесения цветного слоя с использованием Arti-Spot® или Arti-Spray®, Fleximeter®-Strips можно использовать для проверки расстояний. Когда эти расстояния подготовки слишком низки, на препарировании будет видна цветная метка.

Силиконовые измерительные полосы |  | 
Для проверки расстояний препарирования



Инструменты и аксессуары Bausch

Удобство использования наших продуктов для тестирования окклюзии значительно улучшается благодаря нашим устройствам прикусывателям и щипцам

Мы поставляем высококачественные инструменты, а также прикусыватели для двустороннего контроля окклюзии или для апроксимального использования.

Бумага Bausch и щипцы Arti-Fol®



				REF
		1 x		BK 132
		1 x		BK 133
		1 x		BK 142
		1 x		BK 144
		1 x		BK 145



= Рекомендуется для использования в стоматологических кабинетах

Бумара Bausch и щипцы Arti-Fol®



Бумара Bausch и щипцы Arti-Fol®

Щипцы Arti-Fol® BK 132 | 

Мы рекомендуем щипцы для Arti-Fol® BK 132 с фрезерованной продольной канавкой для особенно надежного захвата наших артикуляционных бумаг и окклюзионных пленок.

Щипцы для артикуляционной бумаги типа "Miller"
BK 142 | 

Щипцы для артикуляционной бумаги типа "Miller" - высококачественный инструмент для удержания различных видов артикуляционных бумаг.

Щипцы Arti-Fol® "SteriSlide" BK 144 | 

Щипцы Arti-Fol® "SteriSlide" от Bausch предоставляет фрезерованную продольную канавку для отличного захвата артикулирующих пленок. Кроме того, эти щипцы имеют ползунок (вспомогательное средство для стерилизации), который можно использовать для удержания зажимов в открытом состоянии во время процесса стерилизации.


Щипцы Arti-Fol® для апроксимальных контактов
BK 145 | 

Щипцы Arti-Fol® для апроксимальных контактов, разработанный доктором Мюллером, используется для быстрой апроксимальной посадки реставраций. Инно-

вационный и удобный дизайн обеспечивает значительно улучшенное управление по сравнению с традиционными методами. Высокая сила щипцов позволяет удерживать окклюзионную пленку с двух сторон и обеспечивает надежное руководство во время оценки стоматологом. Пленка вставляется быстро и удобно. Инструмент не содержит полостей и может быть легко дезинфицирован или стерилизован всеми известными методами.

В соответствии с щипцами Arti-Fol® для апроксимальных контактов мы предлагаем Arti-Fol® metallic 12 мкм шириной 8 мм. Arti-Fol® metallic идеален для проверки апроксимальных контактов при установке мостов или коронок благодаря его высокой прочности на разрыв, четко видимым маркировкам и низкой толщине.

Прикусыватели Bausch / Аксессуары

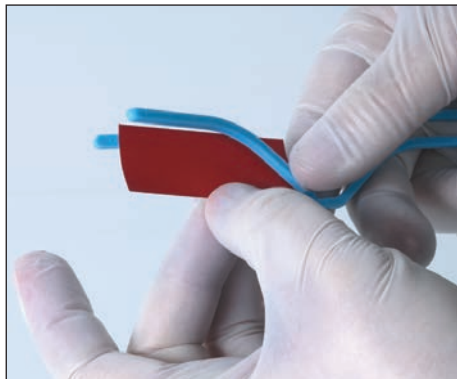

				REF
		1 x		BK 130
		1 x		BK 133
		1 x		BK 140
		5 x		BK 143
				REF
		1 x		BK 137
		1 x		BK 139




= Рекомендуется для использования в стоматологических кабинетах



= рекомендуется для использования в лабораторных условиях

Прикусыватели Bausch / Аксессуары

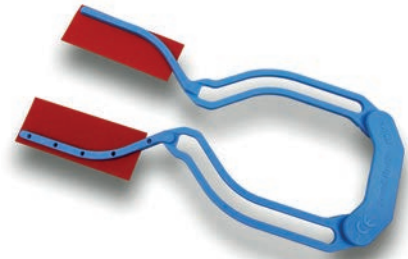

Прикусыватели Bausch

Гибкая вилка для прикуса (+ 2x BK 133) |  |
Наша гибкая вилка для прикуса - это комбинация двух изогнутых щипцов BK 133 и резиновой ручки BK 130. Щипцы просто вставляются в резиновую ручку, и расстояние можно регулировать для различных размеров челюстей.

Фиксирующая рамка для прикуса Fix-Clip® BK 143

|  |
Фиксирующая рамка для прикуса Fix-Clip® - это альтернатива металлическим инструментам, используемым для надежного удержания тонких

артикулирующих бумаг и окклюзионных пленок. Гибкий инструмент можно стерилизовать.

Держатель для пленок Bausch Y-Holder BK 140 |  |
Держатель для пленок Bausch Y-Holder предназначен для 75 мм широких пленок или 80 мм широких шелков. Этот держатель предназначен для применения в артикуляторе.

Аксессуары

Диспенсер из акрила BK 137 предназначен для наших широких шелков и пленок.

Для наших бумаг и пленок шириной 22 мм доступен пластиковый диспенсер - номер заказа BK 139. Этот диспенсер содержит встроенное металлическое зубчатое лезвие.



www.bauschdental.com

Dr. Jean Bausch GmbH & Co. KG
Oskar-Schindler-Straße 4
D-50769 Köln - Germany
Tel: +49-221-70936-0
Fax: +49-221-70936-66
info@bauschdental.de
www.bauschdental.de

Bausch Articulating Papers, Inc.
12 Murphy Drive
Nashua, NH 03062, U.S.A.
Tel: +1-603-883-2155
Tel: 888-6-BAUSCH
Fax: +1-603-883-0606
info@bauschdental.com
www.bauschdental.com

Bausch Articulating Papers (Australasia) Pty. Ltd
ABN 73093760402
G.P.O. Box 3733, Sydney NSW 2001, Australia
Tel: +61-2-9345-1945
Fax: +61-2-9345-1955
info@bauschdental.com.au
www.bauschdental.com.au

Bausch Articulating Papers Japan K. K.
5F, 1-1-31, Nishimidorigaoka
Toyonakashi, Osaka 560-0005 - Japan
Tel: +81 6-6845-0020
Fax: +81 6-6845-0024
E-Mail: info@bauschdental.jp
Web: www.bauschdental.jp

Bausch Importação de Materiais Odontológicos Ltda.
Rua Paulo Eduardo Xavier de Toledo, 379 salas 8 e 9
13304-240 Itu-SP, Brasil
Tel: +55 11 3020-9263
vendas@bauschbrasil.com.br
www.bauschbrasil.com.br

Bausch Articulating Papers Co., Ltd.
#1004, The O Ville B/D, 344, Jong-Ro, Jongno-Gu
Seoul 03114, Korea
Tel: +82 2-2236-0158
Fax: +82 2-6499-9158
info@bauschdental.kr
www.bauschdental.kr

