


# Bausch

WE MAKE OCCLUSION VISIBLE



## ARTİKÜLASYON- VE OKLÜZYON TEST MALZEMELERİ

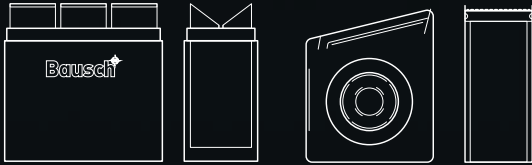





## We make occlusion visible.

Şirketin kurucuları, diş hekimleri Dr. Jean Bausch ve Dr. Hans Bausch, basınç hassasiyetli bir ısırtma kağıdı ihtiyacı olduğunu fark ettiler ve en doğru oklüzyon sonucu elde etmek için artikülasyon kağıdı geliştirdiler.

1953 yılından bu yana Dr. Jean Bausch GmbH & Co. KG aşamalı renk tonlamalı artikülasyon kağıtları üretiyor. Bu kanıtlanmış ürün BK 01, farklı çiğneme kuvvetlerini farklı renk tonlarında gösteren ilk artikülasyon kağıdıdır. Erken temas noktalarını belirlemek için hala önemli bir prensip olan bu progresif yöntem, hassas ve güvenilir bir analiz sağlar.

Test edilecek yüzeylerdeki doğru renklendirme, örneğin seramik, kompozit veya metal gibi ürünler bizim için en önemlidir.

Sonuç olarak, geniş kapsamlı artikülasyon ve oklüzyon kağıtları farklı kalınlıklarda, şekillerde ve renklerde üretilmiştir. Bu da bizi dünyanın önde gelen üreticilerinden biri yapıyor.

İkinci nesil bir aile şirketi olarak, gelecekte de inovasyon ve sürekli gelişim için çalışmaya devam ediyoruz. Örneğin, 2019 yılında Köln'de düzenlenen IDS fuarında yeni dijital oklüzyon test cihazımız Occlu-Sense® ürününü tanıttık.

Dr. Hans Bausch'un eşi Bayan Evelyn Bausch, 1961 yılında şirkete katılmıştır. André ve Peter Bausch (Dr. Hans Bausch ve Evelyn Bausch'un oğulları), 1998 yılından bu yana Dr. Jean Bausch GmbH & Co. KG şirketinin genel müdürlüğünü yürütmektedir.

Tüm ürünlerimiz, Avrupa Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği ve kalite kontrol sistemimiz çerçevesinde DIN EN ISO 13485 standartlarına uygun olarak üretilmekte ve sürekli denetlenmektedir.

Bu broşür öncelikle profesyonel kullanıcılar için hazırlanmıştır ve kullanım amacına en uygun test malzemesinin seçilmesine yardımcı olmayı amaçlamaktadır.




- 1953 - Köln'de şirketin kuruluşu ve ilk progresif artikülasyon kağıdı
- 1962 - Köln'deki IDS'e ilk katılım
- 1972 - 40 µm incelikte oklüzyon kağıdının tanıtımı
- 1974 - Üretim Rheinland-Pfalz'a taşındı  
- At nalı şeklindeki kağıtların üretim başlangıcı
- 1979 - IDS Düsseldorf: Arti-Fol®'un piyasaya sürülmesi.  
- Bausch Dental Co. of America'nın kuruluşu ve temsilcilik ofisi
- 1983 - IDS Münih: Arti-Fol® 8 µm 4 renkte
- 1986 - IDS Köln: Arti-Spot® Yüksek Nokta İndikatörü
- 1994 - Bausch Articulating Papers, Inc. şirketinin kuruluşu  
Nashua, NH, A.B.D.
- 1999 - IDS Köln: Arti-Fol® metalik 12 µm
- 2003 - Bausch Articulating Papers'ın Kuruluşu  
Sydney, Avustralya'da (Australasia) Pty. Ltd
- 2007 - Bausch Articulating Papers Japan K.K.'nin kuruluşu,  
Osaka, Japonya'da  
- Bausch Importação de Materiais'in Kuruluşu  
Odontológicos Ltda. in São Paulo, Brezilya
- 2009 - Rheinland Pfalz'daki üretim alanının genişletilmesi
- 2017 - IDS Köln: OccluSense® Sisteminin sunumu ile  
renkli kaplamalı basınç sensörü
- 2019 - IDS Köln: OccluSense®'in piyasaya sürülmesinin  
başlangıcı
- 2020 - Üretim binasının genişletilmesi ve  
Köln'deki eğitim merkezleri
- 2021 - Bausch Articulating Papers Co. Ltd. şirketinin  
kuruluşu Seul, Kore

## İçindekiler tablosu

|                                                                          |           |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Oklüzyon - Etkiler - Sonuçlar   Erken temasları kesin olarak tespit edin | 6         |
| Bausch artikülasyon ve oklüzyon test ürünleri   kalınlıklar              | 8         |
| OccluSense® - Dijital oklüzyon kontrolü                                  | 12        |
| Progresif renklendirme prensibi.                                         | 16        |
| İki aşamalı yöntemde oklüzyon testi                                      | 18        |
| <b>Artikülasyon ve oklüzyon kağıtları/artikülasyon ipekleri</b>          | <b>20</b> |
| Progresif renkli Bausch Artikülasyon kağıtları 200 µm                    | 22        |
| Bausch PROGRESS 100 Artikülasyon kağıdı 100 µm                           | 24        |
| Arti-Ceram                                                               | 26        |
| Progresif Tonlu Bausch Artikülasyonlu ipek 80 µm                         | 28        |
| Bausch oklüzal kağıtları Arti-Check® 40 µm incelikte                     | 30        |
| <b>Bausch oklüzyon folyoları</b>                                         | <b>32</b> |
| Bausch Arti-Fol® metalik şimstock folyo 12 µm siyah/kırmızı              |           |
| Bausch Arti-Fol® metalik Complete 12 µm siyah/kırmızı                    | 34        |
| Bausch Arti-Fol® metalik şimstock folyo 12 µm                            | 36        |
| Arti-Fol® artikülasyon folyo 8 µm                                        | 38        |
| <b>Sıvılar ve Spreyler</b>                                               | <b>40</b> |
| Bausch Arti-Spot® Yüksek Nokta İndikatörü                                | 42        |
| Bausch Arti-Spray® Oklüzyon Spreyi                                       | 44        |
| Bausch Bio-Ink®-Flow protez yara işaretleyici                            | 46        |
| Bausch Arti-Brux® Oklüzyon Test Boyası                                   | 48        |
| <b>Bausch Arti-Pink Bite Wax</b>                                         | <b>50</b> |
| <b>Bausch Fleximeter® -Strips</b>                                        | <b>54</b> |
| <b>Bausch enstrüman ve aksesuarları</b>                                  | <b>58</b> |
| Bausch Kağıt ve Arti-Fol® tutucu                                         | 60        |
| Bausch ısıırma çerçevesi ve ekipman                                      | 62        |

# Oklüzyon – Etkiler – Sonuçlar

## Temporomandibular eklem rahatsızlıkları

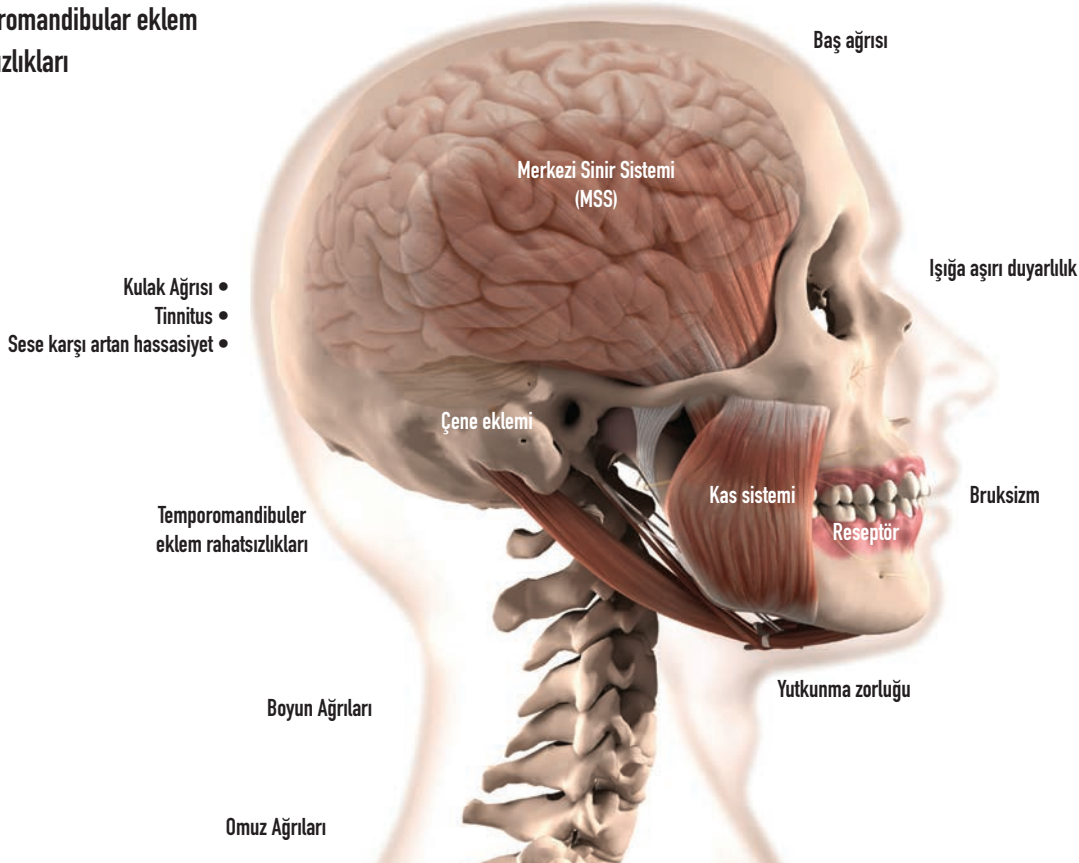

## Erken temasları kesin olarak tespit edin.

Oklüzyon, dişler arasındaki herhangi bir temas anlamına gelir.

Oklüzyon, stomatognatik çene içinde bir bölüm oluşturur. Sisteminin anatomik bütünü olan temporomandibular eklem, çiğneme kasları, hassas sinirler, basınç reseptörleri ve merkezi sinir sistemi, temsil eder.

Her restorasyon, ekstraksiyon, protez tedavisinin veya ortodontik tedavinin statik ve dinamik hareketlerde etkisi vardır sonuçta anatomik bütünlük üzerinde.

Bu nedenle Bausch şirketi, profesyonel kullanıcılar için oklüzal test ürünleri geliştirdi böylece hasta kişisel fizyolojik oklüzyona sahip olabilir.

Sadece statik oklüzyonun kontrolü değil, diş teması maksimum interküspidasyonda ve alt çene hareketi dinamik hareketlerde dikkate alınmalıdır. Dinamik hareketler, yani mandibular hareket anterior rehberlik, kanin koruyucu oklüzyon ve grup fonksiyon diye ayrılır.

Farklı hareket şekillerini kontrol etmek için tüm diş arka için 8 µm ve 12 µm folyolar farklı renklerde geliştirilmiştir.

Örneğin:

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Statik için        | siyah   |
| Laterotrüzyon için | kırmızı |
| Mediotrüzyon için  | yeşil   |
| Protrüzyon için    | mavi    |

kullanılabilir.

Olağan oklüzyonda, yani alışılmış olarak benimsenen statik oklüzyonda bir değişiklik olduğunda nöromüsküler tonusta bir değişikliğe yol açabilir ve bu temporomandibular eklem rahatsızlıkları hastalığında dönüşebilir.

Faktörlerin etkisi diyagramda açıkça görülebilir.

Bilimde çeşitli oklüzyon kavramları tanımlanmıştır. Oklüzyonu yeniden oluşturulması için bir örnektir. Zaten "tek bir oklüzyon" diye bir şey yoktur. Bunun yerine, bireysel oklüzyon tedavisi sırasında biyomekanik koşullar her birinin tedavisi sırasında biyomekanik koşullar ön plana yerleştirilmelidir.

Bilinçli ve mantıklı kullanımı sayesinde, farklı kalınlıklarda kağıtlar ve folyolar, önemli temasların belirgin şekilde gösterir.

Bausch artikülasyon kağıtları 100 µm ve 200 µm progresif renklendirme statik için kullanılır. Özelliği her türlü malzeme üzerinde boya bırakır ve tükürüğü emer. Hem diş hekimliği muayenelerinde ve aynı zamanda diş laboratuvarlarında kullanılır.

Artikülasyon kağıtları grubu ayrıca şunları da içerir 40 µm kalınlığında Arti-Check®. Bu ince kağıtların her iki yüzü de sıvı boyala kaplıdır ve ince kalınlığı nedeniyle hassas bir şekilde kullanılır.

Isırma gücünü de kayıt etmek için dijital test cihazı Occlusense® geliştirilmiştir.

Böylece tüm diş arkının ısırma gücü kaydedilir, erken temaslar hızlı bir şekilde tespit edilir ve eklem rahatsızlıklarının önüne geçilmesi sağlanır.

|                                                                                    |        |                 |            |              |                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|------------|--------------|-------------------------------------|
|     | 200 µm | mavi            | emdirilmiş | çift taraflı | 200 µm Kağıt                        |
|    | 200 µm | kırmızı         | emdirilmiş | çift taraflı | 200 µm Kağıt                        |
|    | 100 µm | mavi            | emdirilmiş | çift taraflı | 100 µm Kağıt                        |
|    | 100 µm | kırmızı         | emdirilmiş | çift taraflı | 100 µm Kağıt                        |
|    | 200 µm | yeşil           | emdirilmiş | çift taraflı | 200 µm Kağıt                        |
|    | 100 µm | yeşil           | emdirilmiş | çift taraflı | 100 µm Kağıt                        |
|    | 80 µm  | mavi            | emdirilmiş | çift taraflı | 80 µm lpek                          |
|    | 80 µm  | kırmızı         | emdirilmiş | çift taraflı | 80 µm lpek                          |
|    | 80 µm  | yeşil           | emdirilmiş | çift taraflı | 80 µm lpek                          |
|    | 40 µm  | mavi/mavi       | kaplanmış  | çift taraflı | 20 µm Kağıt + 10 µm + 10 µm kaplama |
|    | 40 µm  | kırmızı/kırmızı | kaplanmış  | çift taraflı | 20 µm Kağıt + 10 µm + 10 µm kaplama |
|    | 40 µm  | mavi/kırmızı    | kaplanmış  | çift taraflı | 20 µm Kağıt + 10 µm + 10 µm kaplama |
|    | 12 µm  | siyah/kırmızı   | kaplanmış  | çift taraflı | 12 µm folyo + 6 µm + 6 µm kaplama   |
|    | 12 µm  | siyah           | kaplanmış  | tek taraflı  | 12 µm folyo + 6 µm kaplama          |
|    | 12 µm  | kırmızı         | kaplanmış  | tek taraflı  | 12 µm folyo + 6 µm kaplama          |
|    | 12 µm  | yeşil           | kaplanmış  | tek taraflı  | 12 µm folyo + 6 µm kaplama          |
|    | 12 µm  | mavi            | kaplanmış  | tek taraflı  | 12 µm folyo + 6 µm kaplama          |
|    | 12 µm  | kaplamasız      | kaplamasız | -            | 12 µm folyo olmadan kaplama         |
|   | 8 µm   | siyah           | kaplanmış  | tek taraflı  | 8 µm folyo + 6 µm kaplama           |
|  | 8 µm   | kırmızı         | kaplanmış  | tek taraflı  | 8 µm folyo + 6 µm kaplama           |
|  | 8 µm   | yeşil           | kaplanmış  | tek taraflı  | 8 µm folyo + 6 µm kaplama           |
|  | 8 µm   | mavi            | kaplanmış  | tek taraflı  | 8 µm folyo + 6 µm kaplama           |
|  | 8 µm   | siyah           | kaplanmış  | çift taraflı | 8 µm folyo + 6 µm + 6 µm kaplama    |
|  | 8 µm   | kırmızı         | kaplanmış  | çift taraflı | 8 µm folyo + 6 µm + 6 µm kaplama    |
|  | 8 µm   | yeşil           | kaplanmış  | çift taraflı | 8 µm folyo + 6 µm + 6 µm kaplama    |
|  | 8 µm   | mavi            | kaplanmış  | çift taraflı | 8 µm folyo + 6 µm + 6 µm kaplama    |

## Bausch artikülasyon ve oklüzyon test malzemeleri.

1953 yılından bu yana oklüzyon test malzemeleri konusunda uzmanlaşarak, diş hekimliğinin ayrılmaz bir parçası haline geldik. Zaman içinde ürün yelpazemizi, profesyonel kullanıcılarımızın ihtiyaçlarına ve gelişen tedavi yöntemlerine uyum sağlayacak şekilde genişlettik.

1970'lerin başında, denenmiş ve test edilmiş artikülasyon kağıtları ve ipeklerine ek olarak, 40 µm kalınlığında daha ince kağıtlar sunarak diş hekimliğinde hassas ölçümler için yeni bir standart oluşturduk. Aynı dönemde, diş hekimliğinde gnatholoji kavramı geliştirildi. Günümüzde fonksiyonel teşhisin temelini oluşturan bu konsept, daha ince ve hassas test malzemelerini gerektiriyordu.

Bu ihtiyacı karşılamak amacıyla farklı renklerde ve incelikte, yırtılmaya dayanıklı, hassas boyama folyoları ürettik. Ayrıca, sıvı temas boyaları, oklüzyon spreyleri ve diğer renk indikatörleri gibi yenilikçi ürünler geliştirdik.

Son olarak, Uluslararası Diş Hekimliği Fuarı IDS 2019'da, klasik oklüzyon testini dijitalleştiren OccluSense® sistemini tanıttık. Bu sistem, geleneksel yöntemleri dijital teknolojiyle birleştirerek oklüzyon analizinde yeni bir çağ başlatmaktadır.



## Artikülasyon kağıtları 200 µm



- aşamalı olarak boyama
- nemli oklüzal yüzeylerde iyi boyar
- seramik üzerinde iyi görülebilen boya
- basınçta iyi boyar
- statik oklüzyonu kontrol etmek için
- büyük, görülebilir işaretleme
- yumuşak malzeme - oklüzal yüzeye iyi uyum sağlar
- erken temasların ilk kontrolü için
- tüm materyaller için uygundur



## Artikülasyon kağıtları 100 µm



- aşamalı olarak boyama
- nemli oklüzal yüzeylerde iyi boyar
- seramik üzerinde iyi görülebilen boya
- basınçta iyi boyar
- statik oklüzyonu kontrol etmek için
- hassas, açıkça görülebilir işaretleme
- yumuşak malzeme - oklüzal yüzeye iyi uyum sağlar
- erken temasların ilk kontrolü için
- tüm materyaller için uygundur



## Arti-Ceram 200 µm | 100 µm



- Aşamalı renklendirme özelliğine sahiptir
- Nemli oklüzal yüzeylerde iyi renklendirir
- CAD/CAM seramiklerde net bir şekilde renklendirir
- Basınca bağlı olarak renklendirir
- Statik oklüzyonun kontrolü için uygundur (200 µm)
- Statik ve dinamik oklüzyonun kontrolü için uygundur (200 µm)
- Noktasal, net görünen işaretleme yapar
- Yumuşak nonwoven malzeme - oklüzal yüzeye iyi uyum sağlar (200 µm)
- Çok yumuşak ve yırtılmaya dayanıklı non-woven malzeme (100 µm)
- Oklüzal yüzeye iyi uyum sağlar
- Ön temas noktalarının ilk kontrolü için uygundur
- Tüm materyaller için uygundur



## Artikülasyon kağıtları 80 µm



- aşamalı olarak boyama
- nemli oklüzal yüzeylerde iyi boyar
- seramik üzerinde iyi görülebilen boya
- basınçta iyi boyar
- statik ve dinamik oklüzyonu kontrol etmek için
- hassas, açıkça görülebilir işaretleme
- çok yumuşak, yırtılmaya dayanıklı ipek kumaş - oklüzal yüzeyi iyi görüntüler
- erken temasların ilk kontrolü için
- tüm materyaller için uygundur
- gerber tekniği için önerilir




## Artikülasyon kağıtları 40 µm



- nemli oklüzal yüzeylerde iyi boyar
- seramik üzerinde iyi görülebilen boya
- basınçta ve vuruşta iyi boyar
- statik ve dinamik oklüzyonu kontrol etmek için
- hassas, açıkça görülebilir işaretleme
- ince kağıt
- tüm materyaller için uygundur
- tam oklüzal temas noktalarını belirler



## Arti-Fol. metallic 12 µm



- çok ince metalize folyo
- tüm temas noktalarını çok hassas bir şekilde renklendirir
- bulaşık temas noktaları yok
- sert vuruşta iyi boyar
- antistatik
- hassas temaslar
- oklüzal yüzeye iyi uyum sağlar
- tüm materyaller için uygundur
- test ve çekme sırasında yırtılmaz
- kuru, seramik malzemeler üzerinde iyi renk bırakır
- 75 mm genişliğinde rulo olarak da mevcuttur
- renksiz versiyonu da mevcuttur (shimstock film)



## Arti-Fol® 8 µm




- çok ince folyo
- tüm temas noktalarını çok hassas bir şekilde renklendirir
- bulaşık temas noktaları yok
- sert vuruşta iyi boyar
- hassas temaslar
- oklüzal yüzeye iyi uyum sağlar
- tüm materyaller için uygundur
- test ve çekme sırasında yırtılmaz
- 75 mm genişliğinde rulo olarak da mevcuttur
- tek taraflı veya çift taraflı boya ile kaplı



## OccluSense® 60 µm

- çığneme kuvvetlerinin diş üzerinde renk olarak ve dijital olarak sütun grafik olarak görülebilir
- sivri veya düz cusp – fossa ilişkileri farklı sütun renkleri ile görselleştirilmiştir
- genişletilmiş oklüzal görünüm statik ve dinamik oklüzyon
- İmplant üzerindeki aksiyal kuvvetlerin görselleştirilmesi ve protez üzerindeki kuvvetler
- oklüzal erken temasların tanınması
- geliştirilmiş hasta iletişimi ve eğitim
- elektronik basınç sensörü: 60 µm inceliğinde, esnek ve kırmızı renk ile kaplı
- çığneme kuvveti dağılımının yüzde gösterimi
- kolay dokümantasyon OccluSense® iPad uygulamasıyla

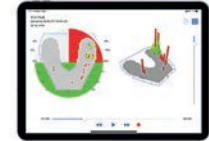



CELLERANT  
BEST OF CLASS  
TECHNOLOGY AWARD  
2019



## Bausch OccluSense® – Dijital oklüzyon kontrolü


Oklüzal temasları eksiksiz bir şekilde görselleştirmek, OccluSense®'i geliştirirken belirlediğimiz en önemli hedeflerden biriydi. OccluSense® sensörü, tıpkı kanıtlanmış artikülasyon kağıtları ve folyoları gibi net bir şekilde işaretleme yapma özelliğine sahiptir.

OccluSense®, yalnızca son oklüzal teması belirlemekle kalmaz, aynı zamanda statik ve dinamik hareketlerin tamamını kaydederek ayrıntılı bir analiz sunar. Geleneksel oklüzyon test malzemelerine kıyasla, çok daha kapsamlı bilgiler sağlayarak ilk temastan maksimum interküspidasyon pozisyonuna kadar tüm mandibular hareketleri kaydeder ve yorumlar.

OccluSense® sistemi, her diş hekiminin oklüzyonu kaydetmesini, incelemesini ve adım adım değerlendirmesini sağlar. Yenilikçi teknolojisi sayesinde, 2019 yılında San Francisco'daki ADA/FDI Kongresi'nde Cellerant "Sınıfının En İyisi Teknoloji Ödülü"ne layık görülmüştür. Ayrıca, 2021 OE-A (Organic and Printed Electronics Association) Yarışması'nda "Yeni Ürünler" kategorisinde birincilik ödülü kazanmıştır.

OccluSense® hakkında daha fazla bilgi için:

[www.occlusense.com](http://www.occlusense.com)

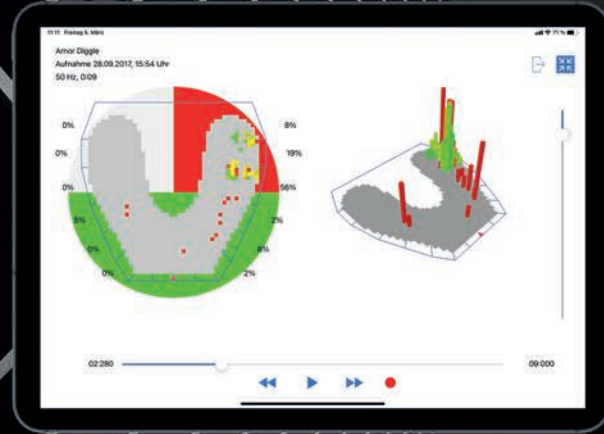



## Bütüncül dijital oklüzyon testi tedavi yaklaşımı

Yeni, ödüllü, kullanımı kolay ürün "Occlu-Sense®" Bausch'un ürünü, oklüzal yüzeylerdeki çiğneme basıncı dağılımının geleneksel ve dijital kaydını birleştiriyor.

OccluSense® cihazı 60 µm inceliğinde tek kullanımlık tam olarak kırmızı renk kaplamalı basınç sensörü. Geleneksel oklüzyon test folyosu ile tamamen aynı şekilde kullanılır ve aşağıdaki ürün fonksiyonlarını sağlar:

- Tüm diş arkının muayenesi
- Zaman içinde çiğneme basıncı dağılımının temsili
- Yüzde çiğneme basıncı dağılımının temsili
- Laterotrüzyon hareketlerinin temsili ve olası mediotrüzyon tarafındaki olası etkileşimler
- Oklüzyonun analog ve dijital durumlar

- Tedavi adımlarının resimli dokümantasyonu öncesi ve sonrası karşılaştırması yoluyla
- Örneğin splint tedavisi, protez, implant restorasyonları için kullanılabilir ve osteopati ve fizyoterapi alanında.

### OccluSense® sistemi:

OccluSense® el cihazı

Sensörlerin uygulanması için pille çalışan el cihazı

### OccluSense® şarj cihazı

Kablosuz şarj için endüktif şarj cihazı

### OccluSense® Sensör - Elektronik basınç sensörü


- 60 µm inceliğinde
- esnek
- kırmızı renk ile kaplı
- oklüzal basıncın tespit edilmesini sağlar 256 basınç seviyesinde
- hem statik ve de dinamik oklüzyonu kontrol etmek için

### OccluSense® CenterFix Merkezleme aygıtı BK 5040

OccluSense® sistemi hakkında daha fazla bilgi şu sitede bulunabilir: [www.occlusense.com](http://www.occlusense.com)

|  |    |      |    | REF     |
|--|----|------|----|---------|
|  |    | Set  |    | BK 5000 |
|  | L  | 25 x | == | BK 5025 |
|  | XL | 25 x | == | BK 5035 |
|  |    | 10 x | ●  | BK 5040 |


# Progresif renklendirme prensibi

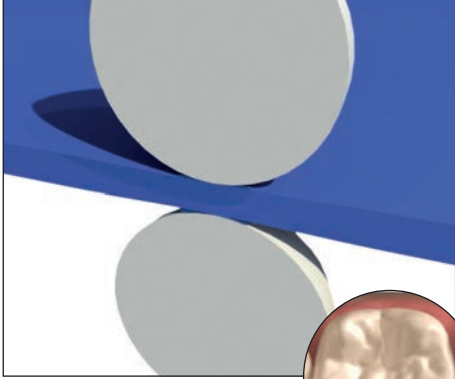

**Hafif basınç**


Fizyolojik diş temasında aşamalı renk gölgelendirme görünür.

İnterferans kontakları yoktur.

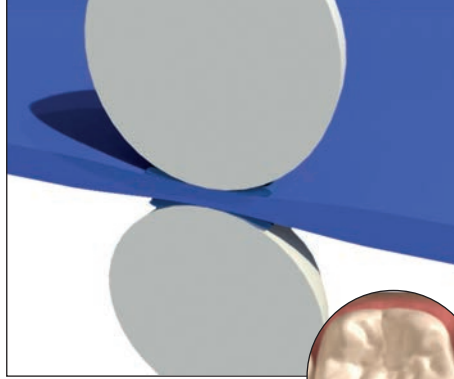

**Daha fazla basınç**

Daha güçlü çiğneme basıncı kağıttan daha fazla renk ortaya çıkar yaklaşan temas noktalarından ileri gelir. Bu sonuç progresif test kağıdı için tipiktir. Temas noktasının etrafında bir daire çizilmesi.

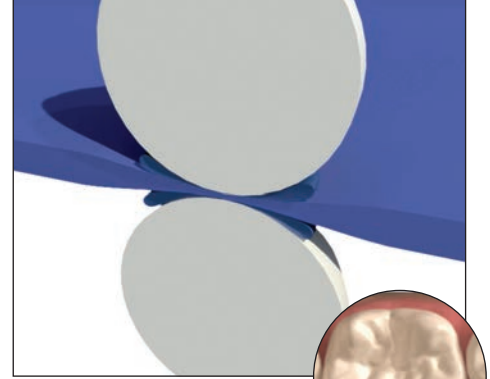

**Maksimum basınç**

Maksimum interküspidasyon veya engelleyici bir temas durumunda ortasında olduğu gibi bu etki daha da belirgindir. Gerçek temas noktası açık renkte işaretlerin halka halindeki çevresi koyu renkte görünür.

# Progresif renklendirme prensibi



200 µm Artikülasyon Kağıtları, "PROGRESS 100" 100 µm, Arti-Ceram 200 µm ve 100 µm ile 80 µm Artikülasyon İpekleri, aşamalı renk aktarımı özelliğine sahiptir.



Statik oklüzyonun doğru bir şekilde temsil edilmesi için Bausch artikülasyon kağıtları ve ipekleri, progresif renklendirme prensibi ile mükemmel bir uyum sağlar.

Yumuşak dokumasız kağıt ve ipeğin sünger benzeri yapısı, baskı uygulandığında mürekkebi emer ve diş temas noktalarını hassas bir şekilde işaretler. Progresif renklendirme prensibi, çiğneme kuvveti arttıkça daha fazla mürekkebin serbest bırakılması ve oklüzal yüzeylere aktarılması anlamına gelir.


Mürekkep formülasyonunda bulunan Transculase® yapışma artırıcı, farklı materyallerde ve doğal diş yüzeylerinde üstün sonuçlar sunar.

Basınca dayanıklı artikülasyon kağıdı, çiğneme basıncının hassas bir şekilde dağılımını göstererek detaylı bir oklüzyon analizi sağlar.

Progresif muayene ürünlerimiz, tükürükle ıslatılmış oklüzal yüzeyler için idealdir. Oklüzyon temaslarının en doğru şekilde temsil edilmesi için farklı test ürünlerinin kombinasyon halinde kullanılması önerilir.



# İki aşamalı yöntemle oklüzyon testi

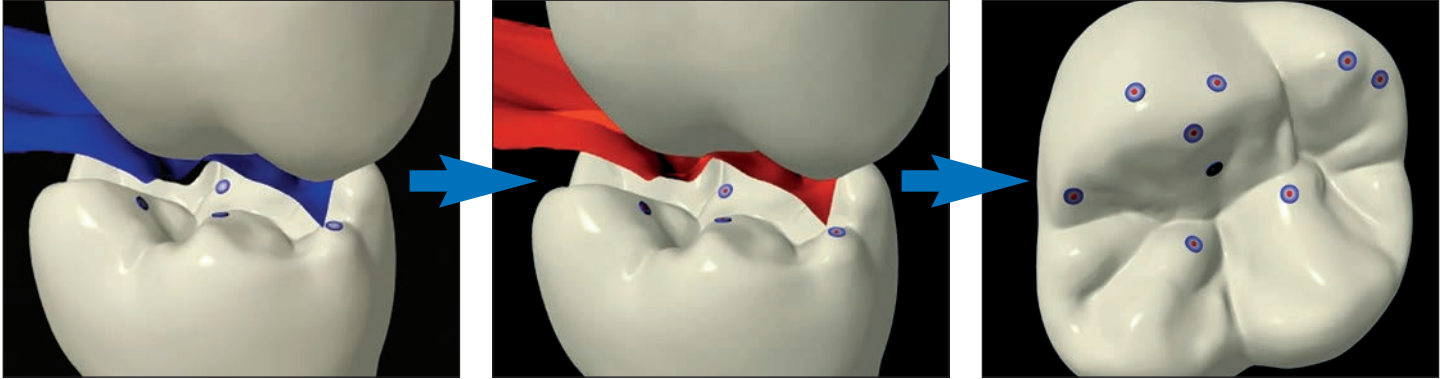

Tükürükle ıslanmış oklüzal yüzeylerde bile temas noktalarını daha görünür hale getirmek için daha ince test folyolar ile birlikte progresif test kağıdının kullanılmasını öneriyoruz.

İlk adımda, oklüzyon 200 µm artikülasyon kağıdı ile veya "PROGRESS 100" 100 µm kontrol edilmelidir. Bu kağıtlar tükürüğü emer ve Arti-Fol ile ikinci adım için mükemmel

bir temel yaratır. Temas noktalarını hassas bir şekilde işaretlemek için Arti-Fol® metalik 12 µm veya Arti-Fol® 8µm folyolar kullanılmaktadır.

Bu 2 aşamalı yöntemin avantajları şunlardır:

- Oklüzyon noktalarının veya oklüzal yüzeyler üzerinde farklı görüntülenmesi
- Farklı renkler sayesinde yüksek kontrastlı gösterim

- Oklüzyon folyolarından tükürükle ıslatılmış yüzey üzerinde daha iyi renk aktarımı Transculase® sayesinde.



## Artikülasyon ve oklüzyon kağıtları/artikülasyon ipekleri

Progresif renklendirmeli artikülasyon kağıdımız 1953 yılında şirketimizin temelini oluşturdu.

Kısa bir süre sonra, 80 µm kalınlığında artikülasyon ipekleri ortaya çıktı, günümüzde de özellikle diş laboratuvarında oklüzyon testi için kullanılmaktadır.

1972'de Bausch oklüzyon kağıtlarına 40 µm inceliğinde kağıt eklendi.

2000 yılında PROGRESS 100 ürünü, artikülasyon kağıdı progresif renklendirmeli 100 µm ile tanıtıldı.

# Progresif renkli Bausch Artikülasyon Kağıtları 200 µm



|  |  |  |  | REF                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 52 mm x 18 mm                                                                     | 300 x                                                                             |  | BK 01                                                                                       |
|                                                                                   | 52 mm x 18 mm                                                                     | 300 x                                                                             |  | BK 1001  |
|                                                                                   | 52 mm x 18 mm                                                                     | 300 x                                                                             |  | BK 02                                                                                       |
|                                                                                   | 52 mm x 18 mm                                                                     | 300 x                                                                             |  | BK 1002  |
|  |                                                                                   | 50 x                                                                              |  | BK 03                                                                                       |
|                                                                                   |                                                                                   | 50 x                                                                              |  | BK 04                                                                                       |
|  | 52 mm x 18 mm                                                                     | 300 x                                                                             |  | BK 05                                                                                       |

 = çevre dostu dolum

 = klinik kullanım için önerilir

 = laboratuvarında kullanım için önerilir

# Progresif renkli Bausch Artikülasyon Kağıtları 200 µm



## Progresif renkli Bausch Artikülasyon Kağıtları 200 µm

Progresif renkli Bausch Artikülasyon kağıdı 200 µm çiğneme basıncına bağlı olarak farklı ısıрма kuvvetleri gösterir çiğneme basıncına bağlı olarak tonlu renklendirme:

- HAFİF BASINÇ** – açık renkte işaretleme
- DAHA GÜÇLÜ BASINÇ** – daha koyu işaretleme
- MAKSİMUM BASINÇ** – oklüal temas ve çevresinde koyu renkli halka

Diş hekimî çiğneme basıncı dağılımının kesin bir görüntüsünü alır. Erken temaslar görünür hale gelir.

**Şeritler** |  | 

örneğin diş dolguları, kronlar ve köprüler için (restoratif ve fonksiyonel diş hekimliği)

**At nalı şekli** |  | 

örneğin oklüzal splintler, total protezler için artikülatörde ve hasta üzerinde komple dental arki.

# Bausch PROGRESS 100 Artikülasyon kağıdı 100 µm



|  |  |  |  | REF |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|
|  | 52 mm x 18 mm                                                                     | 300 x                                                                             |  | BK  | 51 |
|                                                                                   | 52 mm x 18 mm                                                                     | 300 x                                                                             |  | BK  | 52 |
|  |                                                                                   | 50 x                                                                              |  | BK  | 53 |
|                                                                                   |                                                                                   | 50 x                                                                              |  | BK  | 54 |
|  | 52 mm x 20 mm                                                                     | 50 x                                                                              |  | BK  | 57 |
|                                                                                   | 52 mm x 20 mm                                                                     | 50 x                                                                              |  | BK  | 58 |

 = klinik kullanım için önerilir

 = laboratuvarında kullanım için önerilir

# Bausch PROGRESS 100 Artikülasyon kağıdı 100 µm



## Bausch PROGRESS 100 progresif renkli Artikülasyon Kağıdı 100 µm

Yüksek renk depolama hacmine sahip bu yumuşak, elyaf destekli kağıt oklüzal yüzeye tam olarak uyum sağlar. Progresif rengi ile oklüzal bölgeyi tam olarak işaretler.

Bağlayıcı madde Transculase® ve ince bir kağıt ile benzersiz kombinasyon oluşturuldu. Oklüzal temaslar ve yüzeyler hassas bir şekilde çok cilalanmış seramik yüzeylerde ve metal yüzeylerde güzel sonuç gösteriyor.

**At nalı şekli** |  |  |  
örneğin oklüzal splintler, total protezler için artikülátörde ve hasta üzerinde komple dental arki.

**Şeritler** |  |  |  
örneğin diş dolguları, kronlar ve köprüler için (restoratif ve fonksiyonel diş hekimliği)

# Bausch Arti-Ceram Artikülasyon kağıdı yeşil 200 µm ve 100 µm



|  |  |  |  |  |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>Arti-Ceram 200µm</b>                                                           |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |    |
|  | 52 mm x 20 mm                                                                     | 50 x                                                                              |  | BK                                                                                  | 92 |
|  |                                                                                   | 50 x                                                                              |  | BK                                                                                  | 93 |
| <b>Arti-Ceram 100µm</b>                                                           |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |    |
|  | 52 mm x 20 mm                                                                     | 50 x                                                                              |  | BK                                                                                  | 97 |
|  |                                                                                   | 50 x                                                                              |  | BK                                                                                  | 98 |

 = klinik kullanım için önerilir

 = laboratuvarında kullanım için önerilir

# Bausch Arti-Ceram Artikülasyon kağıdı yeşil 200 µm ve 100 µm



## Bausch Arti-Ceram Artikülasyon kağıdı yeşil 200 µm ve 100 µm

Optimal renk uyumunu doğal diş yapısıyla elde etmek için farklı seramik türleri mevcuttur, bunlar arasında Cam Seramik, Zirkonyumdioksit Seramik ve Feldspat Seramik bulunmaktadır.

Bu malzemeler (geçici) kronlar yanı sıra inley ve onleyler için de kullanılır ve olağanüstü estetik için yüksek parlaklıkta cıalanabilir. Ancak, genellikle CAD/CAM teknolojileri kullanılarak üretilen bu parlak malzemelerle oklüzyonu ayarlarken diş hekimleri için zorluklar oluşturur, çünkü bildiğimiz kağıtlar oklüzyonu kontrol etmek için genellikle yetersizdir.

Erken temas noktalarını etkili bir şekilde tanımlayabilmek için bu sorunla yoğun bir şekilde ilgilendik ve bu nedenle yıllardır dental teknikte kabul görmüş YEŞİL rengini tercih ettik. Bu renk tonu, özel renk pigmentleri sayesinde seramiklerin estetik parlak yüzeylerinde belirgin ve kontrastlı olarak ortaya çıkar.

Arti-Ceram ürünümüz 200µm ve 100µm olmak üzere iki kalınlıkta, şeritler halinde ve at nalı şeklinde mevcuttur ve mümkün olan en iyi fonksiyon ve estetiği sağlamak için oklüzyonun hassas bir şekilde ayarlanmasını sağlar.

**Şeritler** |  | 

örneğin diş dolguları, kronlar ve köprüler için (restoratif ve fonksiyonel diş hekimliği)

**At nalı şekli** |  | 

örneğin oklüzal splintler, total protezler için artikülatörde ve hasta üzerinde komple dental arki.

# Progresif Tonlu Bausch Artikülasyonlu İpek 80 µm



|  |  |  | REF    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|  | 80 mm x 3 m                                                                       |  | BK 06  |
|                                                                                   | 80 mm x 3 m                                                                       |  | BK 876 |
|                                                                                   | 80 mm x 3 m                                                                       |  | BK 877 |
|  | 16 mm x 10 m                                                                      |  | BK 07  |
|                                                                                   | 16 mm x 10 m                                                                      |  | BK 08  |

 = klinik kullanım için önerilir

 = laboratuvarında kullanım için önerilir

# Progresif Tonlu Bausch Artikülasyonlu İpek 80 µm



## Progresif Tonlu Bausch Artikülasyonlu İpek 80 µm

Bausch artikülasyon ipeği yüksek kaliteli bir tekstil üründür ve artikülasyon kağıdı progresif renk kağıdı 200 µm ile karşılaştırılabilir özelliklere sahiptir. Bu kumaş yırtılmaya karşı dayanıklıdır ve ince kalınlığı ve esnekliği nedeniyle tüberkül ve fossae mükemmel uyum sağlar.

Artikülasyon ipeğinin boyaması son derece hassastır ve renk gücü çok iyidir. Artikülasyon ipeğinin senelerdir denenmiş ve test edilmiş bir üründür oklüzal temaslarını kontrol etmek için.

Rulolar |  | 

örneğin oklüzal splintler, total protezler için artikulatörde ve hasta üzerinde komple dental arki için.

# Bausch oklüzal kağıtları Arti-Check® 40 µm incelikte



|  |  |  |  | REF   |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 103 mm x 20 mm                                                                    | 200 x                                                                             |  | BK 09 |                                                                                     |
|                                                                                   | 103 mm x 20 mm                                                                    | 200 x                                                                             |  | BK 10 |                                                                                     |
|  | 100 mm x 70 mm                                                                    | 100 x                                                                             |  | BK 11 |                                                                                     |
|                                                                                   | 100 mm x 70 mm                                                                    | 100 x                                                                             |  | BK 12 |                                                                                     |
|  | 16 mm x 15 mm                                                                     |                                                                                   |  | BK 13 | BK 1013                                                                             |
|  | 16 mm x 15 mm                                                                     |                                                                                   |  | BK 14 | BK 1014                                                                             |
|                                                                                   | 22 mm x 10 mm                                                                     |                                                                                   |  | BK 15 | BK 1015                                                                             |
|                                                                                   | 22 mm x 10 mm                                                                     |                                                                                   |  | BK 16 | BK 1016                                                                             |
|  |                                                                                   | 150 x                                                                             |  | BK 17 |                                                                                     |
|                                                                                   |                                                                                   | 150 x                                                                             |  | BK 18 |                                                                                     |
|  | 52 mm x 20 mm                                                                     | 200 x                                                                             |  | BK 61 |                                                                                     |
|                                                                                   | 52 mm x 20 mm                                                                     | 200 x                                                                             |  | BK 62 |                                                                                     |
|                                                                                   | 52 mm x 20 mm                                                                     | 200 x                                                                             |  | BK 63 |                                                                                     |
|  | 103 mm x 20 mm                                                                    | 200 x                                                                             |  | BK 80 |                                                                                     |
|  |                                                                                   | 150 x                                                                             |  | BK 81 |                                                                                     |

 = çevre dostu dolum

 = klinik kullanım için önerilir

 = laboratuvarında kullanım için önerilir

# Bausch oklüzal kağıtları Arti-Check® 40 µm incelikte



## Bausch oklüzal kağıtları Arti-Check® 40 µm incelikte

Bausch oklüzyon kağıtları 40 µm kalınlığında çok ince kağıtlardır, her iki tarafı da sıvı mürekkeple kaplanmıştır. Bu son derece ince nedeniyle eksiksiz renklendirir. Böylece bulaşma temas noktaları yoktur.

Sıvı renklerle kaplı olan kağıtlar oklüzal temasların net bir şekilde görünmesini sağlar. Zor yüzeylerde mesela seramik, kompozit ve tükürükle kaplı olan yüzeylerde bu ürün renklendirir.

Özel renkli kaplı kağıt birçok küçük mikrokapsüllerle doldurulmuştur. Hafif çiğneme basıncıyla bile bu kapsüller patlar ve rengi dışarı verirler. Yüksek mürekkep depolama özelliğine sahip olması nedeniyle tekrarca işaretleme mümkündür.

Bausch Arti-Check® mikro-ince BK 63, BK 80 ve BK 81 (iki renkli) statik ve dinamik görüntülerin gösterilmesi için çok uygundur.

**Yaprak şeklinde** |    
örneğin oklüzal splintler, total protezler için artikülatörde ve hasta üzerinde komple dental arki için .

**At nalı şekli** |    
örneğin diş dolguları, kronlar ve köprüler için (restoratif ve fonksiyonel diş hekimliği)

**Şeritler** |    
örneğin oklüzal splintler, total protezler için (restoratif ve fonksiyonel diş hekimliği)

**Rulolar** |    
Rulo dispenserinden temiz ve ekonomik şekilde çıkarılır  
örneğin diş dolguları, kronlar ve köprüler için (restoratif ve fonksiyonel diş hekimliği)



## Bausch oklüzyon folyoları

1970'lerde gnatholoji diş hekimliğinin önemli bir parçası haline geldi. Uzmanların ihtiyaçlarını karşılamak için, 1979 yılında ürün yelpazemizi ince oklüzyon folyoları ile genişlettik.

1983 yılında Arti-Fol® 8 µm dört farklı renkte piyasaya sürüldü. Bu folyolar tek veya çift taraflı renkli kaplamalı olarak mevcuttur.

1999 yılında folyolarımızın yelpazesi Arti-Fol® metalik 12 µm ile genişletilmiştir.

2020 yılında Arti-Fol® metalik Complete BK 328 ürünü tanıtıldı.

# Bausch Arti-Fol® metalik şimstock folyo 12 µm siyah/kırmızı



|  |  |  |  | REF                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | 22 mm x 20 m                                                                      |  | BK 28                                                                                       |
|  |  | 22 mm x 20 m                                                                      |  | BK 1028  |
|  |                                                                                   | 20 x                                                                              |  | BK 328                                                                                      |

 = çevre dostu dolum

 = klinik kullanım için önerilir

 = laboratuvarında kullanım için önerilir

# Bausch Arti-Fol® metalik şimstock folyo 12 µm siyah/kırmızı



## Arti-Fol® metalik folyo 12 µm siyah/kırmızı

Arti-Fol® metalik siyah/kırmızı bir oklüzyon test folyosudur metalize polyester folyodan oluşan (şimstock folyo) 12 µm kalınlığında ve çift taraflı renkle kaplı.

Bu folyo esnekliği, yırtılma dayanıklılığı ve elektiriklenmemesi özelliklerine sahiptir. İnce olduğundan antagonistlerin daha yakın bir şekilde bir araya gelmesini sağlar.

Rulolar | | |

Rulo dispenserinden temiz ve ekonomik şekilde çıkarılır örneğin diş dolguları, kronlar ve köprüler için (restoratif ve fonksiyonel diş hekimliği)

## Arti-Fol® metalik Complete 12 µm

Arti-Fol® metalic Complete BK 328, kendini kanıtlamış Arti-Fol® metalik folyo siyah / kırmızı ile yeni ve hijyenik açıdan mükemmel karton tutucu dahildir.

Özel şekli nedeniyle, Arti-Fol® metalic Complete sol veya sağ tarafta ayrı ayrı kullanılabilir veya tüm diş arka için.

Lamine karton tutuculu şerit | |

Hijyenik uygulama örneğin diş dolguları, kronlar ve köprüler için (restoratif ve fonksiyonel diş hekimliği)

# Bausch Arti-Fol® metalik şimstock folyo 12 µm



|  |  |  |  | REF    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|
|  |  | 22 mm x 20 m                                                                      |  | BK 30  |  |
|                                                                                   |                                                                                   | 22 mm x 20 m                                                                      |  | BK 31  |  |
|                                                                                   |                                                                                   | 22 mm x 20 m                                                                      |  | BK 32  |  |
|                                                                                   |                                                                                   | 22 mm x 20 m                                                                      |  | BK 33  |  |
|  |                                                                                   | 8 mm x 50 mm 100 x                                                                |  | BK 35  |  |
|  |                                                                                   | 8 mm x 50 mm 100 x                                                                |                                                                                    | BK 38  |  |
|  |  | 16 mm x 20 m                                                                      |                                                                                    | BK 39  |  |
|  |                                                                                   | 75 mm x 20 m                                                                      |  | BK 730 |  |
|                                                                                   |                                                                                   | 75 mm x 20 m                                                                      |  | BK 731 |  |



= klinik kullanım için önerilir



= laboratuvarında kullanım için önerilir

# Bausch Arti-Fol® metalik şimstock folyo 12 µm



## Bausch Arti-Fol® metalik şimstock folyo 12 µm

Arti-Fol® metalik, bir oklüzyon test folyosudur metalize polyester folyo (şimstock film) 12 µm kalınlığında ve tek veya çift taraflı renk ile kaplanmıştır.

Bu folyo esnekliği, yırtılma dayanıklılığı ve elektriklelenmemesi özelliklerine sahiptir. İnce olduğundan antagonistlerin daha yakın bir şekilde bir araya gelmesini sağlar.

Folyo, tüm materyallerde oklüzyon temas noktalarını hassas bir şekilde işaretler ve hatalı kontaklar bu nedenle azalır.

Folyonun metalize edilmiş arka yüzü nedeniyle kaplanmamış taraf ile kaplanmış taraf arasında ayrıt edilir. Buna ek olarak folyo, metalize olması nedeniyle anti-statik özelliklere sahiptir.

Arti-Fol® metalik BK 35 ürün çeşidinin 8mm genişliğinde, önceden kesilmiş şeritleri, bu Arti-Fol® forseps BK 145 (sayfa 57) ürünlerle birlikte kullanılır. Örneğin, köprü veya kuren yerleştirirken aproksimal temaslara için.

Arti-Fol® metalik ürününe ek olarak, klasik genişliklerde renksiz Shimstock folyo 8mm genişliğinde ve 16mm genişliğinde bulunur. Shimstock protokolü web sitemizden indirilebilir:

[www.bauschdental.com/downloads](http://www.bauschdental.com/downloads)

**22 mm genişliğinde rulolar** |  |  | Rulo dispenserinden temiz ve ekonomik şekilde çıkarılır örneğin diş dolguları, kronlar ve köprüler için (restoratif ve fonksiyonel diş hekimliği)

**75 mm genişliğinde rulolar** |  |  | örneğin splintlerinde, total protezlerde, tüm dental arkin artikülasyonda test edilmesinde

# Arti-Fol® artikülasyon folyo 8 µm



|  |  |  |  | REF    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | 22 mm x 20 m                                                                      |  | BK 20  | BK 1020                                                                             |
|                                                                                   |  | 22 mm x 20 m                                                                      |  | BK 21  | BK 1021                                                                             |
|                                                                                   |  | 22 mm x 20 m                                                                      |  | BK 22  | BK 1022                                                                             |
|                                                                                   |  | 22 mm x 20 m                                                                      |  | BK 23  | BK 1023                                                                             |
|                                                                                   |  | 22 mm x 20 m                                                                      |  | BK 24  | BK 1024                                                                             |
|                                                                                   |  | 22 mm x 20 m                                                                      |  | BK 25  | BK 1025                                                                             |
|                                                                                   |  | 22 mm x 20 m                                                                      |  | BK 26  | BK 1026                                                                             |
|                                                                                   |  | 22 mm x 20 m                                                                      |  | BK 27  | BK 1027                                                                             |
|  |  | 75 mm x 20 m                                                                      |  | BK 70  |                                                                                     |
|                                                                                   |  | 75 mm x 20 m                                                                      |  | BK 71  |                                                                                     |
|                                                                                   |  | 75 mm x 20 m                                                                      |  | BK 72  |                                                                                     |
|                                                                                   |  | 75 mm x 20 m                                                                      |  | BK 73  |                                                                                     |
|                                                                                   |  | 75 mm x 15 m                                                                      |  | BK 74  |                                                                                     |
|                                                                                   |  | 75 mm x 15 m                                                                      |  | BK 75  |                                                                                     |
|                                                                                   |  | 75 mm x 15 m                                                                      |  | BK 76  |                                                                                     |
|                                                                                   |  | 75 mm x 15 m                                                                      |  | BK 77  |                                                                                     |
|  |  | 75 mm                                                                             |                                                                                     | BK 137 |                                                                                     |
|                                                                                   |  | 22 mm                                                                             |                                                                                     | BK 139 |                                                                                     |

 = klinik kullanımlar için önerilir

 = laboratuvarlarda kullanım için önerilir

# Arti-Fol® artikülasyon folyo 8 µm



## Arti-Fol® artikülasyon folyo 8 µm

Arti-Fol® 8 µm, 8 µm kalınlığında polyester folyodan oluşan çok ince bir oklüzyon test folyodur. Tek veya çift taraflı renk ile kaplıdır.

İnce renk kaplaması mum, pigmentlerden ve hidrofilik maddelerden oluşan malzemedir. Farklı materyallerde daha iyi işaretlemesi için. Bu folyo çok incedir böylece oklüzal temasların net bir kontur gösterimi sağlar. Bausch Arti-Fol® oklüzyon folyoları özellikle statik ve dinamik oklüzyonun temsili için çeşitli renklerde oluşturuldu.

Dört farklı renk statik ve farklı fonksiyonel özellikleri göstermek için kullanılabilir. Fonksiyonel hareketler (protrüzyon, laterotrüzyon, mediotrüzyon tarafı).

Farklı renkler laboratuvarında mum konseptleri için de kullanılabilir.

### 22 mm genişliğinde rulolar

Rulo dispenserden kolay ve ekonomik çıkarma örneğin diş dolguları, kronlar ve köprüler için (restoratif ve fonksiyonel diş hekimliği)

Arti-Fol® 75 mm genişliğinde 8 µm artikülasyon folyosu Oklüzyon test folyoları dört renkte ve ayrıca 75 mm genişlikte mevcuttur. Geniş folyolar çoğunlukla laboratuvarında kullanılır.

Artikülatörde kolay kullanım için özel Bausch Y tutucumuz BK 140'ı sunuyoruz (sayfa 59).

### 75 mm genişliğinde rulolar

örneğin splintler, total protezler, artikülatörde tüm dental arkin test edilmesi için



## Sıvılar ve Spreyler


1980'lerden beri protez tedavisinde kullanılan sıvılar ve spreyler sunuyoruz. Protez restorasyonların yerleştirilmesi için sıvılar ve spreyler:

- Arti-Spot® temas boyası, uygunluğun doğruluğunu kontrol etmek için kronlar, kolayca uygulanabilir
- Sprey şişesinde aynı uygulamalar için Arti-Spray®

2016 yılında basınç noktalarının işaretlenmesi için Bio-Ink-Flow piyasaya sürülmüştür.

Aynı dönemde Arti-Brux® test boyası da eklenmiştir.

# Bausch Arti-Spot® Yüksek Nokta İndikatörü

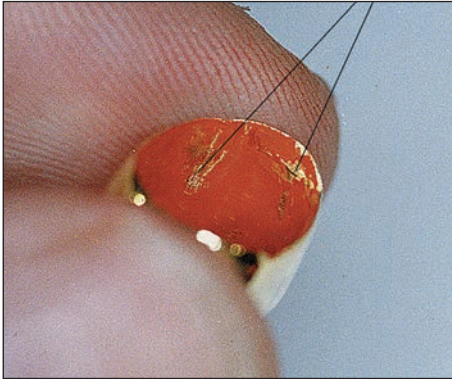

|               |  |  |   | REF   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|  Arti-Spot® 1 |                                                                                   | 15 ml                                                                             |  | BK 85 |
| Arti-Spot® 2                                                                                   |                                                                                   | 15 ml                                                                             |  | BK 86 |
| Arti-Spot® 3                                                                                   |                                                                                   | 15 ml                                                                             |  | BK 87 |



= klinik kullanım için önerilir



= laboratuvar kullanımı için önerilir

# Bausch Arti-Spot® Yüksek Nokta İndikatörü



## Bausch Arti-Spot® Yüksek Nokta İndikatörü

Arti-Spot®, sıvı temas boyasıdır ve uygunluğunu kontrol etmek için kullanılır kronların, inleylerin, onleylerin, teleskopik kronların, freze,koşe ve sürtünme yüzeylerinin doğru oturması için.

Arti-Spot® test edilecek yüzeye bir fırça ile uygulanır ve çözücünün buharlaşması nedeniyle birkaç saniye sonra yaklaşık 3 µm'luk ince bir film bırakır. Her temas, boya derisini tam olarak temas noktasında bozar. Temas yüzeyi daha sonra bu noktada açıkça görülebilir.

Farklı materyallerde yüksek kontrastlı görüntü için üç farklı renk sunuyoruz.

Kullanımdan sonra Arti-Spot® kolayca temizlenebilir: mekanik aşındırma ile sıcak su (diş fırçası veya diş arası fırçası). Alkol, izopropil alkol veya buhar son boya izlerini bile temizleyecektir.

Arti-Spot® alçı modellerden bile hassas bir fırça ile çıkarılabilir.

Fırçalı şişe |  | 

Test edilecek yüzeye hassas uygulama (direkt ağız içi uygulanmaz) örn. kronlar, inleyler, onleyler, teleskopik kronlar, freze için ve sürtünme yüzeylerinin tespit etmek için.

# Bausch Arti-Spray® Oklüzyon Spreyi



|  |  |  |   | REF    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|  | Arti-Spray®                                                                       | 75 ml                                                                             |  | BK 285 |
|                                                                                   | Arti-Spray®                                                                       | 75 ml                                                                             |  | BK 286 |
|                                                                                   | Arti-Spray®                                                                       | 75 ml                                                                             |  | BK 287 |
|                                                                                   | Arti-Spray®                                                                       | 75 ml                                                                             |  | BK 288 |



= klinik kullanım için önerilir



= laboratuvar kullanım için önerilir

# Bausch Arti-Spray® Oklüzyon Spreyi



## Bausch Arti-Spray® Oklüzyon Spreyi

Arti-Spray® homojen bir işaretleme spreyidir ve dört farklı renkte mevcuttur oklüzal temasları ve uygunluğu kontrol etmek için kronların, köprülerin, protezlerin ve bölümlü protezlerin uyum doğruluğu için.

Arti-Spray® hassas bir şekilde dozajlanabilir ve ince toz halinde bir tabaka oluşturur. Su veya buhar ile kolayca çıkarılabilen toz boyadır. Arti-Spray® 3-5 cm'lik bir mesafeden, oklüzal yüzey, kuron veya köprünün iç kısmına sıkılır. Tüm temas noktaları hatalar olarak kolayca tanınabilir. Gerekirse temas noktalarını renkli bir kalemle

işaretleyin veya Bausch Arti-Fol® test filmi ayrıca kullanın.

Arti-Spray®, kronlar veya köprüler yerleştirme sırasında ara kontaklar için de kullanılabilir.


### Sprey kutusu

BK 285 |

BK 286 | BK 287 | BK 288 | | | MD

Test edilecek yüzeye çabuk uygulama (direkt ağız içi uygulanmaz) örn. kronlar, inleyler, onleyler, teleskopik kronlar, freze için sürtünme yüzeylerinin tespit etmek için.

# Bausch Bio-Ink®-Flow protez yara işaretleyici

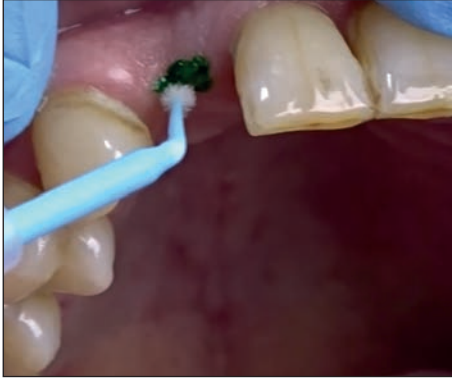

|  |  |  |  | REF    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|  | Set                                                                               | 1 ml                                                                              | ●                                                                                  | BK 205 |
|  |                                                                                   | 1 ml                                                                              | ●                                                                                  | BK 206 |

 = klinik kullanımı için önerilir

# Bausch Bio-Ink®-Flow protez yara işaretleyici



## Bausch Bio-Ink®-Flow protez yara işaretleyici

Bio-Ink®-Flow yeşil, uygulaması kolay bir macundur. Mukoza üzerindeki yaraları protez içinde görüntülenmesi için üretilmiştir.

Bio-Ink -Flow mukosa, titreşim hattı (ah-hattı), dudak ve yanak frenulum bölgelerini işaretlemek için kullanabilmiz.

Gerekli mukoza bölgeleri önceden kuru olması lazım. Bio-Ink®-Flow sürülür ve protezi yerleştirdikten sonra protezin alt tarafına aktarılır bu renk. Bu da tekrar elden geçirilebilir.

Kanüllü aplikasyon şırıngası |  | Set BK 205: tek kullanımlık aplikatörler, aplikatör tutucu dahil. Mukozaya hassas uygulama

Kanüllü aplikasyon şırıngası |  | BK 206: Mukozaya hassas uygulama

# Bausch Arti-Brux® Oklüzyon Test Boyası



|  |  |  |   | REF   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|  | Applicator                                                                        | 0,15 ml                                                                           |  | BK 88 |
|  | Set                                                                               | 15 ml                                                                             |  | BK 89 |

 = klinik kullanım için önerilir

# Bausch Arti-Brux® Oklüzyon Test Boyası



## Bausch Arti-Brux® Oklüzyon Test Boyası

Arti-Brux® kırmızı oklüzyon test boyasıdır ve dinamik hareketlerin görüntülenmesi için kullanılır. Yüksek cilalı seramik kron, köprülerde, protezlerde ve splintlerde (gece plağı) uygulanır.

Tükürüğe dayanıklı, ince ve düzgün renkte boya hastanın dinamik oklüzyonunun uzun bir süre boyunca (maksimum 24 saat) görüntülenmesini sağlar.

Böylece parafonksiyonlar (bruksizm) sert oklüzal splintlerde (gece plağı) veya protez restorasyonlarda görünür hale getirilebilir.

Splintlerde anterior kanin hareketleri özellikle kontrol edilebilir.

Tek kullanımlık fırçalı şişe BK 89 | 

Restoratif ve protetik restorasyonların yanı sıra splintlerin (gece plağı) üzerinde hassas kullanım

Tek kullanımlık aplikatör BK 88 | 

Restoratif ve protetik restorasyonların yanı sıra splintlerin (gece plağı) üzerinde hassas kullanım



## Arti-Pink ısıırma Kayıt Mumu

2024 yılında Arti-Pink Bite Wax ürününü programımıza dahil ettik.

Isırma kayıt mumları, 19. yüzyıla kadar uzanmakta olup, diş hekimliğinin daha sistematik ve bilimsel hale gelmeye başladığı dönemlerde kullanılmaya başlanmıştır. Bu mumlar, dişlerin ve hastanın ısırma pozisyonunun hassas bir şekilde belirlenmesi için geliştirilmiş olup, kron, köprü veya protez gibi protetik çalışmalar için kullanılmaktadır.

Yeni malzemeler ve teknolojik gelişmeler (örneğin, silikonlar, diğer ölçü materyalleri ve dijitalleşme) ortaya çıkmasına rağmen, ısırma kayıt mumları diş hekimliğinde hala önemli ve yaygın olarak kullanılan bir materyal olmaya devam etmektedir.

Mumun özgün özellikleri, belirli tedavi yöntemlerinde avantajlı bir şekilde kullanılabilir.

# Bausch Arti-Pink Bite Wax



|  |  |  |  | REF     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|  | 150 x 80 x 3 mm                                                                   | 12 x                                                                              | ●                                                                                   | BK 6003 |
|  | „L“ 79 x 68 x 3 mm                                                                | 24 x                                                                              | ●                                                                                   | BK 6016 |
|  | „M“ 68 x 60 x 3 mm                                                                | 24 x                                                                              | ●                                                                                   | BK 6017 |
|  | „S“ 64 x 56 x 3 mm                                                                | 24 x                                                                              | ●                                                                                   | BK 6018 |



= klinik kullanım için önerilir



= laboratuvarında kullanım için önerilir

# Bausch Arti-Pink Bite Wax



## Bausch Arti-Pink Bite Wax

Bausch'un Arti-Pink Bite Wax ürünü hassas ısırma kaydı için kullanılır ve final ısırmada konturların tam olarak yeniden üretilmesini sağlar. Mükemmel şekillendirme özellikleri ile dikkat çeker.

Kalınlığı 3 mm olan bu ekstra sert mum sadece 150 mm x 80 mm plaka olarak değil, aynı zamanda hazır S, M ve L boyutlarında oval formda da mevcuttur.

Arti-Pink Bite Wax'ı kullanmak için ekstra sert mumu sıcak suda yaklaşık 55° C erime sıcaklığına ulaşana kadar ısıtın. Böylece şekillendirilebilir ve hassas ısırma kaydı için kullanıma hazır hale gelir.

### Mum Plağı | |

Kendini kanıtlamış bir kayıt mumu, protetik restorasyonlar için (örneğin total protezler) ve genel olarak çene ilişkisini belirlemek için uygundur.

### Oval Form | |

Önceden hazırlanmış oval formlarda olan bir kayıt mumu. Protez uygulamaları (örneğin total protezler) ve genel olarak çene ilişkilerinin belirlenmesi için uygundur.



## Bausch Fleximeter®-Strips

Fleximeter®, 1980 gibi erken bir tarihte tek silikonlu bir enstrüman olarak ürün yelpazemize eklenmiştir. Bugünkü ürünün daha da geliştirilmiştir 2002 yılında Fleximeter®-Strips piyasa sürüldü.

# Bausch Fleximeter®-Strips



|  |  |  |                                                                                                                                                                          | REF    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|  | 1,0 mm                                                                            | 15 x                                                                              |                                                                                                                                                                         | BK 250 |
|                                                                                   | 1,5 mm                                                                            | 15 x                                                                              |                                                                                                                                                                         | BK 251 |
|                                                                                   | 2,0 mm                                                                            | 15 x                                                                              |                                                                                                                                                                         | BK 252 |
| 1,0 mm   1,5 mm   2,0 mm                                                          |                                                                                   | 3 x 5 = 15                                                                        |    | BK 253 |
| 1,0 mm   1,5 mm   2,0 mm                                                          |                                                                                   | 3 x 1 = 3                                                                         |    | BK 254 |



= klinik kullanım için önerilir



= laboratuvarında kullanım için önerilir

# Bausch Fleximeter®-Strips



## Bausch Fleximeter®-Strips

Fleximeter®-Strips, esnek bir mesafe ölçerdir. Üç farklı kalınlıkta sterilize edilebilir silikon. Restorasyonlarda hazırlama mesafelerinin belirlenmesi için.

Örneğin aşınmış dişlerde veya splintlerde ( gece plağında), kapanışın kontrollü bir şekilde yükseltilmesiyle bir ısıрма profili oluşturmak için Fleximeter® şeritleri aşağıdaki kalınlıklarda kullanılabilir. Kalınlıklar 1,0 mm, 1,5 mm ve 2,0 mm'dir.

Preparasyon mesafelerini kontrol etmek için Fleximeter®-Strips, Arti-Spot® boyası ile sağlanabilir veya Arti-Spray® ile uygulanabilir. Yetersiz mesafe bölgesi renkli bir işaret olarak diş üzerinde görünür.

Silikon mesafe ölçerdir |  |  | Preparasyon mesafelerini kontrol etmek için




## Bausch Enstrüman ve Aksesuarları

İyi düzenlenmiş ısıрма çerçeveleri ve kağıt, Arti-Fol tutucuları, rahat bir kullanım sağlar.

Ayrıca bu tutucular tek, çift taraflı oklüzyon kontrolü veya ara yüzey kullanımı için.

# Bausch Kağıt ve Arti-Fol® tutucu

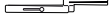

|  |  |  |  | REF    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|  |                                                                                   | 1 x                                                                               |                                                                                    | BK 132 |
|  |                                                                                   | 1 x                                                                               |                                                                                    | BK 133 |
|  |                                                                                   | 1 x                                                                               |                                                                                    | BK 142 |
|  |                                                                                   | 1 x                                                                               |                                                                                    | BK 144 |
|  |                                                                                   | 1 x                                                                               |                                                                                    | BK 145 |

 = klinik kullanım için önerilir

# Bausch Kağıt ve Arti-Fol® tutucu



## Bausch Kağıt ve Arti-Fol® tutucu

Arti-Fol® tutucular BK 132 | 

Artikülasyon-oklüzyon kağıtlarımızın ve folyolarımız güvenli tutulması için uzunlama oluklu kendinden kilitlemeli Arti-Fol® tutucu BK 132'yi tavsiye ederiz.

Tutucu "Miller" BK 142 | 

"Miller" tipi artikülasyon kağıt tutucusu, çeşitli türlerdeki artikülasyon kağıtlarını tutmak için yüksek kaliteli bir tutucudur.

Arti-Fol® tutucu „SteriSlide“ BK 144 | 

Bausch Arti-Fol® tutucular SteriSlide uzunlamasına oluklu. Böylece folyolara daha iyi tutuluyor. SteriSlide tın birde sürgüsü var. Bu sürgü tutucuyu açık tutuyor ve araları sterilizasyonda daha iyi temizlenebilir.


Arti-Fol® tutucu aproksimal temaslar için BK 145 | 

Dr. Müller tarafından tasarlanan Arti-Fol® tutucu kronların hızlı ve düzgün bir şekilde aproksimal bölgelerinde oturması için üretilmiştir. Tutucunun yüksek sıkma kuvveti, oklüzyon folyolarının her iki yüzünü de iyice sıkıştırır ve böylece diş hekiminin temas bölgesini kesin ve hatasız bir şekilde düzeltmesine yardımcı olur. Bu tutucu ile folyo çabuk ve kolay bir şekilde yerleştirilebilir. Tutucuda her-

hangi bir boşluk yoktur böylece bildiğiniz yöntemlerle temizleyip ve sterilize edebilirsiniz.

Aproksimal temaslar için kullanılan Arti-Fol® tutucu bir alman üründür ve uzun ömürlü olmasını sağlayan yüksek kalitede çelikten üretilmiştir. 12µ'lık metalik Arti-Fol® folyoların, bu tutucu ile kullanılmak üzere 8 mm genişliğinde mevcuttur. Yırtılmaya karşı üst düzeyde dayanıklılık, mükemmel işaretleme özelliğine sahiptir. İnce olması nedeniyle Arti-Fol® metalik, köprü veya kronların yerleştirilmesi sırasında aproksimal temasların test edilmesi açısından idealdir.

# Bausch ısırma çerçevesi ve ekipman

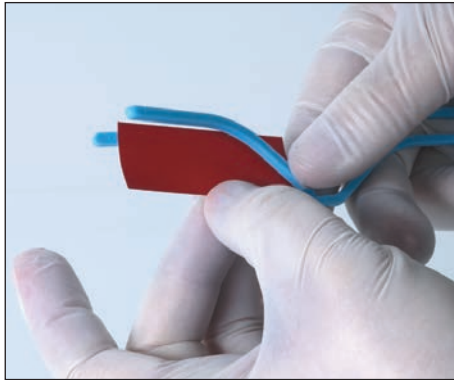

|  |  |  |  | REF    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|  |                                                                                   | 1 x                                                                               |                                                                                    | BK 130 |
|  |                                                                                   | 1 x                                                                               |                                                                                    | BK 133 |
|  |                                                                                   | 1 x                                                                               |                                                                                    | BK 140 |
|  |                                                                                   | 5 x                                                                               |                                                                                    | BK 143 |

|  |  |  |  | REF    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|  |                                                                                   | 1 x                                                                               |                                                                                    | BK 137 |
|  |                                                                                   | 1 x                                                                               |                                                                                    | BK 139 |




= klinik kullanım için önerilir



= laboratuvarında kullanım için önerilir

# Bausch ısırma çerçevesi ve ekipman

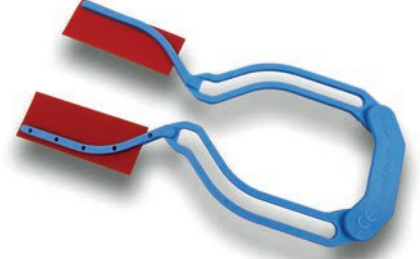

## Bausch ısırma çerçevesi

Esnek ısırma çatalı BK 130 (+ 2x BK 133) |  |

Esnek ısırma çatalımız iki kavisli tutucu BK 133 ve bir kauçuk sap BK 130 kombinasyonudur. Tutucular basitçe kauçuk sapa yerleştirilir ve içinde hareket ettirilebilir.

Fix-Clip Bite Frame BK 143 |  |

Fix-Clip Bite Frame BK 143 ince artikülasyon kağıtlarını ve oklüzyon test folyolarını sabitlemek için kullanılan metal aletlere bir alternatiftir. Elastik sap geri dönüştürülebilir ve sterilize edilebilir.

Bausch-Y tutucu BK 140 |  |

Bausch-Y tutucu 75 mm genişliğinde folyolar veya 80 mm genişliğinde ipekler için. Bu tutucu, artikülatörde kullanılabilecek şekilde geliştirilmiştir.

## Ekipman

Geniş ipeklerimiz ve folyolarımız için BK 137 akrilik dispenser sunuyoruz.

22mm genişliğindeki kağıtlar ve folyolar için plastik bir dispenser mevcuttur bir metal yırtma ucu ile sipariş numarası BK 139.



Dr. Jean Bausch GmbH & Co. KG  
Oskar-Schindler-Straße 4  
D-50769 Köln - Germany  
Tel: +49-221-70936-0  
Fax: +49-221-70936-66  
info@bauschdental.de  
www.bauschdental.de

Bausch Articulating Papers, Inc.  
12 Murphy Drive  
Nashua, NH 03062, U.S.A.  
Tel: +1-603-883-2155  
Tel: 888-6-BAUSCH  
Fax: +1-603-883-0606  
info@bauschdental.com  
www.bauschdental.com

Bausch Articulating Papers (Australasia) Pty. Ltd  
ABN 73093760402  
G.P.O. Box 3733, Sydney NSW 2001, Australia  
Tel: +61-2-9345-1945  
Fax: +61-2-9345-1955  
info@bauschdental.com.au  
www.bauschdental.com.au

[www.bauschdental.com](http://www.bauschdental.com)

Bausch Articulating Papers Japan K. K.  
5F, 1-1-31, Nishimidorigaoka  
Toyonakashi, Osaka 560-0005 - Japan  
Tel: +81 6-6845-0020  
Fax: +81 6-6845-0024  
E-Mail: info@bauschdental.jp  
Web: www.bauschdental.jp

Bausch Importação de Materiais Odontológicos Ltda.  
Rua Paulo Eduardo Xavier de Toledo, 379 salas 8 e 9  
13304-240 Itu-SP, Brasil  
Tel: +55 11 3020-9263  
vendas@bauschbrasil.com.br  
www.bauschbrasil.com.br

Bausch Articulating Papers Co., Ltd.  
#1004, The O Ville B/D, 344, Jong-Ro, Jongno-Gu  
Seoul 03114, Korea  
Tel: +82 2-2236-0158  
Fax: +82 2-6499-9158  
info@bauschdental.kr  
www.bauschdental.kr

