


Bausch

WE MAKE OCCLUSION VISIBLE



МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ
АРТИКУЛЯЦІЇ ТА ОКЛЮЗІЇ

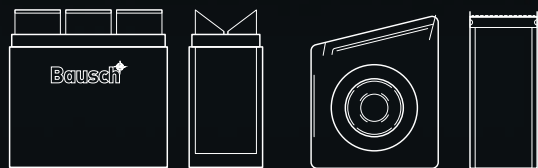





Візуалізуємо оклюзію

Стоматологи доктор Жан Бауш та доктор Ганс Бауш, засновники компанії, вже на ранніх етапах зрозуміли необхідність розробки чутливого до жувального тиску артикуляційного паперу, щоб максимально точно візуалізувати оклюзію.

З 1953 року компанія Dr. Jean Bausch GmbH & Co. KG спеціалізується на виробництві артикуляційного паперу з прогресивною передачею кольору. Перевірений часом продукт ВК 01 став першим артикуляційним папером, який візуалізував різну силу жувального тиску за допомогою різних відтінків кольору. Цей принцип прогрес-



сивної передачі кольору залишається важливим методом для точного визначення завищених контактів.

Точна передача кольору на таких поверхнях, як кераміка, акрил або метали, є нашим головним пріоритетом.

Отже, ми розробили широкий асортимент матеріалів різної товщини, форми та кольору для перевірки артикуляції та оклюзії, ставши одним з провідних світових виробників.

Як сімейне підприємство, в якому працює вже друге покоління, ми продовжуємо зосереджуватися на інноваціях та наукових розробках продуктів. Ми представили нову систему OccluSense® для цифрового контролю оклюзії на виставці IDS 2019 у Кьольні, Німеччина.



Місіс Евелін Бауш, дружина доктора Ганса Бауша, приєдналася до компанії в 1961 році Андре та Петер Бауш (сини доктора Ганса Бауша та Евелін Бауш) є керуючими директорами компанії Dr. Jean Bausch GmbH & Co. KG з 1998 року.

Вся наша продукція виробляється строго відповідно до Європейського регламенту щодо медичних виробів під постійним контролем нашої команди із забезпечення якості відповідно до стандарту DIN EN ISO 13485.

Ця брошура в першу чергу призначена для професіоналів, щоб допомогти їм вибрати правильний матеріал для перевірки оклюзії, залежно від мети.




- 1953 - компанія, заснована в Кьольні, випустила перший артикуляційний папір з прогресивною передачею кольору
- 1962 - перша участь у виставці IDS в Кьольні
- 1972 - випуск мікротонкого оклюзійного паперу товщиною 40 мкм
- 1974 - виробництво перенесено в Райнлянд-Пфальц
- випуск підковоподібного паперу
- 1979 - IDS Дюсельдорф: виведення на ринок продукту Arti-Fol®
- заснування американського представництва Bausch Dental Co.
- 1983 - IDS Мюнхен: Arti-Fol® 8 мкм в 4 кольорах
- 1986 - IDS Кьольн: Arti-Spot® кольоровий індикатор для маркування завищених контактів
- 1994 - заснування Bausch Articulating Papers, Inc. в м. Нашуа, штат Нью-Йорк, США
- 1999 - IDS Кьольн: Arti-Fol® metallic фольга 12 мкм
- 2003 - заснування Bausch Articulating Papers (Australasia) Pty. Ltd в Сідней, Австралія
- 2007 - заснування Bausch Articulating Papers Japan K. K., в Осаці, Японія
- заснування Bausch Importação de Materiais Odontológicos Ltd. у Сан-Паулу, Бразилія
- 2009 - розширення виробничих площ у Райнлянд-Пфальці, Німеччина
- 2017 - IDS Кьольн: презентація системи OccluSense®
- 2019 - IDS Кьольн: виведення на ринок OccluSense®
- 2020 - розширення виробничих та навчальних приміщень у Кьольні
- 2021 - заснування компанії Bausch Articulating Papers Co. Ltd. у Сеулі, Корея

Зміст

Оклюдія – Вплив – Наслідки Точне визначення завищених контактів	6
Матеріали Bausch для перевірки артикуляції та оклюзії Перелік товщини	8
OccluSense® - цифровий контроль оклюзії	12
Принцип прогресивної передачі кольору	16
Перевірка оклюзії за допомогою двоетапного методу	18
Артикуляційний та оклюзійний папір/Артикуляційний шовк	20
Артикуляційний папір з прогресивною передачею кольору 200 мкм	22
Артикуляційний папір PROGRESS 100 100 мкм	24
Артикуляційний папір ARTI-CERAM 200 мкм і 100 мкм	26
Артикуляційний шовк з прогресивною передачею кольору 80 мкм	28
Артикуляційний папір Arti-Check® мікротонкий 40 мкм	30
Артикуляційні плівки Bausch	32
Bausch Arti-Fol® metallic Shimstock 12 мкм чорна / червона	
Bausch Arti-Fol® metallic Complete 12 мкм чорна / червона	34
Bausch Arti-Fol® metallic Shimstock 12 мкм	36
Bausch Arti-Fol® артикуляційна плівка 8 мкм	38
Рідини та спреї	40
Bausch Arti-Spot® індикатор завищених контактів	42
Bausch Arti-Spray® оклюзійний спрей	44
Bausch Bio-Ink®-Flow індикатор тиску на слизові	46
Bausch Arti-Bruх® оклюзійний лак	48
Arti-Pink віск для реєстрації прикусу	50
Артикуляційні флексиметричні смужки	54
Інструменти та аксесуари Bausch	58
Артикуляційні пінцети Bausch для паперу та фольги	60
Тримачі Аксесуари Bausch	62

Окклюзія — Вплив — Наслідки

Краніомандибулярна дисфункція

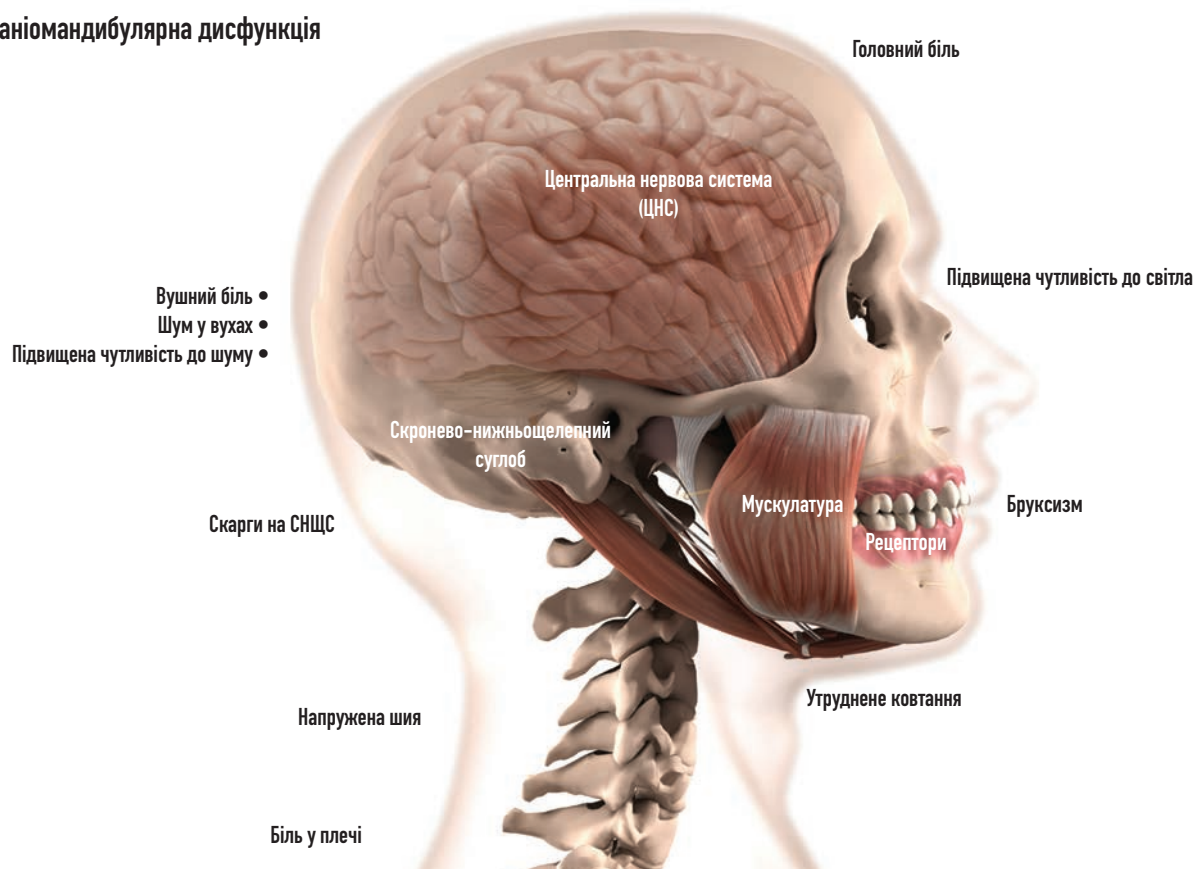

Точне виявлення передчасних контактів

Окклюзія – це змикання зубних рядів верхньої та нижньої щелепи.

Окклюзія є однією зі складових стоматогнатичної системи, яка включає анатомічну структуру скронево-нижньощелепного суглоба, жувальних м'язів, чутливих нервів, рецепторів тиску та центральної нервової системи.

Кожна реставрація, видалення або протезування зубів, а також ортодонтичне лікування змінюють статичну та динамічну окклюзію і, таким чином, можуть вплинути на анатомію в цілому.

Тому компанія Bausch поставила перед собою мету розробити для спеціалістів продукти для перевірки окклюзії, щоб домогтися відновлення індивідуальної фізіологічної окклюзії кожного пацієнта.

Слід враховувати не тільки контроль статичної окклюзії (контакт зубів без руху нижньої щелепи при максимальному змиканні), але і динамічну окклюзію.

Динамічна окклюзія, тобто контакти зубів, що виникають в результаті руху нижньої щелепи, включають переднє спрямування, спрямовуючу функцію ікл і групове спрямування.

Плівки товщиною 8 мкм і 12 мкм різних кольорів розроблені для того, щоб контролювати різні схеми руху по всій зубній дузі.

Наприклад, можна використовувати

чорну - для статичної окклюзії
червону - для латеротрузії
зелену - для медіотрузії
синю - для протрузії

Зміна звичної окклюзії, тобто звично прийнятої статичної окклюзії, може привести до зміни нервово-м'язового тону, що, в свою чергу, може спровокувати нервово-м'язову адаптацію і проявитися в краніомандибулярній дисфункції (КМД).

Взаємодія перелічених вище факторів наочно показана на діаграмі.

Науково визначені різні концепції окклюзії, які можуть служити шаблоном для реконструкції окклюзії. Однак, їх слід розуміти лише як моделі, оскільки не існує такого поняття, як «єдина окклюзія». Радше, слід приділяти увагу індивідуальній окклюзії з урахуванням біомеханічних умов кожного пацієнта під час лікування.

Продумане та розумне використання різних видів паперу та плівок різної товщини допоможе не пропустити важливі, але неочевидні передчасні контакти.

Артикуляційний папір Bausch товщиною 100 мкм і 200 мкм з прогресивною передачею кольору використовуються для загальної локалізації точок статичного контакту, оскільки він маркує будь-який матеріал та абсорбує слину. Їх можна використовувати як в стоматологічному кабінеті, так і в зуботехнічній лабораторії.

До групи артикуляційного паперу також входить папір Arti-Check® товщиною 40 мкм. Ці тонкі аркуші паперу покриті з обох сторін рідкими фарбами і точно маркують контактні точки завдяки малій товщині матеріалу, що зменшує змазування контактних точок.

Щоб задіяти м'язовий аспект, який має значний вплив на окклюзію, була розроблена система цифрового контролю окклюзії OccluSense®, яка дозволяє стоматологу оцінювати розподіл жувальної сили по всій зубній дузі в режимі реального часу.

Остаточна перевірка окклюзії з використанням відповідного обладнання важлива для того, щоб уникнути завищених контактів і пов'язаних з цим захворювань скронево-нижньощелепного суглоба.

	200 мкм	синій	просякнутий пігментом	двосторонній	200 мкм папір
	200 мкм	червоний	просякнутий пігментом	двосторонній	200 мкм папір
	100 мкм	синій	просякнутий пігментом	двосторонній	100 мкм папір
	100 мкм	червоний	просякнутий пігментом	двосторонній	100 мкм папір
	200 мкм	зелений	просякнутий пігментом	двосторонній	200 мкм папір
	100 мкм	зелений	просякнутий пігментом	двосторонній	100 мкм папір
	80 мкм	синій	просякнутий пігментом	двосторонній	80 мкм шовк
	80 мкм	червоний	просякнутий пігментом	двосторонній	80 мкм шовк
	80 мкм	зелений	просякнутий пігментом	двосторонній	80 мкм шовк
	40 мкм	синій/синій	покритий пігментом	двосторонній	20 мкм папір + 10 мкм + 10 мкм покриття
	40 мкм	червоний/червоний	покритий пігментом	двосторонній	20 мкм папір + 10 мкм + 10 мкм покриття
	40 мкм	синій/червоний	покритий пігментом	двосторонній	20 мкм папір + 10 мкм + 10 мкм покриття
	12 мкм	чорний/червоний	покритий пігментом	двосторонній	12 мкм плівка + 6 мкм + 6 мкм покриття
	12 мкм	чорний	покритий пігментом	односторонній	12 мкм плівка + 6 мкм покриття
	12 мкм	червоний	покритий пігментом	односторонній	12 мкм плівка + 6 мкм покриття
	12 мкм	зелений	покритий пігментом	односторонній	12 мкм плівка + 6 мкм покриття
	12 мкм	синій	покритий пігментом	односторонній	12 мкм плівка + 6 мкм покриття
	12 мкм	без покриття	без покриття	-	12 мкм плівка без покриття
	8 мкм	чорний	покритий пігментом	односторонній	8 мкм плівка + 6 мкм покриття
	8 мкм	червоний	покритий пігментом	односторонній	8 мкм плівка + 6 мкм покриття
	8 мкм	зелений	покритий пігментом	односторонній	8 мкм плівка + 6 мкм покриття
	8 мкм	синій	покритий пігментом	односторонній	8 мкм плівка + 6 мкм покриття
	8 мкм	чорний	покритий пігментом	двосторонній	8 мкм плівка + 6 мкм + 6 мкм покриття
	8 мкм	червоний	покритий пігментом	двосторонній	8 мкм плівка + 6 мкм + 6 мкм покриття
	8 мкм	зелений	покритий пігментом	двосторонній	8 мкм плівка + 6 мкм + 6 мкм покриття
	8 мкм	синій	покритий пігментом	двосторонній	8 мкм плівка + 6 мкм + 6 мкм покриття

Матеріали Bausch для перевірки артикуляції та оклюзії

З 1953 року ми спеціалізуємося на виробництві матеріалів для перевірки артикуляції та оклюзії і є важливою складовою стоматології.

З часом ми розширили асортимент нашої продукції відповідно до потреб професіоналів, а також з огляду на появу нових методів лікування та стоматологічних матеріалів.

На початку 1970-х років ми запропонували більш тонкий папір товщиною всього 40 мкм на додаток до випробуваного часом артикуляційного паперу та шовку.

У тому ж десятилітті з'явилася стоматологічна концепція гнатології, яка в даний час є галуззю функціональної діагностики. Для реалізації цієї концепції були необхідні більш тонкі тестові матеріали. З тих пір ми пропонуємо стійкі до розриву, тонкі і точні плівки різних кольорів і товщини.

Крім того, доступні рідкі фарби для маркування контактів, а також оклюзійні спреї та інші кольорові індикатори.

Ми представили нову систему OccluSense® для цифрового контролю оклюзії на виставці IDS 2019 у Кьольні.




Артикуляційний папір 200 мкм



- прогресивна передача кольору
- чітке маркування на вологих оклюзійних поверхнях
- видиме маркування на кераміці
- наростаюча інтенсивність кольору, залежно від тиску
- для перевірки статичної оклюзії
- великі, добре видимі відбитки
- м'який матеріал з мікрОВОлокнами – добре прилягає до оклюзійної поверхні
- для початкового контролю передчасних контактів
- підходить для всіх матеріалів



Артикуляційний папір 100 мкм

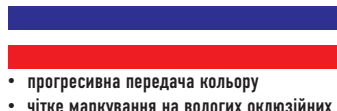

- прогресивна передача кольору
- чітке маркування на вологих оклюзійних поверхнях
- видиме маркування на кераміці
- наростаюча інтенсивність кольору, залежно від тиску
- для перевірки статичної та динамічної оклюзії
- високоточне, чітко візуалізоване маркування
- дуже м'який, стійкий до розриву матеріал з мікрОВОлокнами
- добре прилягає до оклюзійної поверхні
- для початкового контролю передчасних контактів
- підходить для всіх матеріалів



Arti-Ceram 200 мкм | 100 мкм



- прогресивна передача кольору
- чітке маркування на вологих оклюзійних поверхнях
- наростаюча інтенсивність кольору, залежно від тиску
- для перевірки статичної оклюзії (200 мкм)
- для перевірки статичної та динамічної оклюзії (100 мкм)
- високоточне, чітко візуалізоване маркування
- м'який матеріал з мікрОВОлокнами – добре прилягає до оклюзійної поверхні (200 мкм)
- дуже м'який, стійкий до розриву матеріал з мікрОВОлокнами (100 мкм)
- добре прилягає до оклюзійної поверхні
- видиме маркування на кераміці



Артикуляційний шовк 80 мкм



- прогресивна передача кольору
- чітке маркування на вологих оклюзійних поверхнях
- видиме маркування на кераміці
- наростаюча інтенсивність кольору, залежно від тиску
- для перевірки статичної та динамічної оклюзії
- високоточне, чітко візуалізоване маркування
- дуже м'яка, стійка до розривів шовкова тканина – добре прилягає до оклюзійної поверхні
- для початкового контролю передчасних контактів
- підходить для всіх матеріалів
- рекомендовано для методу Гербера



Артикуляційний папір 40 мкм



- чітке маркування на вологих оклюзійних поверхнях
- видиме маркування на кераміці
- наростаюча інтенсивність кольору, залежно від тиску та контакту
- для перевірки статичної та динамічної оклюзії
- високоточне, чітко візуалізоване маркування
- дуже тонкий папір
- підходить для всіх матеріалів
- прецизійне маркування оклюзійних контактів



Arti-Fol® metallic 12 мкм



- ультратонка металізована плівка
- надточне маркування всіх контактних пунктів
- жодного розмазування відбитка
- наростаюча інтенсивність кольору, залежно від контакту
- антистатична
- високоточні контакти
- добре прилягає до оклюзійної поверхні
- підходить для всіх матеріалів
- не рветься навіть при витягуванні
- чітке маркування на сухих керамічних матеріалах
- також доступна версія без покриття (Shimstock)
- також випускається у рулонах шириною 75 мм



Arti-Fol® 8 мкм




- ультратонка плівка
- надточне маркування всіх контактних пунктів
- жодного розмазування відбитка
- наростаюча інтенсивність кольору, залежно від контакту
- високоточні контакти
- добре прилягає до оклюзійної поверхні
- підходить для всіх матеріалів
- не рветься навіть при витягуванні
- також випускається у рулонах шириною 75 мм
- випускається з покриттям з однієї або двох сторін



OccluSense® 60 мкм

- реєстрація жувальної сили з кольоровим маркуванням на зубах і в цифровому форматі у вигляді гістограми
- вертикальне або горизонтальне співвідношення горбків та фісур візуалізуються різними кольорами
- покращена діагностика статичної та динамічної оклюзії
- візуалізація осьових навантажень при реконструкції з опорою на імпланти і при протезуванні
- виявлення передчасних контактів
- покращена комунікація та інформування пацієнтів
- цифровий сенсор тиску
- товщина 60 мкм, гнучкий, з кольоровим покриттям
- представлення розподілу жувальної сили у відсотках
- спрощена реєстрація результатів за допомогою програми OccluSense®-iPad-App

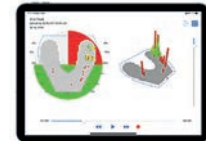



CELLERANT
BEST OF CLASS
TECHNOLOGY AWARD
2019



Bausch OccluSense® – цифровий контроль оклюзії

Прагнення точно візуалізувати оклюзійні контакти було однією з основних вимог, які ми висували до себе при розробці OccluSense®. Сенсор OccluSense® з кольоровим покриттям забезпечує чітке і вибіркове маркування, як і перевірені часом та надійні артикуляційні папір і фольга.

OccluSense® не тільки відображає кінцевий оклюзійний контакт з точки зору статичної динаміки, але й реєструє тимчасову прогресію до завершення оклюзійного руху.


Інтерпретація оклюзійного тиску, зафіксованого OccluSense®, відрізняється від класичних матеріалів для перевірки оклюзії тим, що ви отримуєте більше інформації з економією часу. Ця інформація включає реєстрацію оклюзійних контактів під час переміщення нижньої щелепи від початкового контакту до максимального змикання. OccluSense® від Bausch дозволяє кожному стоматологу реєструвати ці оклюзійні положення та оцінювати їх крок за кроком.

Наша система OccluSense® отримала нагороду Cellerant за найкращу технологію у своєму класі на конгресі ADA/FDI 2019 у Сан-Франциско, Каліфорнія, США.

У конкурсі OE-A 2021, організованому Асоціацією органічної та друкованої електроніки, наша система OccluSense® була визнана переможцем у категорії «Нові вироби».

Для отримання додаткової інформації про систему OccluSense® відвідайте наш вебсайт:

www.occlusense.com

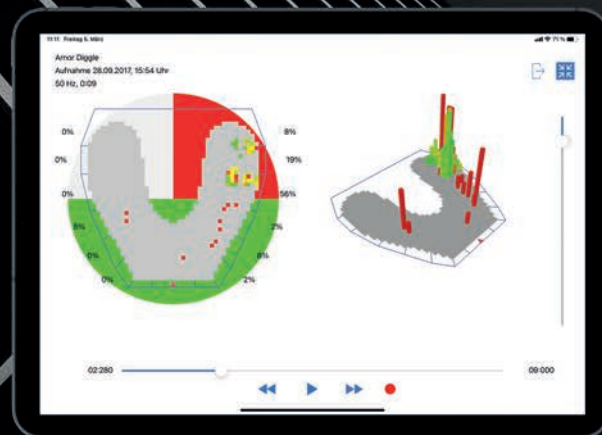



Цифровий контроль оклюзії в підході до холістичної терапії

Новий, відзначений нагородами і зручний у користуванні пристрій OccluSense® від Bausch поєднує в собі традиційну і цифрову реєстрацію розподілу жувального тиску на оклюзійних поверхнях.

OccluSense® з одноразовим сенсором тиску товщиною 60 мкм з покриттям червоного кольору використовується подібно звичайним смужкам для перевірки оклюзії та має ряд особливостей:

- Перевірка оклюзії по всій зубній дузі
- Візуалізація динаміки розподілу жувальної сили
- Представлення процентного розподілу жувального тиску
- Презентація латеротрузійних рухів та можливих пе-

решкод з боку медіотрузії

- Аналогове та цифрове відображення оклюзійного положення
- Візуальна реєстрація етапів лікування шляхом порівняння до і після
- Можна використовувати, наприклад, при сплінт-терапії, протезуванні на імплантатах, виконанні великих реставрацій, а також при остеопатичних і фізіотерапевтичних процедурах

Система OccluSense®:

Портативний пристрій OccluSense®

Портативний пристрій з живленням від батареї для збору даних з вбудованого сенсора тиску

Зарядний пристрій OccluSense®

Індуктивний зарядний пристрій для бездротової зарядки

Цифровий сенсор тиску OccluSense®


- товщина 60 мкм
- гнучкий
- покриття червоного кольору
- забезпечує реєстрацію 256 рівнів оклюзійного тиску
- для перевірки як статичної, так і динамічної оклюзії

OccluSense® CenterFix Центруючий пристрій BK 5040

Більше інформації про систему OccluSense® шукайте на нашому сайті www.occlusense.com

				REF
		Set		BK 5000
	L	25 x	==	BK 5025
	XL	25 x	==	BK 5035
		10 x	●	BK 5040


Принцип прогресивної передачі кольору

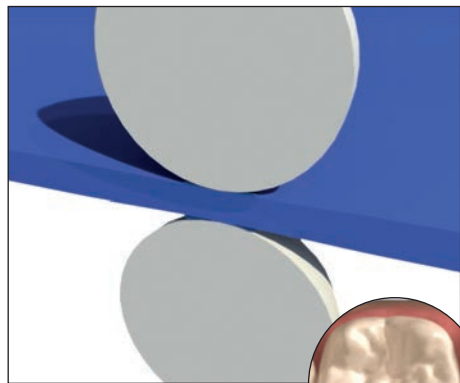

Низький тиск


Фізіологічну оклюзію можна виявити за принципом прогресивної передачі кольору.

Такі відбитки не є перешкоджаючими контактами.

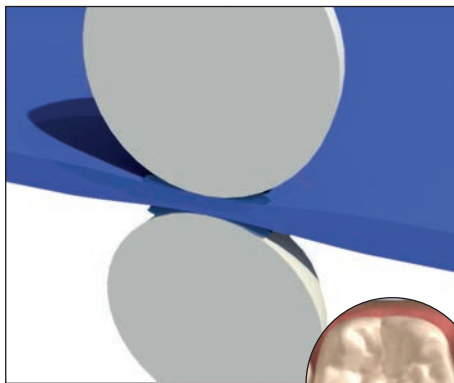

Вищий тиск

При вищому жувальному тиску більше пігменту видавлюється з матеріалу, і апроксимальні контактні пункти стають видимими завдяки темнішим відбиткам. Результатом є маркування, характерне для наших продуктів з прогресивною передачею кольору: видавлений пігмент утворює коло навколо контактного пункту.

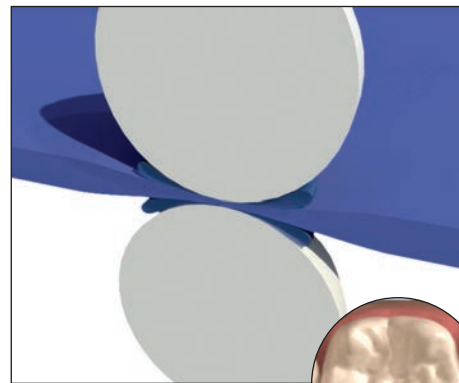

Максимальний тиск

У разі максимального змикання або наявності перешкод, цей ефект ще помітніший, оскільки в центрі відбитка фактична точка контакту практично не забарвлена, а окреслена темним кольоровим кільцем.

Принцип прогресивної передачі кольору



Артикуляційний папір 200 мкм, PROGRESS 100 100 мкм, Arti-Ceram 200 мкм і 100 мкм, а також артикуляційний шовк 80 мкм - це продукти з прогресивною технологією передачі кольору.



Артикуляційний папір і шовк Bausch з прогресивною передачею кольору підходять для візуалізації статичної оклюзії.

Губчаста структура м'якого паперу з мікрОВОлокнами або, відповідно, шовку, утримує пігмент, який видавлюється при натисканні. При використанні цих виробів маркуються всі контакти зубів.

Технологія прогресивної передачі кольору означає, що при збільшенні жувального зусилля з матеріалу видавлюється більше пігменту і переноситься на оклюзійні поверхні.


Для кращої адгезії пігменту на поверхнях з різних матеріалів та натуральних зубів, пігмент покращено додаванням адгезиву Transculase®. Чутливий до тиску артикуляційний папір забезпечує точну візуалізацію розподілу жувального тиску.

Таким чином, наші матеріали з технологією прогресивної передачі кольору ідеально підходять для перевірки оклюзії на зволжених слиною поверхнях.

Для точного представлення оклюзійних контактів ми рекомендуємо використовувати комбінацію різних тестових матеріалів.



Перевірка оклюзії за допомогою двоетапного методу

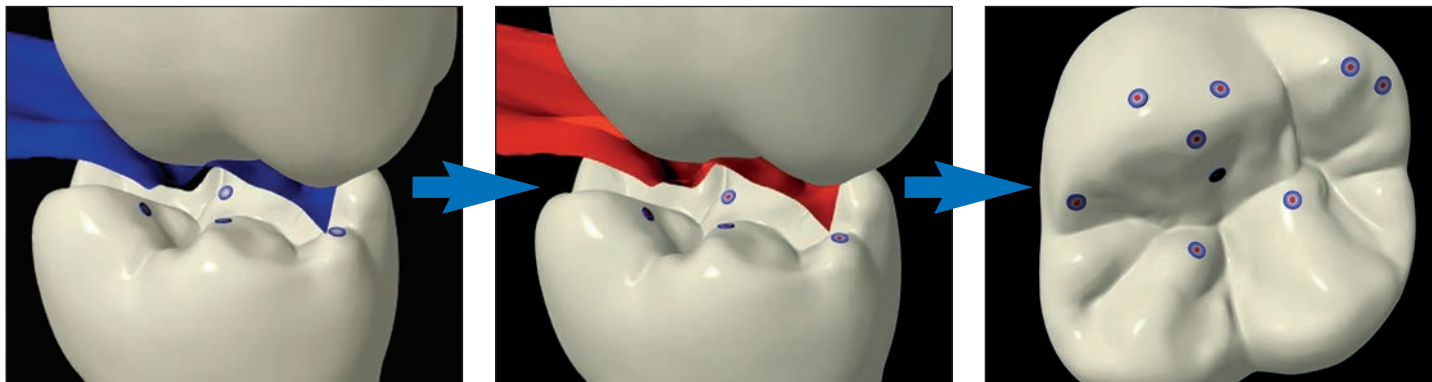

Для візуалізації контактів на зволожений слиною поверхнях ми рекомендуємо використовувати тестові матеріали з прогресивною передачею кольору в поєднанні з більш тонкою фольгою.

На першому етапі слід перевірити оклюзію за допомогою артикуляційного паперу товщиною 200 мкм або „PROGRESS 100“ товщиною 100 мкм. Ці види паперу аб-

сорбують слину і, таким чином, створюють ідеальну основу для точного маркування контактних пунктів на другому етапі за допомогою артикуляційної фольги Arti-Fol® metallic 12 мкм або Arti-Fol® 8 мкм.

Переваги двоетапного методу:

- Диференційоване представлення оклюзійних точок і поверхонь

- Висококонтрастне маркування різними кольорами
- Покращене перенесення пігменту з оклюзійних плівок на зволожені слиною поверхні за рахунок додавання адгезиву Transculase®.



Артикуляційний та оклюзійний папір

Артикуляційний шовк

Артикуляційний папір Бауша з прогресивною передачею кольору був нашим базовим продуктом при заснуванні компанії в 1953 році.

Невдовзі ми розробили артикуляційний шовк товщиною 80 мкм, який до сих пір використовується для контролю оклюзії, головним чином в зуботехнічних лабораторіях.

У 1972 році асортимент нашої продукції поповнився мікротонким оклюзійним папером товщиною 40 мкм.

Артикуляційний папір PROGRESS 100 товщиною 100 мкм з технологією прогресивної передачі кольору був представлений у 2000 році.

Артикуляційний папір з прогресивною передачею кольору 200 мкм



				REF
	52 mm x 18 mm	300 x		BK 01
	52 mm x 18 mm	300 x		BK 1001 
	52 mm x 18 mm	300 x		BK 02
	52 mm x 18 mm	300 x		BK 1002 
		50 x		BK 03
		50 x		BK 04
	52 mm x 18 mm	300 x		BK 05

 = дружить до довкілля пакування в багаторазовому диспенсері

 = рекомендовано для стоматологів

 = рекомендовано для зубних техніків

Артикуляційний папір з прогресивною передачею кольору 200 мкм



Артикуляційний папір з прогресивною передачею кольору 200 мкм

Артикуляційний папір Bausch товщиною 200 мкм з технологією прогресивної передачі кольору показує різну оклюзійну силу за допомогою відтінків кольору різної інтенсивності, залежно від жувального тиску:

- НИЗЬКИЙ ТИСК** - світлі відбитки
- ВИЩИЙ ТИСК** - темніші відбитки
- МАКСИМАЛЬНИЙ ТИСК** - темне кольорове кільце навколо контактного пункту

Стоматолог отримує точне зображення розподілу жувального тиску. Передчасні контакти стають помітними.

Смужки |  |  |

наприклад, для пломб, коронок і мостовидних протезів (реставраційна та функціональна стоматологія)

Підковоподібний папір |  |  |

наприклад, для сплінт-терапії, повних зубних протезів, перевірки всієї зубної дуги в артикуляторі та інтра-орально

Артикуляційний папір „PROGRESS 100“ 100 мкм



				REF	
	52 mm x 18 mm	300 x		BK	51
	52 mm x 18 mm	300 x		BK	52
		50 x		BK	53
		50 x		BK	54
	52 mm x 20 mm	50 x		BK	57
	52 mm x 20 mm	50 x		BK	58



= рекомендовано для стоматологів



= рекомендовано для зубних техніків

Артикуляційний папір „PROGRESS 100“ 100 мкм



Bausch PROGRESS 100

Артикуляційний папір товщиною 100 мкм з технологією прогресивної передачі кольору

Цей м'який армований волокнами папір має високу здатність передачі кольору і точно пристосовується до оклюзійної поверхні.

Завдяки технології прогресивної передачі кольору, він точно маркує точки оклюзійного контакту.

Унікальне поєднання адгезиву Transculase® і тонкого паперу показує чіткі відбитки при використанні на відполірованих металевих поверхнях або на гладких керамічних поверхнях.

Підковоподібний папір |  |  |

наприклад, для сплінт-терапії, повних зубних протезів, перевірки всієї зубної дуги в артикуляторі та інтраорально

Смужки |  |  |

наприклад, для пломб, коронок і мостовидних протезів (реставраційна та функціональна стоматологія)

Артикуляційний папір Arti-Ceram 200 мкм та 100 мкм



				
Arti-Ceram 200μm				
	52 mm x 20 mm	50 x		BK 92
		50 x		BK 93
Arti-Ceram 100μm				
	52 mm x 20 mm	50 x		BK 97
		50 x		BK 98

 = рекомендовано для стоматологів

 = рекомендовано для зубних техніків

Артикуляційний папір Arti-Ceram 200 мкм та 100 мкм



Артикуляційний папір Arti-Ceram зелений з прогресивною передачею кольору 200 мкм | 100 мкм

З метою досягнення максимально природного вигляду реставрацій, застосовуються різні види керамічних матеріалів, такі як склокераміка, цирконієва кераміка та польовошпатова кераміка. Для досягнення виняткової естетики (тимчасові) коронки, вкладки чи накладки з цих матеріалів мають надзвичайно гладко відполіровану поверхню. Проте тут стоматологи стикаються з проблемою коригування оклюзії на таких відполірованих поверхнях, які часто виготовляються за допомогою CAD/CAM технологій, і традиційні артикуляційні засоби не підходять.

Ми задумалися над проблемою ефективного виявлення таких передчасних контактів і зупинили свій вибір на перевіреному ЗЕЛЕНОМУ кольорі, який десятиліттями використовувався зубними техніками. Перевагою цього кольору є чіткі та висококонтрастні відбитки на естетично відполірованих керамічних поверхнях завдяки спеціальним кольоровим пігментам. Наш папір Arti-Ceram доступний у двох товщинах, 200 мкм і 100 мкм, у вигляді смужок та у формі підкови, і забезпечує точне коригування оклюзії для максимальної функціональності та естетики.

Смужки | 

наприклад, для пломб, коронок і мостовидних протезів (реставраційна та функціональна стоматологія)

Підковоподібний папір | 

наприклад, для сплінт-терапії, повних зубних протезів, перевірки всієї зубної дуги в артикуляторі та інтра-орально

Артикуляційний шовк з прогресивною передачею кольору 80 мкм



			REF
	80 mm x 3 m		BK 06
	80 mm x 3 m		BK 876
	80 mm x 3 m		BK 877
	16 mm x 10 m		BK 07
	16 mm x 10 m		BK 08

 = рекомендовано для стоматологів
 = рекомендовано для зубних техніків

Артикуляційний шовк з прогресивною передачею кольору 80 мкм



Артикуляційний шовк з прогресивною передачею кольору 80 мкм

Артикуляційний шовк Bausch – це високоякісний текстильний продукт, що володіє властивостями, характерними для артикуляційного паперу з прогресивною передачею кольору 200 мкм. Тканина стійка до розриву і, завдяки своїй невеликій товщині і гнучкості, ідеально прилягає до горбків і фісур.

Відбитки, отримані за допомогою артикуляційного шовку, надзвичайно точні і насичені.

За десятиліття на ринку артикуляційний шовк чудово зарекомендував себе як засіб для перевірки оклюзії і в стоматології, і в зуботехнічних лабораторіях.

Рулон |  | 

наприклад, для сплінт-терапії, повних зубних протезів, перевірки всієї зубної дуги в артикуляторі та інтраорально.

Артикуляційний папір Arti-Check® мікротонкий 40 мкм



				REF	
	103 mm x 20 mm	200 x		BK 09	
	103 mm x 20 mm	200 x		BK 10	
	100 mm x 70 mm	100 x		BK 11	
	100 mm x 70 mm	100 x		BK 12	
	16 mm x 15 m			BK 13	BK 1013
	16 mm x 15 m			BK 14	BK 1014
	22 mm x 10 m			BK 15	BK 1015
	22 mm x 10 m			BK 16	BK 1016
		150 x		BK 17	
		150 x		BK 18	
	52 mm x 20 mm	200 x		BK 61	
	52 mm x 20 mm	200 x		BK 62	
	52 mm x 20 mm	200 x		BK 63	
	103 mm x 20 mm	200 x		BK 80	
		150 x		BK 81	

 = дружить до довкілля пакування в багаторазовому диспенсері

 = рекомендовано для стоматологів

 = рекомендовано для зубних техніків

Артикуляційний папір Arti-Check® мікротонкий 40 мкм



Артикуляційний папір Arti-Check® мікротонкий 40 мкм

Артикуляційний папір Bausch товщиною 40 мкм - це мікротонкий папір, покритий з обох боків рідкими фарбами. Завдяки невеликій товщині матеріалу цей папір забезпечує надзвичайно точне маркування. В результаті значно скорочується кількість помилкових або розмазаних контактів.

Спеціальне покриття рідкими фарбами забезпечує чітке маркування всіх оклюзійних контактів навіть на таких матеріалах, як кераміка, металеві сплави, акрил, а

також зволжених слиною оклюзійних поверхнях.

Спеціальне покриття складається з безлічі мікрокапсул, заповнених пігментом. Навіть при найменшому жувальному тиску капсули лускаються і вивільняють пігмент, залишаючи чіткі відбитки. Засіб можна використовувати багаторазово, оскільки кольорове покриття містить досить багато пігменту.

Мікротонкий артикуляційний папір Arti-Check® ВК 63, ВК 80 та ВК 81 (двоколірний) дуже добре підходить для маркування статичної і динамічної оклюзії.

Аркуші |  |
наприклад, для сплінт-терапії, повних зубних протезів,

перевірки всієї зубної дуги в артикуляторі

Підковоподібний папір |  |  |
наприклад, для сплінт-терапії, повних зубних протезів, перевірки всієї зубної дуги в артикуляторі та інтра-орально

Смужки |  |  |
наприклад, для пломб, коронок і мостовидних протезів (реставраційна та функціональна стоматологія)

Рулон |  |  |
Рулони у диспенсері для економного використання наприклад, для пломб, коронок і мостовидних протезів (реставраційна та функціональна стоматологія)



Артикуляційні плівки Bausch

У 1970-х роках гнатологія стала важливою частиною стоматології. Щоб задовольнити потреби фахівців в області функціональної діагностики, в 1979 році ми додали в асортимент нашої продукції тонкі оклюзійні плівки.

У 1983 році була представлена фольга Arti-Fol® 8 мкм у чотирьох різних кольорах. Ці плівки випускаються з одностороннім або двостороннім кольоровим покриттям.

У 1999 році асортимент наших плівок був розширений і тепер включає в себе Arti-Fol® metallic товщиною 12 мкм.

У 2020 році був представлений продукт Arti-Fol® metallic Complete ВК 328.

Bausch Arti-Fol® metallic Shimstock 12 мкм чорна / червона



				REF
		22 mm x 20 m		BK 28
		22 mm x 20 m		BK 1028 
		20 x		BK 328

 = дружить до довкілля пакування в багаторазовому диспенсері

 = рекомендовано для стоматологів

 = рекомендовано для зубних техніків

Bausch Arti-Fol® metallic Shimstock 12 мкм чорна / червона



Arti-Fol® metallic 12 мкм чорна / червона

Arti-Fol® metallic 12 мкм чорна / червона - це металізована поліефірна плівка (shimstock) для перевірки оклюзії товщиною 12 мкм з двостороннім кольоровим покриттям.

Ця плівка вирізняється своєю гнучкістю, стійкістю до розриву і зниженим статичним зарядом. Невелика товщина матеріалу дозволяє максимальну апроксимацію зубів-антагоністів

Рулон |  | 

Рулони у диспенсери для економного використання наприклад, для пломб, коронок і мостовидних протезів (реставраційна та функціональна стоматологія)

Arti-Fol® metallic Complete 12 мкм

Arti-Fol® metallic Complete BK 328 поєднує в собі плівку доведеної ефективності Arti-Fol® metallic чорного/червоного кольору та нові картонні вставки-тримачі для забезпечення гігієни.

Завдяки особливій формі, Arti-Fol® metallic Complete можна використовувати окремо з лівого або правого боку або в комбінації для всієї зубної дуги.

Смужки зі вставками-тримачами з ламінованого

картону |  |

Гігієнічне використання без утримуючого інструменту, наприклад, для пломб, коронок і мостовидних протезів (реставраційна і функціональна стоматологія)

Bausch Arti-Fol® metallic Shimstock 12 мкм



				REF	
		22 mm x 20 m			BK 30
		22 mm x 20 m			BK 31
		22 mm x 20 m			BK 32
		22 mm x 20 m			BK 33
		8 mm x 50 mm	100 x		BK 35
		8 mm x 50 mm	100 x		BK 38
		16 mm x 20 m			BK 39
		75 mm x 20 m			BK 730
		75 mm x 20 m			BK 731



= рекомендовано для стоматологів



= рекомендовано для зубних техніків

Bausch Arti-Fol® metallic Shimstock 12 мкм



Bausch Arti-Fol® metallic Shimstock 12 мкм

Arti-Fol® metallic - це металізована поліефірна плівка (shimstock) для перевірки оклюзії товщиною 12 мкм з одностороннім або двостороннім кольоровим покриттям.

Ця плівка вирізняється своєю гнучкістю, стійкістю до розриву і зниженим статичним зарядом. Невелика товщина матеріалу дозволяє максимальну апроксимацію зубів-антагоністів. Плівка точно маркує оклюзійні контакти на всіх матеріалах. Таким чином, значно скоро-

чується кількість розмазаних або помилкових контактів.

Металізована зворотна сторона плівки дозволяє уникнути плутанини між стороною без покриття і стороною з кольоровим покриттям. Крім того, фольга має антистатичні властивості завдяки металізації.

Попередньо нарізані смужки Arti-Fol® metallic BK 35 шириною 8 мм в поєднанні зі щипцями Arti-Fol® BK 145 (див. стор 61) особливо підходять для перевірки апроксимальних контактів при установці мостовидних протезів або коронок.

Як доповнення до Arti-Fol® metallic ми пропонуємо кла-

сичну плівку Shimstock без кольорового покриття шириною 8 мм та 16 мм.

Ви можете завантажити протокол для shimstock з нашого веб-сайту:
www.bauschdental.com/downloads.

Рулони шириною 22 мм |  |  |

Рулони у диспенсері для економного використання наприклад, для плombs, коронок і мостовидних протезів (реставраційна та функціональна стоматологія)

Рулони шириною 75 мм |  |

наприклад, для оклюзійних шин, повних зубних протезів, перевірки всієї зубної дуги в артикуляторі

Артикуляційна плівка Arti-Fol® 8 мкм



				REF	
 	22 mm x 20 m			BK 20	BK 1020
	22 mm x 20 m			BK 21	BK 1021
	22 mm x 20 m			BK 22	BK 1022
	22 mm x 20 m			BK 23	BK 1023
	22 mm x 20 m			BK 24	BK 1024
	22 mm x 20 m			BK 25	BK 1025
	22 mm x 20 m			BK 26	BK 1026
	22 mm x 20 m			BK 27	BK 1027
	75 mm x 20 m			BK 70	
	75 mm x 20 m			BK 71	
	75 mm x 20 m			BK 72	
	75 mm x 20 m			BK 73	
	75 mm x 15 m			BK 74	
	75 mm x 15 m			BK 75	
	75 mm x 15 m			BK 76	
	75 mm x 15 m			BK 77	
 	75 mm	1 x		BK 137	
	22 mm	1 x		BK 139	

 = рекомендовано для стоматологів

 = рекомендовано для зубних техніків

Артикуляційна плівка Arti-Fol® 8 мкм



Артикуляційна плівка Arti-Fol® 8 мкм

Arti-Fol® 8 мкм - це ультратонка поліефірна плівка для перевірки оклюзії товщиною 8 мкм з одностороннім або двостороннім кольоровим покриттям.

Тонке кольорове покриття містить воски і пігменти, збагачені гідрофільними компонентами, для поліпшення маркування на різних матеріалах.

Ця плівка вирізняється малою товщиною матеріалу і забезпечує точне й чітко окреслене маркування оклюзійних контактів.

Артикуляційні плівки Bausch Arti-Fol® особливо підходять для маркування статичної та динамічної оклюзії різними кольорами. Для цього доступні чотири різні кольори, щоб відобразити статичні та різні функціональні динамічні рухи (протрузія, латеротрузія, медіотрузія).

Різні кольори також можна використовувати для воскового моделювання в техніці wax-up в лабораторії.

Рулони шириною 22 mm |  |  |

Рулони у диспенсері для економного використання наприклад, для пломб, коронок і мостовидних протезів (реставраційна та функціональна стоматологія)

Артикуляційна плівка Arti-Fol® товщиною 8 мкм і шириною 75 мм

Плівки для перевірки оклюзії шириною 75 мм доступні в чотирьох кольорах. Широкі плівки в основному використовуються в зуботехнічних лабораторіях.

Для полегшення роботи з артикулятором ми пропонуємо наш спеціальний Y-подібний артикуляційний пінцет Бауша BK140 (див. стор 63).

Рулони шириною 75 mm |  |

наприклад, для сплiнт-терапії, повних зубних протезів, перевірки всієї зубної дуги в артикуляторі



Рідини та спреї


З 1980-х років ми постачаємо рідини та спреї для корекції протезів та реставрацій:

- Arti-Spot® – рідкий індикатор для перевірки точності установки коронок, легко наноситься
- Arti-Spray® – аерозольний індикатор для тієї ж мети, для економії часу при використанні

Bio-Ink®-Flow – паста-індикатор для маркування болючих точок тиску на слизові – була представлена в 2016 році.

Arti-Brux® – фарба-індикатор для розширеної діагностики оклюзії – була додана до нашого портфолію в той же період.

Bausch Arti-Spot® індикатор завищених контактів

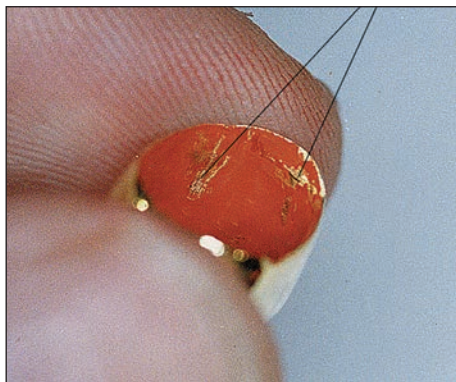

				REF	
	Arti-Spot® 1	15 ml		BK	85
	Arti-Spot® 2	15 ml		BK	86
	Arti-Spot® 3	15 ml		BK	87



= рекомендовано для стоматологів



= рекомендовано для зубних техніків

Bausch Arti-Spot® індикатор завищених контактів



Arti-Spot® індикатор завищених контактів

Arti-Spot® – це рідкий індикатор, що дозволяє перевірити наскільки точно підігнані коронки, вкладки, накладки, телескопічні коронки, кламери та поверхні тертя.

Arti-Spot® наноситься за допомогою пензля на поверхню, яку необхідно перевірити, і за кілька секунд розчинник випаровується, залишаючи тонкий шар фарби товщиною приблизно 3 мкм. Кожен контакт руйнує шар фарби точно в місці контакту. Область контакту стає чітко видимою саме у цій точці.

Ми пропонуємо три різні кольори для висококонтрастного відображення на різних матеріалах.


Arti-Spot® легко видаляється гарячою водою та засобами для механічного очищення (зубною або міжзубною щіткою). За допомогою спирту, ізопропілового спирту або струменю пари можна розчинити навіть найменші залишки фарби.

Arti-Spot® можна видалити з запечатаних гіпсових моделей тонким пензликом.

Флакон з пензликом |  | 

Точне нанесення на поверхню, яку необхідно перевірити (без прямого інтраорального нанесення) наприклад, для коронок, вкладок, накладок, телескопічних коронок, кламерів і поверхонь тертя

Bausch Arti-Spray® оклюзійний спрей

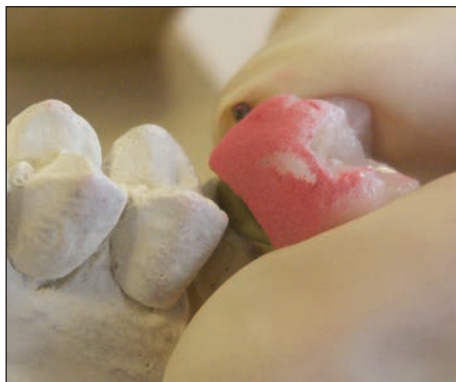

				REF
	Arti-Spray®	75 ml		BK 285
	Arti-Spray®	75 ml		BK 286
	Arti-Spray®	75 ml		BK 287
	Arti-Spray®	75 ml		BK 288



= рекомендовано для стоматологів



= рекомендовано для зубних техніків

Bausch Arti-Spray® оклюзійний спрей



Bausch Arti-Spray® оклюзійний спрей

Arti-Spray® - це універсальний маркувальний спрей чотирьох різних кольорів для перевірки оклюзійних контактів, а також точної підгонки коронок, мостовидних протезів, знімних протезів і часткових протезів.

Arti-Spray® можна точно дозувати, він утворює тонкий порошкоподібний шар фарби, який легко видаляється струменем води або пари, не залишаючи слідів. Arti-Spray® розпилюється з відстані 3-5 см на оклюзійну поверхню або внутрішню поверхню коронки чи мостовидного протеза.

Всі контактні пункти легко розпізнаються як безбарвні плями на кольоровому фоні. При необхідності контактні пункти можна позначити кольоровою ручкою або артикуляційною фольгою Arti-Fol® для подальшої оцінки. Arti-Spray® також можна використовувати для перевірки апроксимальних контактів при установці коронок або мостовидних протезів.


Балончик з розпилювачем

ВК 285 |  |

ВК 286 | ВК 287 | ВК 288 |  |  | 

Швидке нанесення на поверхню, яку необхідно перевірити (без прямого інтраорального нанесення) наприклад, для коронок, вкладок, накладок, телескопічних коронок, кламерів і поверхонь тертя

Bausch Bio-Ink®-Flow індикатор тиску на слизові

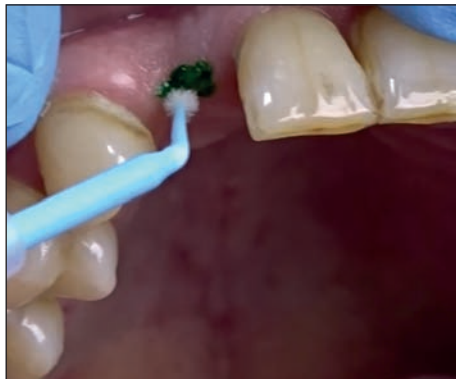

				REF
	Set	1 ml	●	BK 205
		1 ml	●	BK 206

 = рекомендовано для стоматологів

Bausch Bio-Ink®-Flow індикатор тиску на слизові



Bausch Bio-Ink®-Flow індикатор тиску на слизові

Bio-Ink®-Flow – це зелена, високов'язка, проста в нанесенні паста для маркування болючих ділянок на слизовій оболонці, викликаних тиском на слизову, та ідентифікації пунктів тиску на зубному протезі. Bio-Ink®-Flow також можна використовувати для позначення лінії АН (вібруючої зони), країв базису протеза та вестибулярної складки.

Bio-Ink®-Flow наноситься на попередньо висушені слизові відповідних ділянок. При установці сухого зубного протеза кольоровий індикатор, нанесений на болючі ділянки слизової, переноситься на зубний протез, показуючи місце, яке необхідно скорегувати.

Шприц-аплікатор з голкою |  |
Набір ВК 205: вкл. одноразові аплікатори, тримач аплікатора для точного нанесення на слизову оболонку

Шприц-аплікатор з голкою |  |
ВК 206: точне нанесення на слизову оболонку

Bausch Arti-Bruх® оклюзійний лак



				REF	
	Applicator	0,15 ml		BK 88	
	Set	15 ml		BK 89	

 = рекомендовано для стоматологів

Bausch Arti-Brux® оклюзійний лак



Bausch Arti-Brux® оклюзійний лак

Arti-Brux®- оклюзійний лак червоного кольору, призначений для візуалізації схеми рухів на ретельно відполірованих реставраціях і протезах, а також оклюзійних шинах.

Стойке до слини, тонке і рівномірне кольорове покриття дозволяє візуалізувати динамічну оклюзію пацієнта протягом тривалого періоду часу (максимум 24 години). Парафункції (бруксизм) можуть бути візуалізовані на жорстких оклюзійних шинах або протезах. Також можна перевіряти оклюзійні концепції, наприклад захищену іклами оклюзію, тощо.

Флакон з одноразовими пензликами ВК 89 |  |
Точне нанесення на реставрації, протези та оклюзійні шини

Одноразовий аплікатор ВК 88 |  |
Точне нанесення на реставрації, протези та оклюзійні шини



Arti-Pink віск для реєстрації прикусу

У 2024 році ми додали до свого портфоліо віск для реєстрації прикусу Arti-Pink.

Воски застосовувалися стоматологами для реєстрації прикусу, починаючи з 19 століття, коли стоматологія стала більш методичною та науковою. Цей віск був розроблений для визначення точного положення зубів і прикусу пацієнта при протезуванні зубів, наприклад, виготовленні коронок, мостів або повних зубних протезів.

Незважаючи на появу нових матеріалів та технологічних розробок, наприклад силіконів, інших відбиткових матеріалів та технологій зняття цифрових відбитків, віск для реєстрації прикусу залишається важливим матеріалом і широко використовується у стоматології.

Специфічні властивості воску можуть бути корисні при спеціальних стоматологічних процедурах.

Arti-Pink віск для реєстрації прикусу



				REF
	150 x 80 x 3 mm	12 x	●	BK 6003
	„L“ 79 x 68 x 3 mm	24 x	●	BK 6016
	„M“ 68 x 60 x 3 mm	24 x	●	BK 6017
	„S“ 64 x 56 x 3 mm	24 x	●	BK 6018



= рекомендовано для стоматологів



= рекомендовано для зубних техніків

Arti-Pink віск для реєстрації прикусу



Arti-Pink віск для реєстрації прикусу

Віск Arti-Pink від компанії Bausch використовується для точної реєстрації прикусу та дозволяє точно відтворити контури інтеркуспідації. Характеризується чудовими моделюючими властивостями.

Завдяки товщині 3 мм цей екстратвердий віск доступний не тільки у формі пластин 150 мм x 80 мм, але також овальної форми в готових розмірах S, M і L.

Перед використанням Arti-Pink нагрійте екстратвердий віск у гарячій воді, поки він не досягне температури плавлення прибіл. 55°C. Це робить його пластичним та готовим до використання для точної реєстрації прикусу.

Пластини | |

Перевірений віск для реєстрації прикусу при протезуванні зубів, напр. виготовленні повних зубних протезів та в загальному для реєстрації співвідношення верхньої та нижньої щелеп.

Овальна форма | |

Перевірений віск у вигляді готових до використання овалів для реєстрації прикусу при протезуванні зубів, напр. виготовленні повних зубних протезів та в загальному для реєстрації співвідношення верхньої та нижньої щелеп.



Артикуляційні флексиметричні смужки

Ще в 1980 році ми додали до свого портфоліо флексиметр, як окремий силіконовий інструмент. Результатом подальших розробок стала поява флексиметричних смужок в 2002 році.

Артикуляційні флексиметричні смужки



				REF
	1,0 mm	15 x		BK 250
	1,5 mm	15 x		BK 251
	2,0 mm	15 x		BK 252
1,0 mm 1,5 mm 2,0 mm		3 x 5 = 15	  	BK 253
1,0 mm 1,5 mm 2,0 mm		3 x 1 = 3	  	BK 254



= рекомендовано для стоматологів



= рекомендовано для зубних техніків

Артикуляційні флексиметричні смужки



Артикуляційні флексиметричні смужки

Флексиметричні гнучкі смужки трьох різних товщин, виготовлені зі силікону, який стерилізується, використовуються для визначення відстані препарування або висоти препарування під час підготовки зубів до реставрацій.

Флексиметричні гнучкі смужки товщиною 1,0 мм, 1,5 мм і 2,0 мм можна використовувати для рестрації прикусу з контрольованою висотою прикусу, наприклад, в разі тертя протезів або для коригування оклюзійних шин.

Силіконові смужки |  |  |
Для перевірки відстані препарування

При нанесенні кольорового шару за допомогою Arti-Spot® або Arti-Spray®, флексиметричні смужки можна використовувати для перевірки відстані препарування. Якщо відстань занадто мала, на препаруванні буде видно кольорове маркування.



Інструменти та аксесуари Bausch

Артикуляційні пінцети та щипці Бауша значно підвищують комфорт використання наших продуктів для перевірки оклюзії.

Ми пропонуємо високоякісні інструменти для двостороннього контролю оклюзії або апроксимальних контактів.

Артикуляційні пінцети Bausch Arti-Fol® для паперу та фольги



				REF
		1 x		BK 132
		1 x		BK 133
		1 x		BK 142
		1 x		BK 144
		1 x		BK 145

 = рекомендовано для стоматологів

Артикуляційні пінцети Bausch Arti-Fol® для паперу та фольги



Артикуляційні пінцети Bausch Arti-Fol®

Артикуляційний пінцет Arti-Fol® BK 132 | 

Ми рекомендуємо самозатискаючий артикуляційний пінцет BK 132 з фрезерованою поздовжньою канавкою для особливо надійного захоплення артикуляційного паперу і фольги.

Артикуляційний пінцет типу “Miller” BK 142 | 

Артикуляційний пінцет типу “Miller” – це високоякісний інструмент для утримання різних типів артикуляційного паперу.

Артикуляційний пінцет

Arti-Fol® “SteriSlide” BK 144 | 

Артикуляційний пінцет Arti-Fol® “SteriSlide” з фрезерованою поздовжньою канавкою для надійного захоплення артикуляційних плівок. Крім того, цей пінцет має повзунок (допоміжний при стерилізації), який можна використовувати для утримання щипців відкритими під час процесу стерилізації.

Артикуляційний пінцет для апроксимальних контактів


Arti-Fol® BK 145 | 

Пінцет Arti-Fol розроблений доктором Мюллером і призначений для швидкої та точної підгонки реставрацій.

Інноваційний та зручний дизайн робить продукт набагато легшим у використанні порівняно зі звичайними методами. Висока сила затиску утримує оклюзійну плівку з двох сторін і дозволяє стоматологу проводити точну контактну корекцію. Плівку можна вставити швидко і легко. Інструмент не має порожнин, його можна дезінфікувати та стерилізувати звичайними методами.

Пінцет для апроксимальних контактів Arti-Fol® рекомендовано використовувати в поєднанні з фольгою Arti-Fol® metallic товщиною 12 мкм і шириною 8 мм. Arti-Fol® metallic ідеально підходить для перевірки апроксимальних контактів при установці мостовидних протезів або коронок завдяки своїй високій міцності на розтягування, чіткому маркуванню і малій товщині.

Тримачі | Аксесуари Bausch

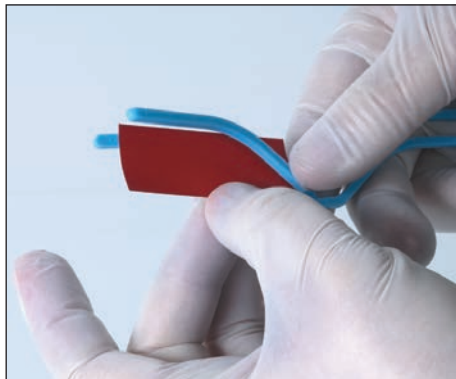

				REF
		1 x		BK 130
		1 x		BK 133
		1 x		BK 140
		5 x		BK 143
				REF
		1 x		BK 137
		1 x		BK 139



= рекомендовано для стоматологів



= рекомендовано для зубних техніків

Тримачі | Аксесуари Bausch



Тримачі Bausch

Гнучка прикусна вилка BK 130 (+ 2x BK 133) |  |
Наша гнучка прикусна вилка є комбінацією двох вигнутих пінцетів BK 133 і гумової ручки BK 130. Пінцети просто вставляються в гумову ручку, а відстань між ними можна регулювати для різних розмірів щелеп.

Y-подібний тримач Bausch BK 140 |  |
Y-подібний тримач Бауша для плівок шириною 75 мм або шовку шириною 80 мм. Цей тримач призначений для використання в артикуляторі.

Прикусна рамка Fix-Clip® BK 143 |  |
Прикусна рамка Fix-Clip® є альтернативою металевим інструментам та призначена для міцного утримання артикуляційного паперу та плівок для перевірки прикусу. Гнучкий інструмент можна стерилізувати.

Аксесуари

Акриловий диспенсер BK 137 для наших широких плівок та шовку.

Пластиковий диспенсер для паперу і плівок шириною 22 мм – номер для замовлення BK139. Цей диспенсер має вбудований металевий ніж для відрізання стрічки.



Dr. Jean Bausch GmbH & Co. KG
Oskar-Schindler-Straße 4
D-50769 Köln - Germany
Tel: +49-221-70936-0
Fax: +49-221-70936-66
info@bauschdental.de
www.bauschdental.de

Bausch Articulating Papers, Inc.
12 Murphy Drive
Nashua, NH 03062, U.S.A.
Tel: +1-603-883-2155
Tel: 888-6-BAUSCH
Fax: +1-603-883-0606
info@bauschdental.com
www.bauschdental.com

Bausch Articulating Papers (Australasia) Pty. Ltd
ABN 73093760402
G.P.O. Box 3733, Sydney NSW 2001, Australia
Tel: +61-2-9345-1945
Fax: +61-2-9345-1955
info@bauschdental.com.au
www.bauschdental.com.au

www.bauschdental.com

Bausch Articulating Papers Japan K. K.
5F, 1-1-31, Nishimidorigaoka
Toyonakashi, Osaka 560-0005 - Japan
Tel: +81 6-6845-0020
Fax: +81 6-6845-0024
E-Mail: info@bauschdental.jp
Web: www.bauschdental.jp

Bausch Importação de Materiais Odontológicos Ltda.
Rua Paulo Eduardo Xavier de Toledo, 379 salas 8 e 9
13304-240 Itu-SP, Brasil
Tel: +55 11 3020-9263
vendas@bauschbrasil.com.br
www.bauschbrasil.com.br

Bausch Articulating Papers Co., Ltd.
#1004, The O Ville B/D, 344, Jong-ro, Jongno-Gu
Seoul 03114, Korea
Tel: +82 2-2236-0158
Fax: +82 2-6499-9158
info@bauschdental.kr
www.bauschdental.kr

